

 Made in Poland. Established 1990.



# 2017 POL-EKO-APARATURA продукция



## POL-EKO-APARATURA sp.j.

Компания POL-EKO-APARATURA действует на рынке Республики Польша с 1990 г.  
В 2006 г. начато производство продукции на экспорт. В настоящее время география экспорта охватывает более 70 стран по всему миру.



■ - страны, в которых представлена наша продукция



Официальный дистрибутор компании POL-EKO-APARATURA  
на территории России:

ООО "Научная система"  
8 812 677-56-96  
[www.ssci-ltd.ru](http://www.ssci-ltd.ru)  
[post@ssci-ltd.ru](mailto:post@ssci-ltd.ru)



\\ Оглавление	3
\\ <b>Термостатирующее оборудование</b>	<b>4</b>
\\ Охлаждаемые инкубаторы (ST)	6
\\ Лабораторные холодильники	16
\\ Лабораторные морозильники	24
\\ Ультранизкотемпературные морозильники	30
\\ Сухожаровые шкафы, инкубаторы, охлаждаемые инкубаторы — исполнение STD и TOP+	34
\\ Лабораторные инкубаторы	38
\\ Охлаждаемые инкубаторы (IL)	40
\\ Инкубаторы на элементах Пельтье	42
\\ Охлаждаемые инкубаторы (IL) с фотопериодической системой	44
\\ Охлаждаемые инкубаторы с фитотронной системой	45
\\ Охлаждаемые инкубаторы серия ST BD	46
\\ <b>Сухожаровые шкафы</b>	<b>48</b>
\\ Сухожаровые шкафы с продувкой азотом	50
\\ Сухожаровые шкафы SIMPLE	51
\\ Сухожаровые шкафы проходные	53
\\ <b>Лабораторные стерилизаторы</b>	<b>54</b>
\\ <b>Климатические камеры</b> , в т. ч. с фитотронной системой	<b>56</b>
\\ Климатические камеры KKS	63
\\ Климатические камеры с паровым увлажнителем (KKS) с системой обратного осмоса для подготовки воды	68
\\ <b>Программное обеспечение</b>	<b>66</b>
\\ <b>Опции и принадлежности</b>	<b>67</b>
\\ <b>Прочее лабораторное оборудование</b>	<b>81</b>
\\ Регистратор RT 2014	82
\\ Счетчик колоний	85
\\ Лабораторные шейкеры	86




.....

## ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Охлаждаемые инкубаторы (ST) и лабораторные холодильники

### ► Материал изготовления

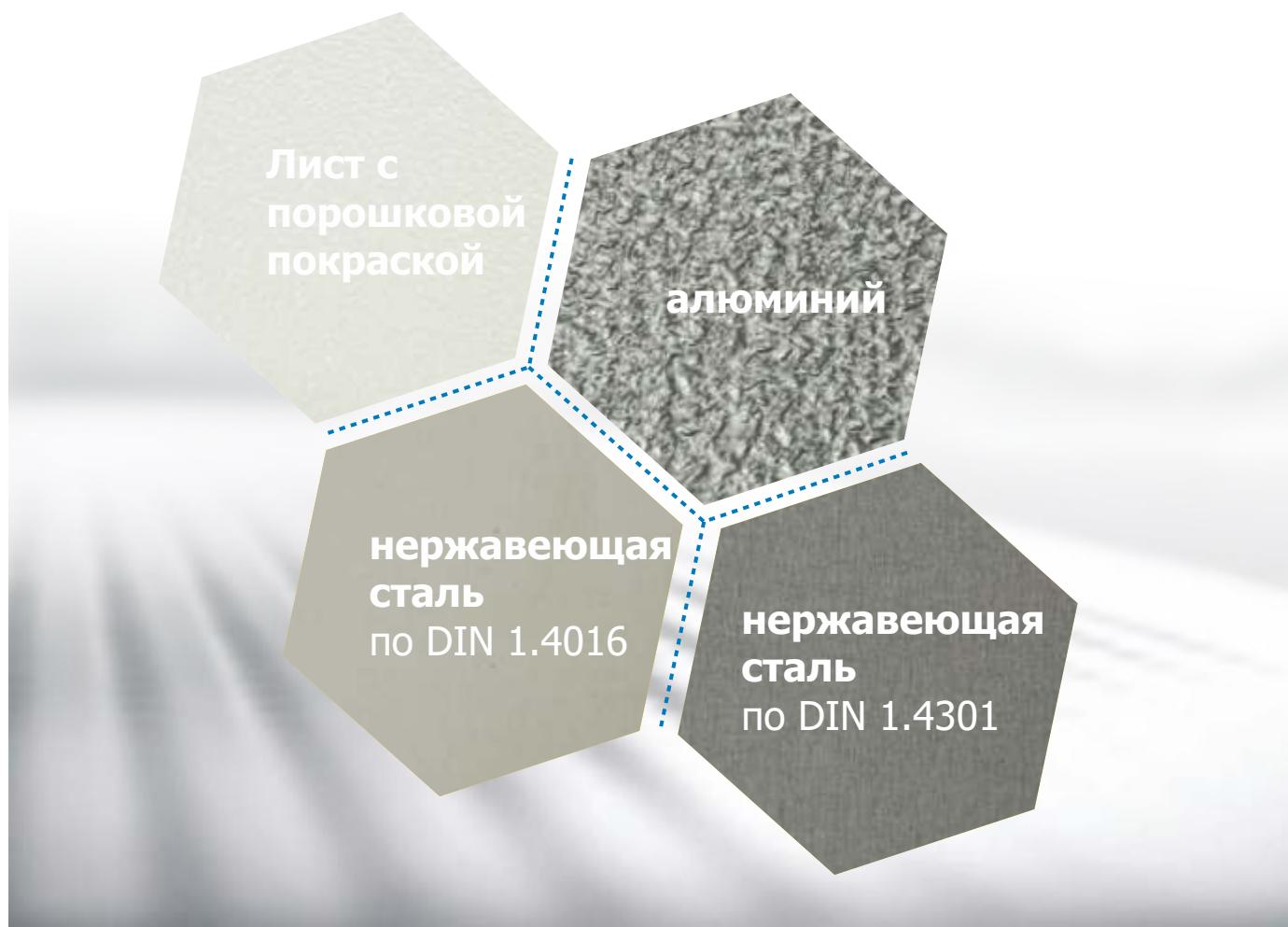

Выпускается широкий ассортимент моделей, которые отличаются объемом, наличием расширенных функций контроллера и материалами. Возможные исполнения:

	камера	корпус	температурная защита	контроллер
BASIC	алюминий	лист с порошковой покраской	класс 1.0	базовый
COMFORT	нержавеющая сталь по DIN 1.4016	лист с порошковой покраской	класс 1.0	базовый
COMFORT/S	нержавеющая сталь по DIN 1.4016	полированная нержавеющая сталь	класс 1.0	базовый
PREMIUM	нержавеющая сталь по DIN 1.4301	лист с порошковой покраской	класс 2.0	базовый
PREMIUM/S	нержавеющая сталь по DIN 1.4301	полированная нержавеющая сталь	класс 2.0	базовый
PREMIUM TOP+	нержавеющая сталь по DIN 1.4301	лист с порошковой покраской	класс 3.3	TOP+
PREMIUM/S TOP+	нержавеющая сталь по DIN 1.4301	полированная нержавеющая сталь	класс 3.3	TOP+

## Охлаждаемые инкубаторы (ST)

ST

# Охлаждаемые инкубаторы (ST)

### ► Применение

- Определение БПК
- Микробиологические исследования
- Термостатирование при выращивании растений и микроорганизмов
- Хранение реактивов и образцов для физико-химического анализа



Охлаждаемые инкубаторы (ST) могут обеспечить стабильное термостатирование при температуре от +3 до +70°C независимо от условий в помещении.

### ► Аттестация




Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).



Изделия версий **BASIC, COMFORT, PREMIUM** оснащены микропроцессорным PID-контроллером с графическим ЖК-дисплеем и сенсорной клавиатурой с подсветкой.

#### ► Преимущества контроллера:

- шестисегментная температурно-временная программа;
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- память на 3 пользовательских программы;
- регулируемая задержка запуска термостатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин.;
- регулируемая длительность термостатирования и освещения (для ST/FOT) от 1 мин. до 31 дня / от 1 мин. до 99 ч 59 мин. или непрерывно;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- работа в режиме приоритета температуры;
- функция размораживания;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- цифровой таймер;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- внутренняя память для хранения до 2046 показаний;
- принудительная циркуляция воздуха с optionalным контролем скорости вентилятора от 50 до 100%;
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы.

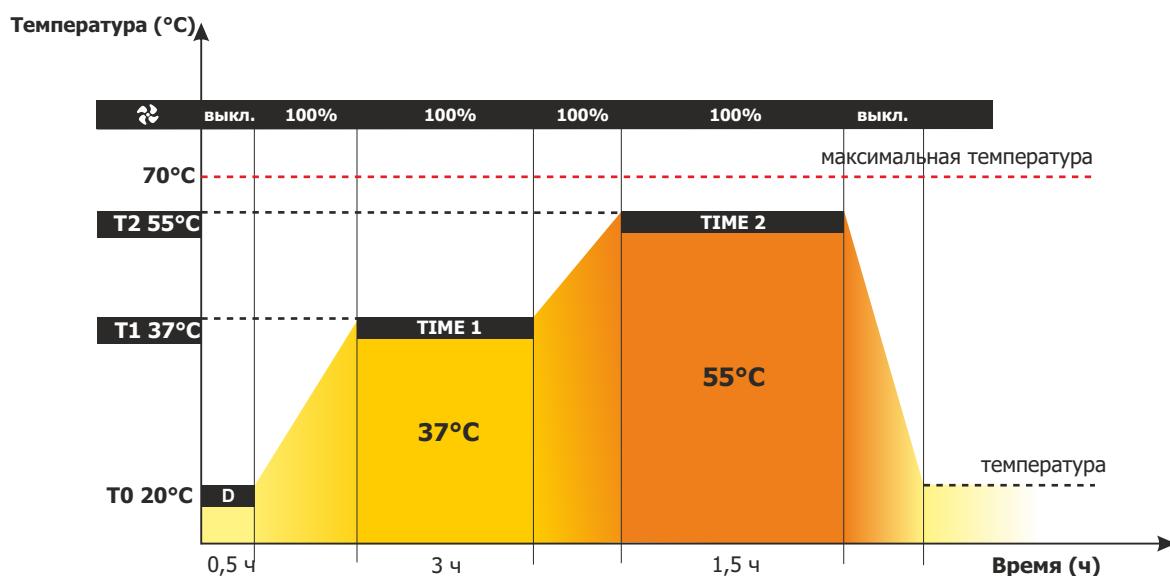

■ - параметр задается пользователем

D - настраиваемая задержка старта (от 1 мин. до 99 ч 59 мин.)

■ - контроль скорости вентилятора (опция)

■ T1/T2/ - температура сегмента

■ TIME 1/2/3 - длительность сегмента

## Охлаждаемые инкубаторы (ST)

ST

### ► Панель управления



### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур от +3 до +40°C;
- сертификат заводского испытания (при +37°C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: чешский, английский, эстонский, французский, немецкий, итальянский, латвийский, польский, португальский, русский, испанский;
- класс температурной защиты по DIN 12880 — 1.0 для моделей BASIC и COMFORT и 2.0 для моделей PREMIUM;
- сигнализация при открытых дверцах;
- в моделях ST 1200 и 1450 стандартно установлены колесики.



## ▀ Исполнение PREMIUM TOP+

Все изделия в исполнении ТОР+ оснащаются микропроцессорным PID-контроллером с большим (5,7") полноцветным сенсорным ЖК-экраном с интуитивно понятным меню и удобным программным обеспечением. Одним из важнейших преимуществ является возможность подключения к сети Ethernet для удаленного управления с любого компьютера.


## ▀ Функционал контроллера:

- многосегментные температурно-временные программы (до 100 сегментов);
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- регулируемая задержка запуска терmostатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин. или по дате/времени;
- контроль доступа с помощью входа в систему
- программирование на 7 дней;
- регулируемая длительность терmostатирования и освещения (для ST/FIT) от 1 мин. до 999 ч 59 мин. или непрерывно;
- регулируемое линейное изменение температуры;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- функция администратора для управления учетными записями пользователей;
- возможность пользовательской калибровки температуры;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- работа с приоритетом температуры или приоритетом времени;
- функция размораживания;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- цифровой таймер;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- принудительная циркуляция воздуха с контролем скорости вентилятора от 50 до 100%;
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы.

## ▀ Функции соответствия GLP:

- защита настроек паролем;
- память на 20 пользовательских программ;
- внутренняя память до 4100 показаний для каждого пользователя с возможностью просматривать значения на дисплее или ПК в табличной или графической форме;
- порт USB обеспечивает прямую запись данных или передачу на флеш-накопитель;
- журнал событий.


Программное обеспечение ТОР+ Control  
Температура (°C)

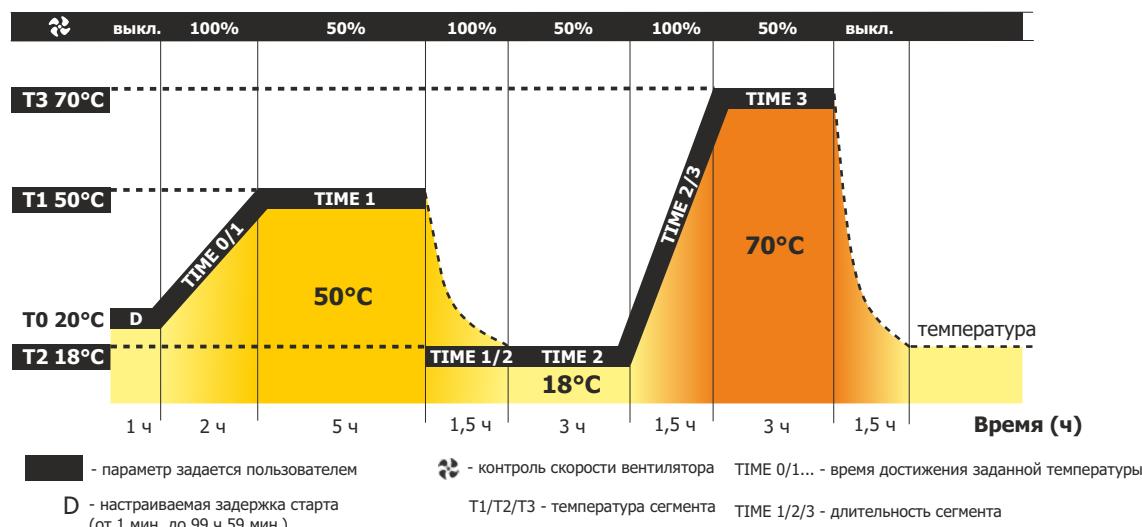

## Охлаждаемые инкубаторы (ST)


ST

### ► Панель управления

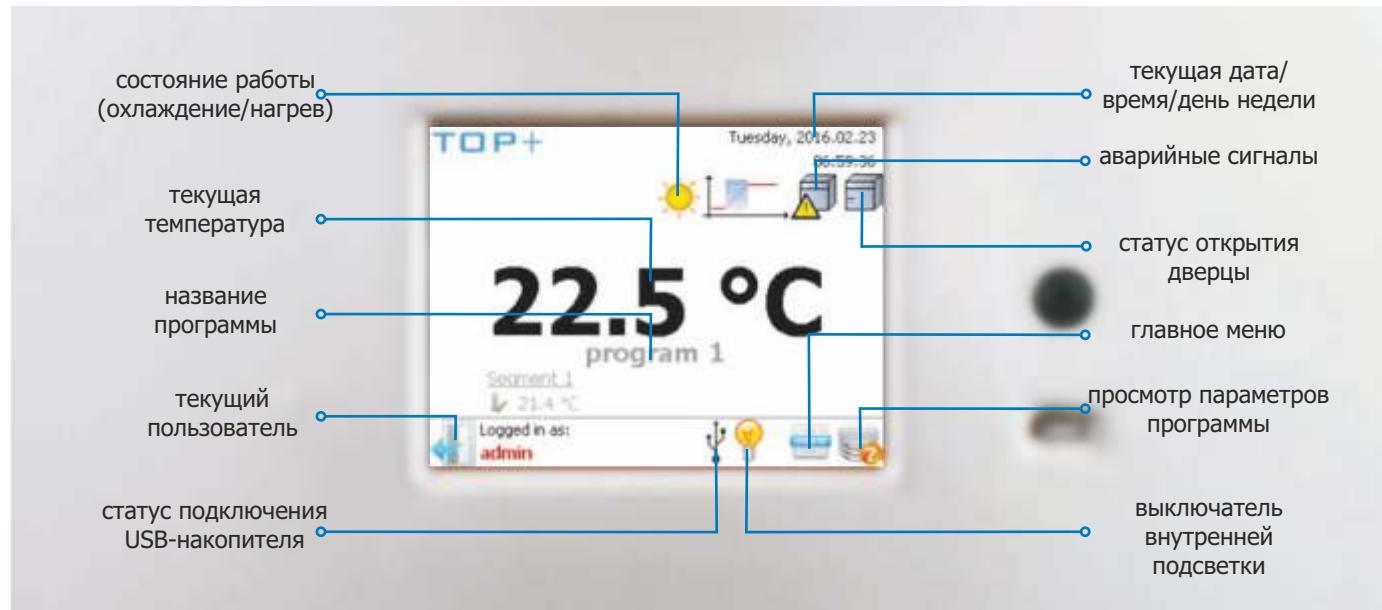

### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур от +3 до +70°C;
- Ethernet-кабель;
- программное обеспечение TOP+ Control;
- сертификат заводского испытания (при +37°C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: английский, эстонский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, латвийский, польский, португальский, румынский, русский, испанский;
- класс защиты от перегрева 3.3 по DIN 12880;
- сигнализация при открытых дверцах;
- в моделях ST 1200 и 1450 стандартно установлены колесики.

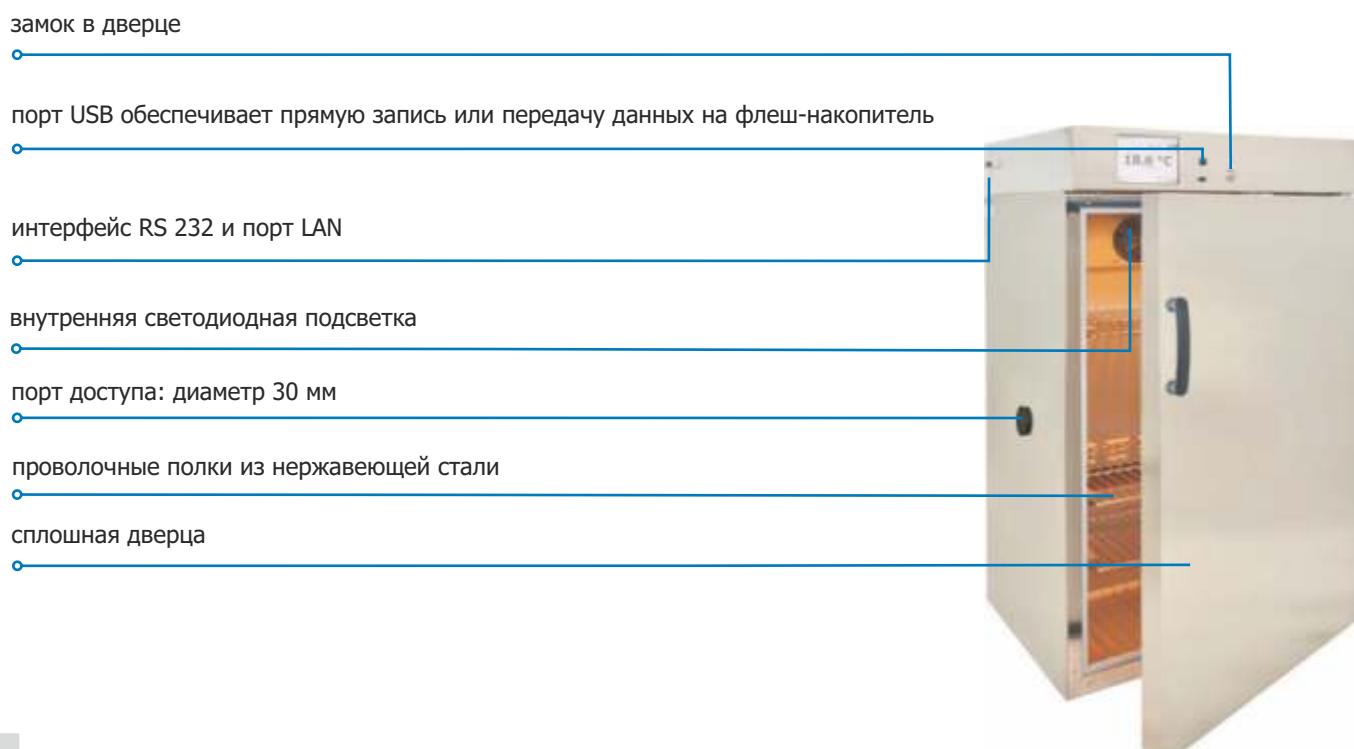

## Охлаждаемые инкубаторы (ST)

ST

	ST 1	ST 2	ST 3	ST 4	ST 5	ST 6	ST 500	ST 700	ST 1200	ST 1450	
<b>Параметры</b>											
<b>циркуляция воздуха</b>											
принудительная											
объем камеры (л)	70	150	200	250	300	400	500	625	1365	1460	
рабочий объем (л)	55	122	163	203	243	324	386	450	1229	1307	
тип дверцы	сплошная / стеклянная или двойная <sup>1</sup> (опция)										
диапазон температур (°C)	от +3 до +40 / до +70 (опция) / от +3 до +70 для PREM TOP+										
дискретность показ. темп. (°C)	0,1										
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем										
материал камеры	BASIC	алюминий									
	COMF	нержавеющая сталь по DIN 1.4016									
	COMF/S	нержавеющая сталь по DIN 1.4016									
	PREM (TOP+)	нержавеющая сталь по DIN 1.4301									
	PREM/S (TOP+)	нержавеющая сталь по DIN 1.4301									
материал корпуса	BASIC	лист с порошковой покраской									
	COMF	лист с порошковой покраской									
	COMF/S	полированная нержавеющая сталь									
	PREM (TOP+)	лист с порошковой покраской									
	PREM/S (TOP+)	полированная нержавеющая сталь									
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина	570	620	620	620	620	660	750	1480	1450	
	B высота	600	860	1060	1260	1460	1860	1990	1990	1970	
	C глубина	680	650	650	650	650	810	860	860	950	
внутренние размеры <sup>3</sup> (мм)	D ширина	430	480	480	480	480	430	480	2x480	2x490	
	D' ширина	470	520	520	520	520	510	600	1310	1340	
	E высота	430	660	860	1060	1260	1660	1510	1510	1460	
	F глубина	300	420	420	420	420	650	690	690	750	
	F' глубина	360	480	480	480	480	-	-	-	-	
	G глубина	-	320	320	320	320	-	-	-	-	
	H высота	-	440	640	840	1050	1440	-	-	-	
	I высота	-	-	-	-	-	1380	1360	1360	1300	
макс. нагрузка на одну полку <sup>4</sup> (кг)	-	10	10	10	10	10	20	30	30	30	
исполнение Pw <sup>5</sup>	по запросу										
	100										
макс. нагрузка на изделие (кг)	-	20	30	40	50	60	100	150	300	300	
исполнение W <sup>6</sup>	по запросу										
	100										
ном. мощность (Вт)	160	170	170	330	330	330	400	400	550	550	
масса <sup>7</sup> (кг)	32	54	59	69	75	90	105	115	185	200	
защита от перегрева	класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / класс 3.3 для PREM TOP+										
электропитание*	230 В 50 Гц										
кол-во полок (установлено/макс.)	2/2	3/4	3/4	4/6	4/7	4/10	3/11	3/11	2 x 3/11 <sup>8</sup>	2 x 3/11 <sup>8</sup>	
срок гарантии	24 месяца										
изготовитель	POL-EKO-APARATURA										

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

5 - усиленные полки

1 - дополнительная внутренняя стеклянная дверца

6 - усиленное исполнение

2 - ST 1-6 в исполнении TOP+ на 60 мм выше, глубина не включает необходимый запас

7 - для изделий исполнения BASIC со сплошной дверцей

50 мм для силового шнура

8 - две колонны по 3 полки в каждой

3 - для изделий с двойной дверцей размеры могут быть меньше

4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

### ▲ Опции и принадлежности



## Охлаждаемые инкубаторы (ST)

ST

	ST 1/1	ST 1/1/1	ST 2/2	ST 2/3	ST 2/4	ST 3/3
Параметры						
циркуляция воздуха	принудительная					
объем камеры (л)	70/70	70/70/70	150/150	150/200	150/250	200/200
рабочий объем (л)	55/55	55/55/55	122/122	122/163	122/203	163/163
тип дверцы	сплошная / стеклянная или двойная <sup>1</sup> (опция)					
диапазон температур (°C)	от +3 до +40 / до +70 (опция) / от +3 до +70 для PREM TOP+					
дискретность показаний температуры (°C)	0,1					
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем					
материал камеры	BASIC	алюминий				
	COMF	нержавеющая сталь по DIN 1.4016				
	COMF/S	нержавеющая сталь по DIN 1.4016				
	PREM (TOP+)	нержавеющая сталь по DIN 1.4301				
	PREM/S (TOP+)	нержавеющая сталь по DIN 1.4301				
материал корпуса	BASIC	лист с порошковой покраской				
	COMF	лист с порошковой покраской				
	COMF/S	полированная нержавеющая сталь				
	PREM (TOP+)	лист с порошковой покраской				
	PREM/S (TOP+)	полированная нержавеющая сталь				
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина	570	570	620	620	620
	B высота	1170	1740	1680	1880	2080
	C глубина	680	680	650	650	650
внутренние размеры <sup>3</sup> (мм)	D ширина	470	470	520	520	520
	D' ширина	470	470	520	520/520	520/520
	E высота	430	430	660	660/860	660/1060
	F глубина	300	300	420	420	420
	F' глубина	360	480	480	480/480	480
	G глубина	-	320	320	320	320
	H высота	-	440	640	820	1050
макс. нагрузка на одну полку <sup>4</sup> (кг)	-	10	10	10	10	10
	исполнение Pw <sup>5</sup>	по запросу				
	-	20	20	30	30/40	30/50
макс. нагрузка на изделие (кг)	исполнение W <sup>6</sup>	по запросу				
	номинальная мощность (Вт)	320	480	350	350	350
	масса <sup>7</sup> (кг)	65	98	109	114	124
защита от перегрева						
класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / класс 3.3 для PREM TOP+						
электропитание*						
230 В 50 Гц						
кол-во полок (установлено/макс.)						
см. таблицу для однокамерных изделий						
срок гарантии						
24 месяца						
изготовитель						
POL-EKO-APARATURA						

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

5 - усиленные полки

1 - дополнительная внутренняя стеклянная дверца

6 - усиленное исполнение

2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура


7 - для изделий исполнения BASIC со сплошной дверцей

3 - для изделий с двойной дверцей размеры могут быть меньше

4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).


## ▲ Опции и принадлежности

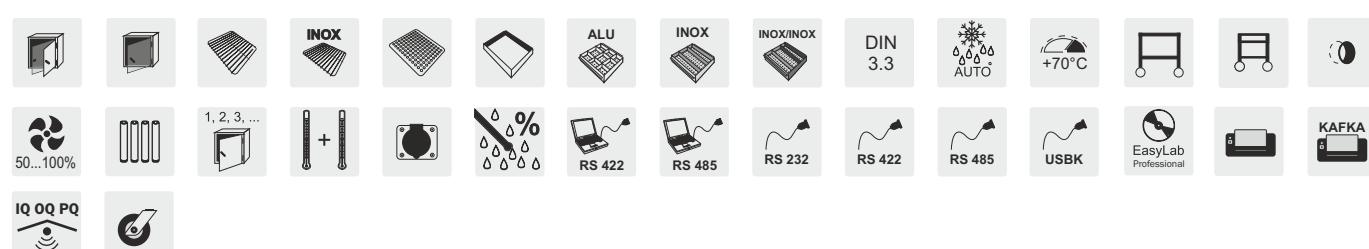

## Охлаждаемые инкубаторы (ST)


ST

**ST 1**

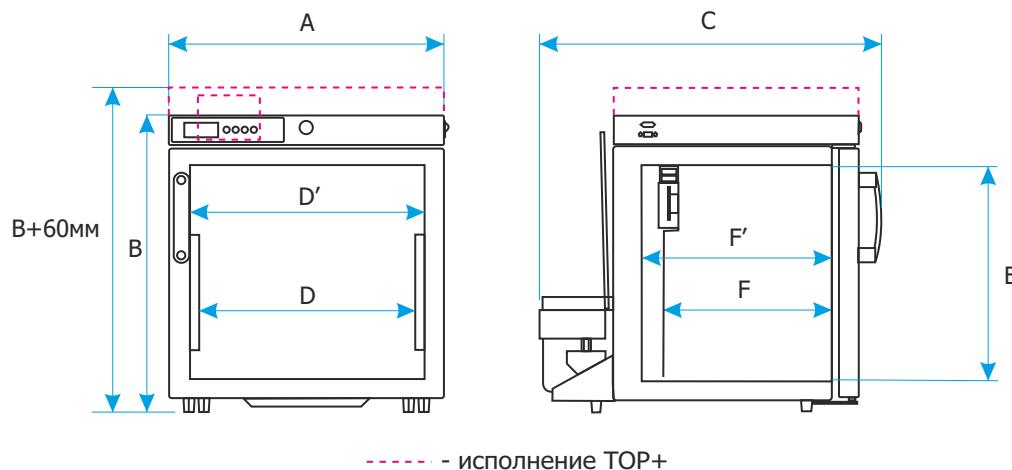


- исполнение TOP+

**ST 2/3/4/5/6**

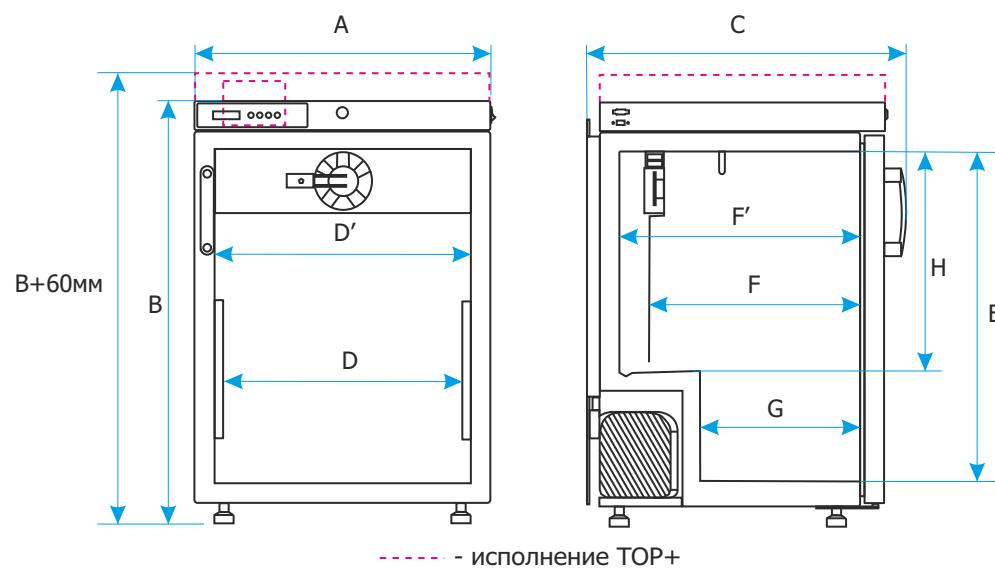

- исполнение TOP+

**ST 500/700/1200/1450**

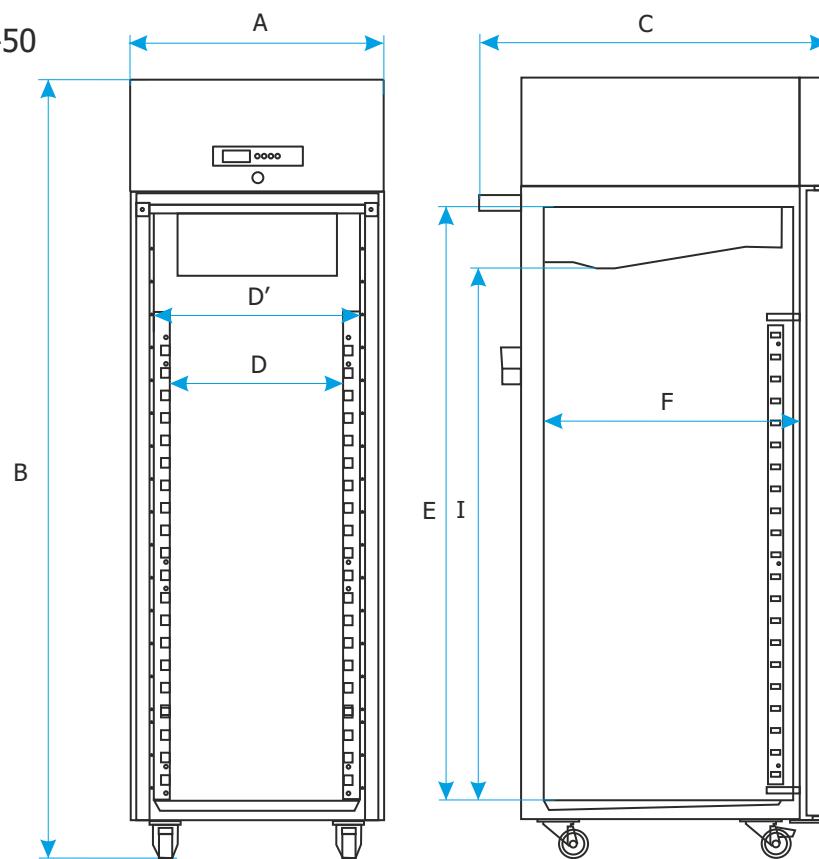

## Охлаждаемые инкубаторы (ST)

ST

# Охлаждаемые инкубаторы (ST) с фотопериодической системой

### ► Охлаждаемые инкубаторы (ST) с фотопериодической системой

Фотопериодическая (FOT) и фитотронная (FIT) системы позволяют имитировать смену дня и ночи. Система FOT позволяет включать и выключать освещение, в то время как система FIT позволяет также регулировать его интенсивность.

Охлаждаемые инкубаторы (ST) в исполнениях BASIC, COMFORT и PREMIUM могут быть оснащены системой FOT, исполнения PREMIUM TOP+ (ST 500, 700, 1200, 1450) — FIT-системой.


### ► Программные возможности для FOT-системы:

- программное обеспечение имитации дня и ночи для раздельного управления включением/выключением освещения, временем и температурой для каждого сегмента;
- диапазон температур условной ночи: от +3 до +50°C;
- диапазон температур условного дня: от +10 до +50°C;
- лампы устанавливаются на боковых стенках;
- стандартно устанавливаются люминесцентные лампы (дневного света) типа 840;
- работа с приоритетом времени.

### ► Фотопериодическая система (опция \*/FOT) для одно- и двухкамерных охлаждаемых инкубаторов (ST)\*\*

Опция	ST/FOT2	ST/FOT4	ST/FOT6	ST/FOT8	ST/FOT10	ST/FOT15
доступна для моделей	ST 1 ST 1/1	ST 2 ST 2/2	ST 2; ST 3 ST 2/2 ST 3/3	ST 4 ST 5	ST 500 ST 700	ST 1200 ST 1450
диапазон температур при включенной фотопериодической системе (°C)				+10 ... +50		
количество ламп на стенках камеры	2	4	6	8	10	15 (3 колонны по 5 шт.)
регулировка интенсивности освещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет

\*\* для моделей ST с опцией \*/FOT внутренние размеры могут быть меньше на 4 см с каждой стороны. Опция FOT устанавливается на заводе-изготовителе и не может быть заказана отдельно.

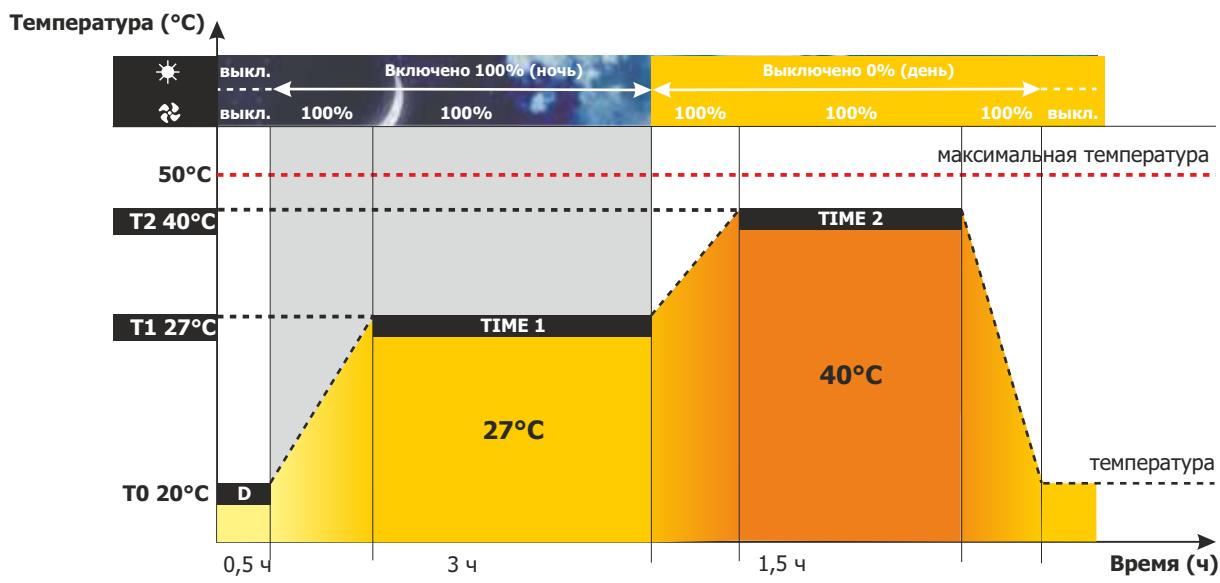

## Охлаждаемые инкубаторы (ST) с фитотронной системой

Охлаждаемые инкубаторы в исполнении PREMIUM TOP+ (ST 500, 700, 1200, 1450) могут быть оснащены фитотронной системой.


### ► Программные возможности для FIT-системы:

- программное обеспечение имитации дня и ночи для раздельного управления интенсивностью освещения (%), временем, температурой и скоростью вентилятора для каждого сегмента;
- диапазон температур условной ночи: от +3 до +60°C;
- диапазон температур условного дня: от +10 до +50°C;
- лампы установлены в панели над полками (FIT P), на боковых стенках (FIT S), в дверце (FIT D), либо в дверце и на боковых стенках (FIT DS);
- стандартно используются люминесцентные лампы (дневного света) типа 840;
- программа с приоритетом температуры или времени.

### ► Фитотронная система (опция \*/FIT) для охлаждаемых инкубаторов (ST) (PREMIUM TOP+)

Опция**	ST/500/700/FIT DS	ST/500/700/FIT P	ST/500/700/FIT S	ST/1200/FIT P	ST/1450/FIT P
диапазон температур при включенной фотопериодической системе (°C)			+10 ... +50°C		
число панелей освещения над полками стандартно/максимально	-	1/3	-	1/3	1/3
лампы в дверце	да	нет	нет	нет	нет
лампы на стенах	да	нет	да	нет	нет
регулировка интенсивности освещения	да	да	да	да	да

\*\* FIT DS — лампы в дверце и на стенах; FIT S — лампы на стенах; FIT P — панели над полками

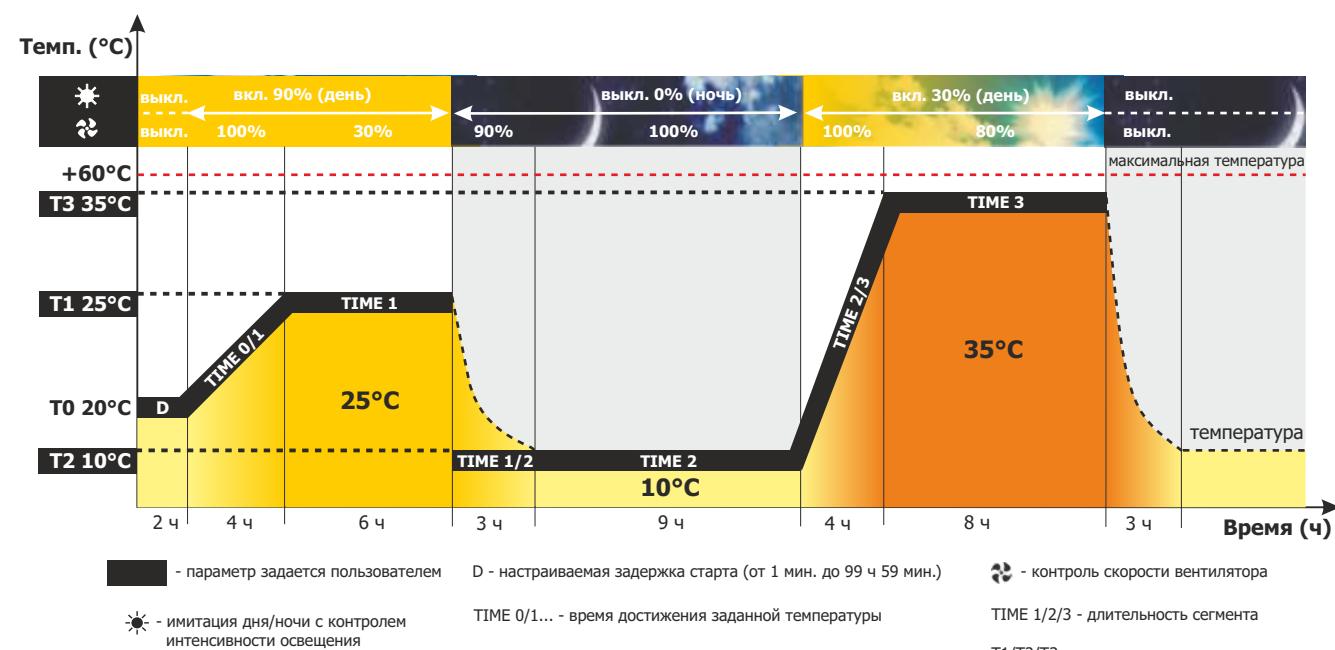

## Лабораторные холодильники

CHL

# Лабораторные холодильники

### ► Применение:

- хранение образцов природных и сточных вод, фильтрата пьезометров;
- хранение градуировочных стандартов для AAS, GC или HPLC;
- хранение реактивов;
- хранение химикатов;
- хранение лекарственных средств и вакцин.



Лабораторные холодильники оснащены системой охлаждения и обеспечивают стабильную температуру от 0 до +15°C.

### ► Аттестация




Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).



Изделия версий **BASIC, COMFORT, PREMIUM** оснащены микропроцессорным PID-контроллером с графическим ЖК-дисплеем и сенсорной клавиатурой с подсветкой.

#### ► Преимущества контроллера:

- управление температурой;
- регулируемая задержка запуска термостатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин.;
- регулируемая длительность термостатирования от 1 мин. до 31 дней или непрерывно;
- работа в режиме приоритета температуры;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- работа в режиме приоритета температуры;
- функция размораживания;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- внутренняя память для хранения до 2046 показаний;
- принудительная циркуляция воздуха с опциональным контролем скорости вентилятора от 50 до 100%;
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы.

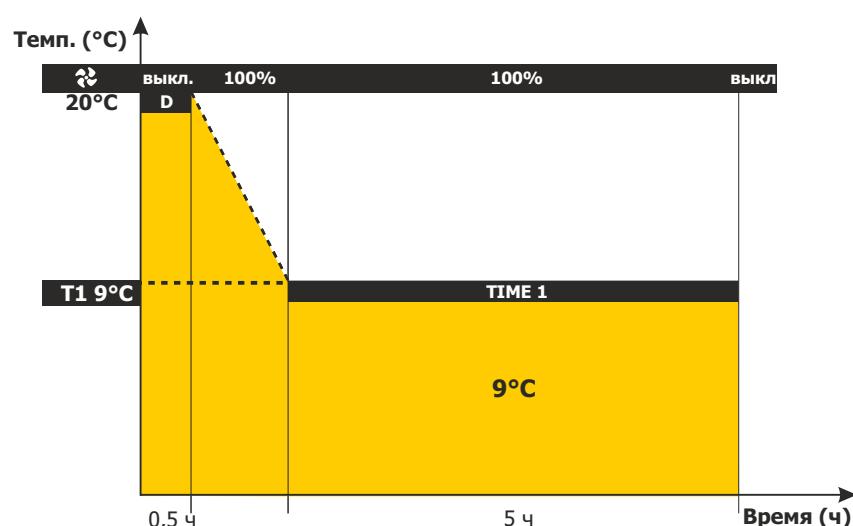

- параметр задается пользователем



- контроль скорости вентилятора (опция)

D - задержка старта (от 1 мин. до 99 ч 59 мин.)

TIME 1 - длительность сегмента


T1 - температура сегмента

**► Панель управления**



**► Стандартные характеристики:**

- диапазон температур от 0 до +15°C;
- сертификат заводского испытания (при +4°C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: чешский, английский, эстонский, французский, немецкий, итальянский, латвийский, польский, португальский, русский, испанский;
- защита от перегрева по DIN 12880 — класса 1.0 для моделей BASIC и COMFORT, класса 2.0 для моделей PREMIUM;
- сигнализация при открытых дверцах;
- в моделях CHL 1200 и 1450 стандартно установлены колесики.

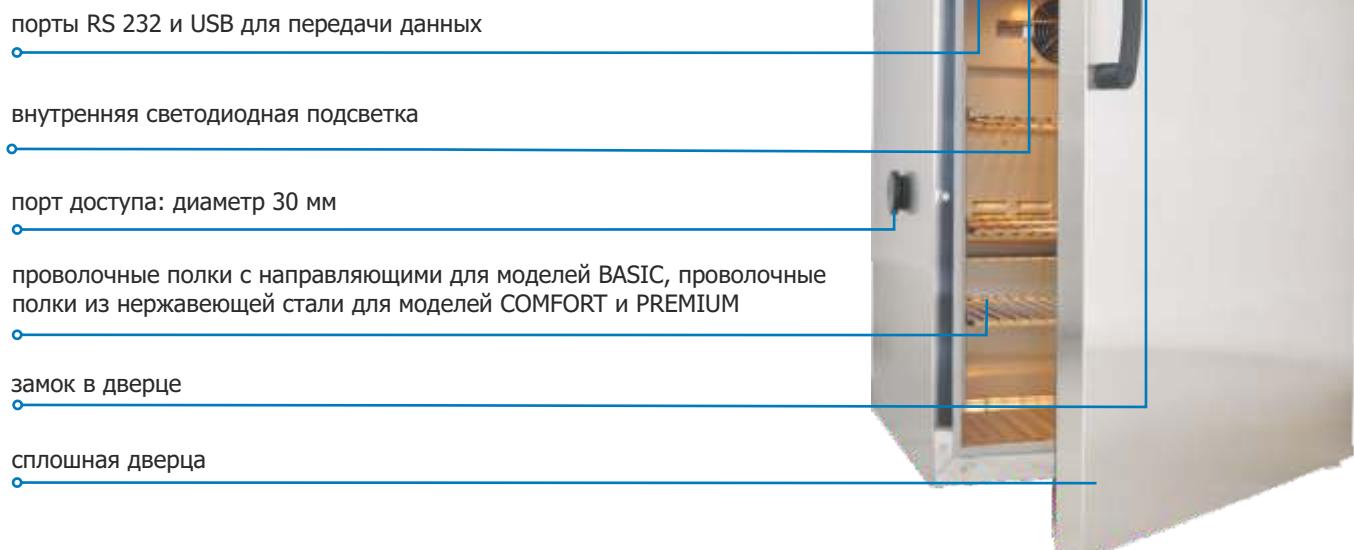

## ▀ Исполнение PREMIUM TOP+

Все изделия в исполнении ТОР+ оснащаются микропроцессорным PID-контроллером с большим (5,7") полноцветным сенсорным ЖК-экраном с интуитивно понятным меню и удобным программным обеспечением. Одним из важнейших преимуществ является возможность подключения к сети Ethernet для удаленного управления с любого компьютера.


## ▀ Преимущества контроллера:

- многосегментные температурно-временные программы (до 100 сегментов);
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- регулируемая задержка запуска терmostатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин. или по дате/времени;
- функция администратора для управления учетными записями пользователей;
- регулируемая длительность терmostатирования от 1 мин. до 999 ч 59 мин. или непрерывно;
- контроль доступа с помощью входа в систему;
- программирование на 7 дней;
- калибровка температуры;
- регулируемое линейное изменение температуры;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- возможность пользовательской калибровки температуры;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- работа с приоритетом температуры или приоритетом времени;
- функция размораживания;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- цифровой таймер;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- принудительная циркуляция воздуха с контролем скорости вентилятора от 50 до 100%;
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы.

## ▀ Функции соответствия GLP:


- защита настроек паролем;
- память на 20 пользовательских программ;
- внутренняя память до 4100 показаний для каждого пользователя с возможностью просматривать значения на дисплее или ПК в табличной или графической форме;
- порт USB обеспечивает прямую запись данных или передачу на флеш-накопитель;
- журнал событий.

Программное обеспечение ТОР+ Control прилагается к прибору

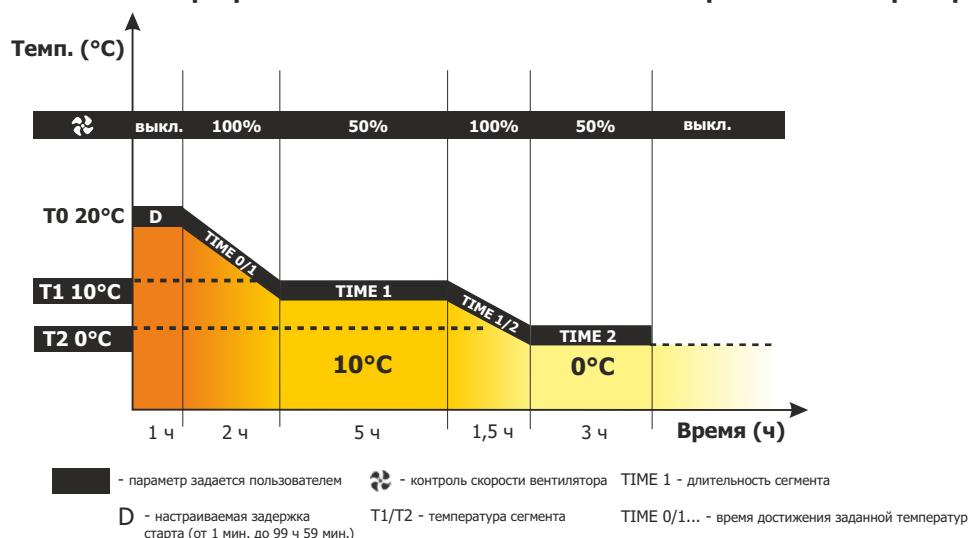

## Лабораторные холодильники CHL

### ► Панель управления

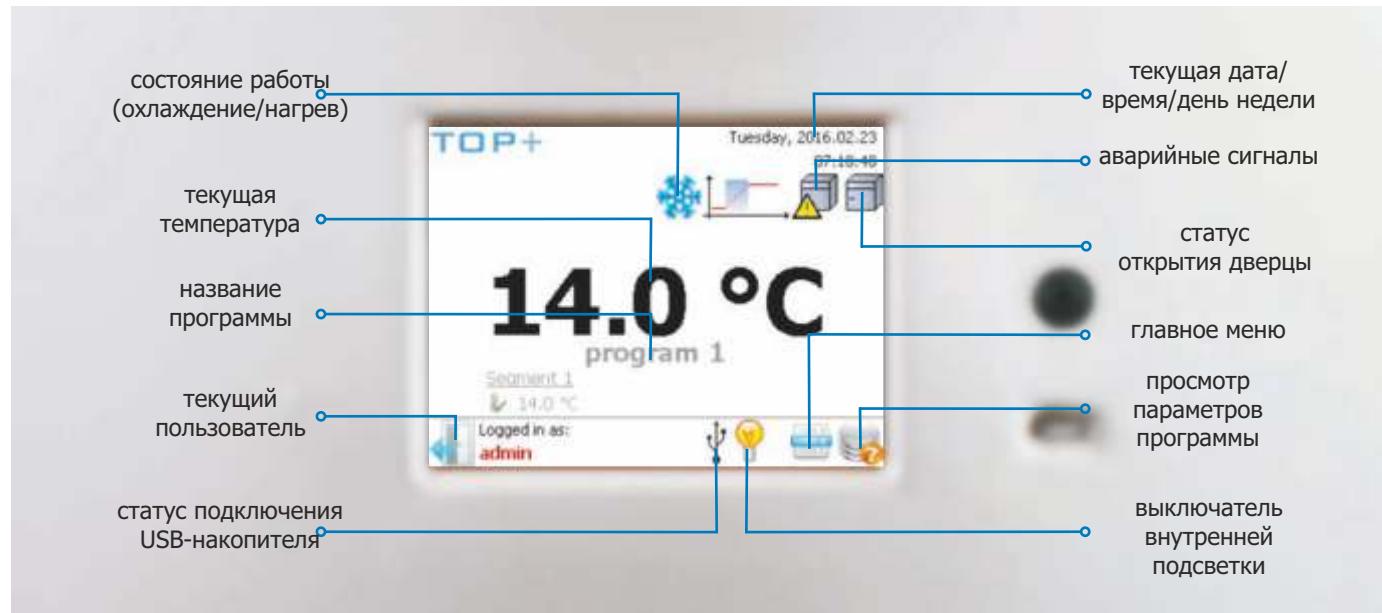

### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур от 0 до +15°C;
- Ethernet-кабель;
- программное обеспечение TOP+ Control;
- сертификат заводского испытания (при +4°C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: английский, эстонский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, латвийский, польский, португальский, румынский, русский, испанский;
- класс защиты от перегрева 3.2 по DIN 12880;
- сигнализация при открытых дверцах;
- в моделях CHL 1200 и 1450 стандартно установлены колесики.



## Лабораторные холодильники

CHL

	CHL 1	CHL 2	CHL 3	CHL 4	CHL 5	CHL 6	CHL 500	CHL 700	CHL 1200	CHL 1450
Параметры										
циркуляция воздуха							принудительная			
объем камеры (л)	70	150	200	250	300	400	500	625	1365	1460
рабочий объем (л)	55	122	163	203	243	324	386	450	1229	1307
тип дверцы							сплошная / стеклянная или двойная <sup>1</sup> (опция)			
диапазон температур (°C)					0...+15			от 0 до +15 / от -10 до +15 (опция)		
дискретность показаний темп. (°C)							0,1			
контроллер							микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем			
материал камеры	BASIC COMF COMF/S PREM (TOP+) PREM/S (TOP+)						алюминий нержавеющая сталь по DIN 1.4016 нержавеющая сталь по DIN 1.4016 нержавеющая сталь по DIN 1.4301 нержавеющая сталь по DIN 1.4301			
материал корпуса	BASIC COMF COMF/S PREM (TOP+) PREM/S (TOP+)						лист с порошковой покраской лист с порошковой покраской полированная нержавеющая сталь лист с порошковой покраской полированная нержавеющая сталь			
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина B высота C глубина  D ширина D' ширина E высота F глубина F' глубина G глубина H высота J высота	570 600 680  430 470 430 300 360 - - - -	620 860 650  480 520 660 420 480 320 440 -	620 1060 650  480 520 860 420 480 320 640 -	620 1260 650  480 520 1060 420 480 320 840 -	620 1460 650  480 520 1260 420 480 320 1050 -	660 1860 810  430 510 1660 420 650 320 1050 -	750 1990 860  480 600 1510 650 690 1380 -	1480 1990 860  2x480 1310 1510 690 1360 1360 30 100 100 100 150 300 550 115 185 200	1450 1990 950  2x490 1340 1460 750 1360 1360 30 100 100 100 300 300 550 185 200
внутренние размеры <sup>3</sup> (мм)										
макс. нагрузка на одну полку <sup>4</sup> (кг)	- исполнение Pw <sup>5</sup>	10	10	10	10	10	10	20	30	30
исполнение W <sup>6</sup>					по запросу			100	100	100
макс. нагрузка на изделие (кг)	- исполнение W <sup>6</sup>	20	30	40	50	60	60	100	150	300
ном. мощность (Вт)		160	170	170	330	330	330	400	400	550
масса <sup>7</sup> (кг)		32	54	59	69	75	90	105	115	185
защита от перегрева					класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.2 (опция) / класс 3.2 для PREM TOP+					
электропитание*						230 В 50 Гц				
кол-во полок (установлено/макс.)	2/2	3/4	3/4	4/6	4/7	4/10	3/11	3/11	2 x 3/11 <sup>8</sup>	2 x 3/11 <sup>8</sup>
срок гарантии						24 месяца				
изготовитель						POL-EKO-APARATURA				

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - дополнительная внутренняя стеклянная дверца

2 - CHL 1-5 в исполнении TOP+ на 60 мм выше, глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

3 - для изделий с двойной дверцей размеры могут быть меньше

4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

5 - усиленные полки

6 - усиленное исполнение

7 - для изделий исполнения BASIC со сплошной дверцей

8 - две колонны по 3 полки в каждой

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

### Опции и принадлежности



## Лабораторные холодильники

CHL

CHL 1/1 CHL 1/1/1 CHL 2/2 CHL 2/3 CHL 2/4 CHL 3/3

Параметры	CHL 1/1	CHL 1/1/1	CHL 2/2	CHL 2/3	CHL 2/4	CHL 3/3
циркуляция воздуха			принудительная			
объем камеры (л)	70/70	70/70/70	150/150	150/200	150/250	200/200
рабочий объем (л)	55/55	55/55/55	122/122	122/163	122/203	163/163
тип дверцы			сплошная / стеклянная или двойная <sup>1</sup> (опция)			
диапазон температур (°C)			0...+15			
дискретность показаний температуры (°C)			0,1			
контроллер			микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем			
материал камеры	BASIC COMF COMF/S PREM (TOP+) PREM/S (TOP+)		алюминий нержавеющая сталь по DIN 1.4016 нержавеющая сталь по DIN 1.4016 нержавеющая сталь по DIN 1.4301 нержавеющая сталь по DIN 1.4301			
материал корпуса	BASIC COMF COMF/S PREM (TOP+) PREM/S (TOP+)		лист с порошковой покраской лист с порошковой покраской полированная нержавеющая сталь лист с порошковой покраской полированная нержавеющая сталь			
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина B высота C глубина	570 1170 680	570 1740 680	620 1680 650	620 1880 650	620 2080 650
внутренние размеры <sup>3</sup> (мм)	D ширина D' ширина E высота F глубина F' глубина G глубина H высота	430 470 430 300 360 - -	480 520 430 420 480 320 440	480 520 660 420 480 320 640	480 520/520 660/1060 420 480/480 	480 520 860 420 480 320 1050 1440
макс. нагрузка на одну полку <sup>4</sup> (кг)	-	10	10	10	10	10
	исполнение Pw <sup>5</sup>			по запросу		
макс. нагрузка на изделие (кг)	-	20	20	30	30/40	30/50
	исполнение W <sup>6</sup>			по запросу		40
номинальная мощность (Вт)		320	480	350	350	350
масса <sup>7</sup> (кг)		65	98	109	114	124
защита от перегрева				класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.2 (опция) / класс 3.2 для PREM TOP+		
электропитание*				230 В 50 Гц		
кол-во полок (установлено/макс.)				см. таблицу для однокамерных изделий		
срок гарантии				24 месяца		
изготовитель				POL-EKO-APARATURA		

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

5 - усиленные полки

1 - дополнительная внутренняя стеклянная дверца

6 - усиленное исполнение

2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура


7 - для изделий исполнения BASIC со сплошной дверцей

3 - для изделий с двойной дверцей размеры могут быть меньше


4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).


## Опции и принадлежности

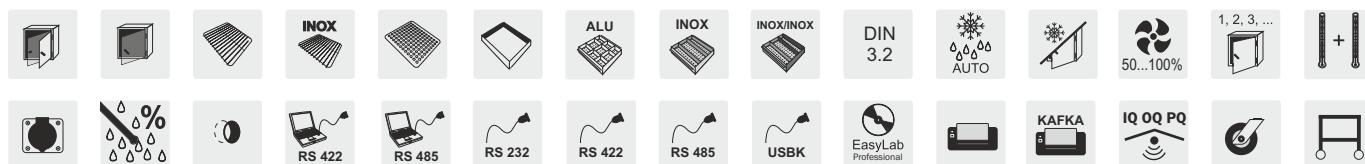


CHL 1

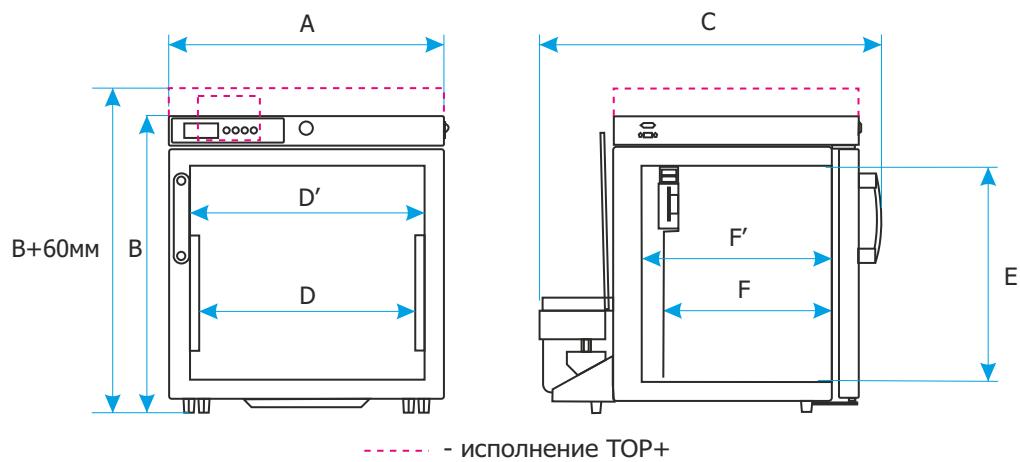

CHL 2/3/4/5/6

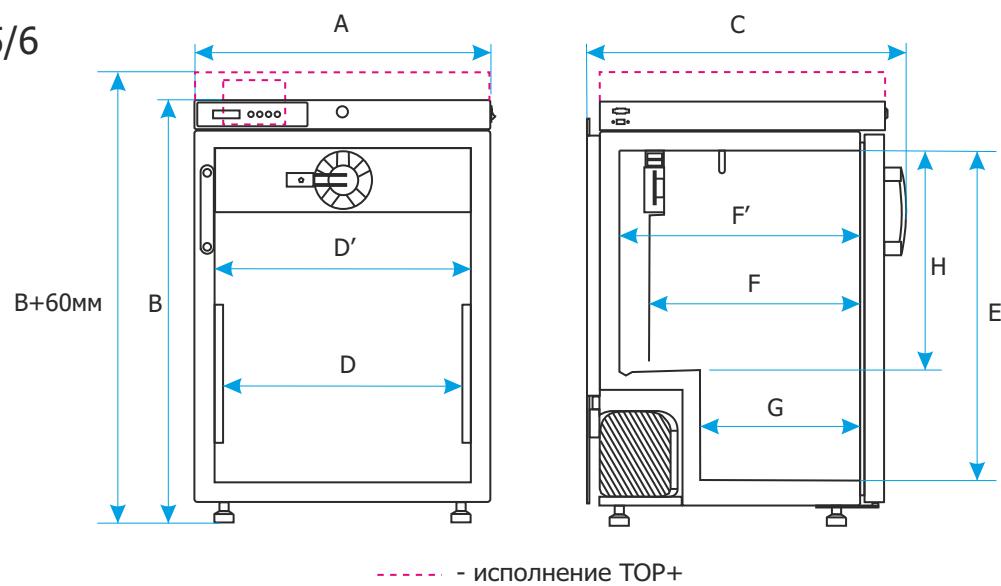

CHL 500/700/1200/1450

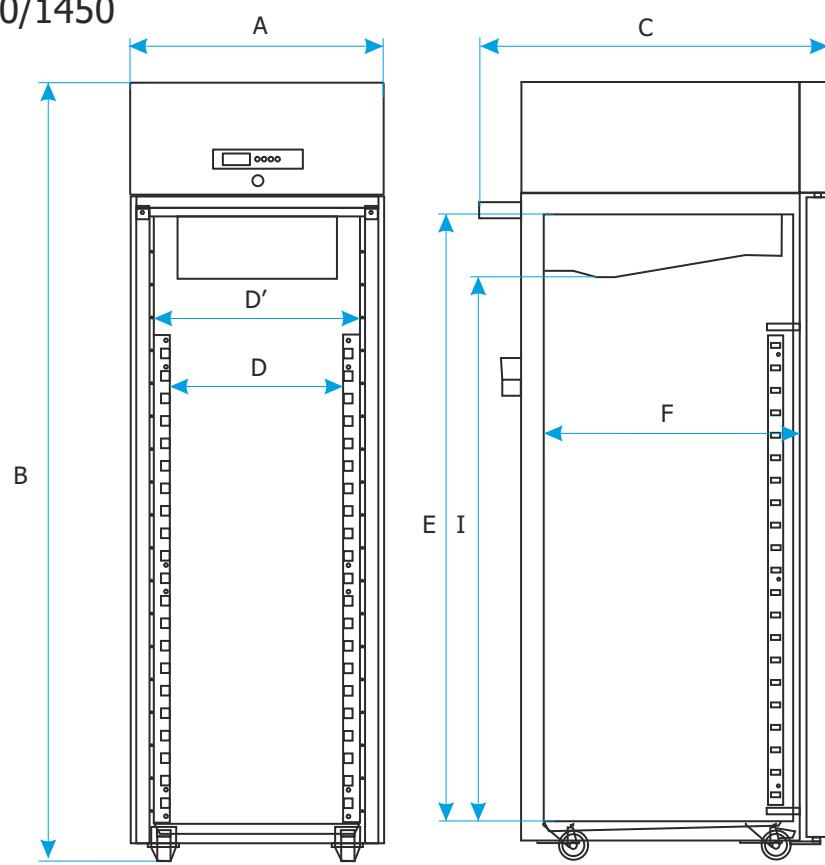

## Лабораторные морозильники

### ► Применение:

- долгосрочное хранение образцов биологического материала для исследования;
- хранение легко разлагаемых материалов (например, полупроводников);
- проведение тестов на морозостойкость (например, строительных материалов: бетон, древесина и т. д.);
- предварительное замораживание;
- хранение плазмы.



**Лабораторные морозильники**  
предназначены для замораживания  
и хранения замороженных образцов.

### ► Аттестация




Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).



Изделия исполнений COMFORT и PREMIUM оснащены микропроцессорным PID-контроллером с графическим ЖК-дисплеем и сенсорной клавиатурой с подсветкой.

#### ► Преимущества контроллера:

- управление температурой;
- работа с приоритетом температуры;
- регулируемая задержка запуска термостатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин.;
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- цифровой таймер;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- внутренняя память для хранения до 2046 показаний;
- естественная (ZLN-T) или принудительная (ZLW-T) циркуляция воздуха.

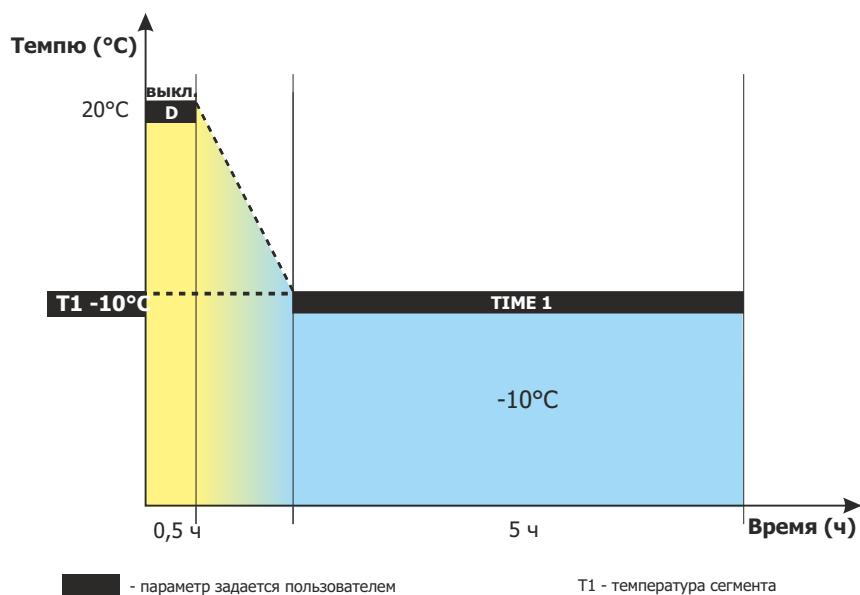

## Лабораторные морозильники

ZL

### ► Панель управления



### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур от -25 до 0 °C для ZLN 85 и от -40 до 0 °C для ZLN-T 125, 200, 300;
- проводочные полки из нержавеющей стали для ZLN 85 и из перфорированной нержавеющей стали для ZLN-T 125, 200, 300;
- сертификат заводского испытания (при -20 °C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке)
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: чешский, английский, эстонский, французский, немецкий, итальянский, латвийский, польский, португальский, русский, испанский;
- сигнализация при открытых дверцах.

порт доступа: диаметр 20 мм

замок в дверце


сплошная дверца

порты RS 232 и USB для передачи данных

внутренняя память для хранения до 2046 показаний

в модели ZLN-T 300 стандартно установлены колесики



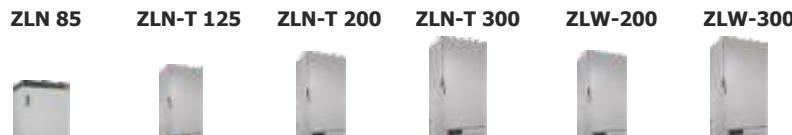

	ZLN 85	ZLN-T 125	ZLN-T 200	ZLN-T 300	ZLW-200	ZLW-300					
<b>Параметры</b>											
циркуляция воздуха	естественная				принудительная						
объем камеры (л)	95	130	210	310	210	310					
рабочий объем (л)	76	109	180	262	140	213					
тип дверцы	сплошная										
диапазон температур (°C)	-25...0	-40...0									
дискретность показаний температуры (°C)	0,1										
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем										
материал камеры	COMF	нержавеющая сталь по DIN 1.4016									
	COMF/S	нержавеющая сталь по DIN 1.4016									
	PREM	нержавеющая сталь по DIN 1.4301									
	PREM/S	нержавеющая сталь по DIN 1.4301									
материал корпуса	COMF	лист с порошковой покраской									
	COMF/S	полированная нержавеющая сталь									
	PREM	лист с порошковой покраской									
	PREM/S	полированная нержавеющая сталь									
габариты <sup>1</sup> (мм)	A ширина	610	660	760	760	760					
	B высота	880	1190	1380	1730	1380					
	C глубина	650	800	800	800	800					
	D ширина	380	370	450	450	450					
	D+ ширина	420	420	520	520	520					
	E высота	590	600	770	1120	770					
	F глубина	400	520	520	520	520					
	F+ глубина	440	530	530	530	530					
	G глубина	230	-	-	-	-					
	I глубина	210	-	-	-	-					
внутренние размеры (мм)	J глубина	-	-	-	600	910					
	макс. нагрузка на одну полку <sup>2</sup> (кг)	10	10	10	10	-					
	исполнение Pw <sup>3</sup>	-	50	50	50	-					
	макс. нагрузка на изделие (кг)	30	50	65	80	-					
	исполнение W <sup>4</sup>	-	100	130	160	160					
	номинальная мощность (Вт)	200	450	470	470	500					
	масса (кг)	60	90	120	185	120					
	электропитание*	230 В 50 Гц									
	кол-во полок (установлено/макс.)	2/4	2/3	2/4	3/6	2/4					
	срок гарантии	24 месяца									
изготовитель	POL-EKO-APARATURA										

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

2 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

3 - усиленные полки

4 - усиленное исполнение

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).


## Опции и принадлежности




## Лабораторные морозильники

ZL


ZLN 85

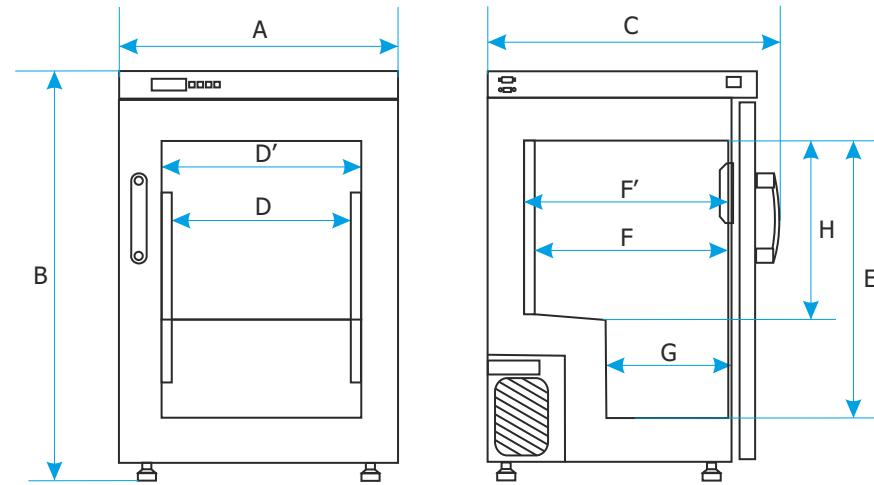


ZLW 200/300

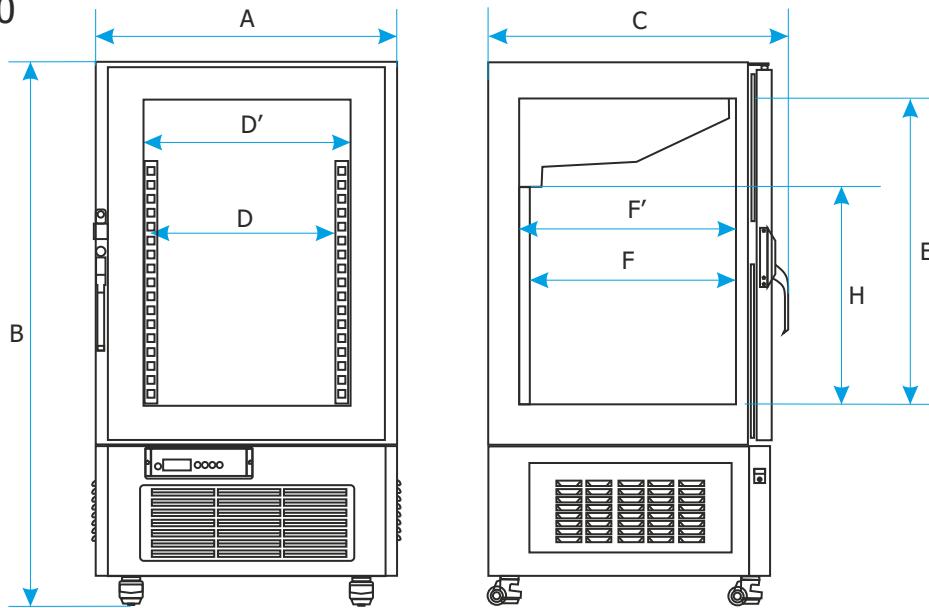

ZLN-T/125/200/300

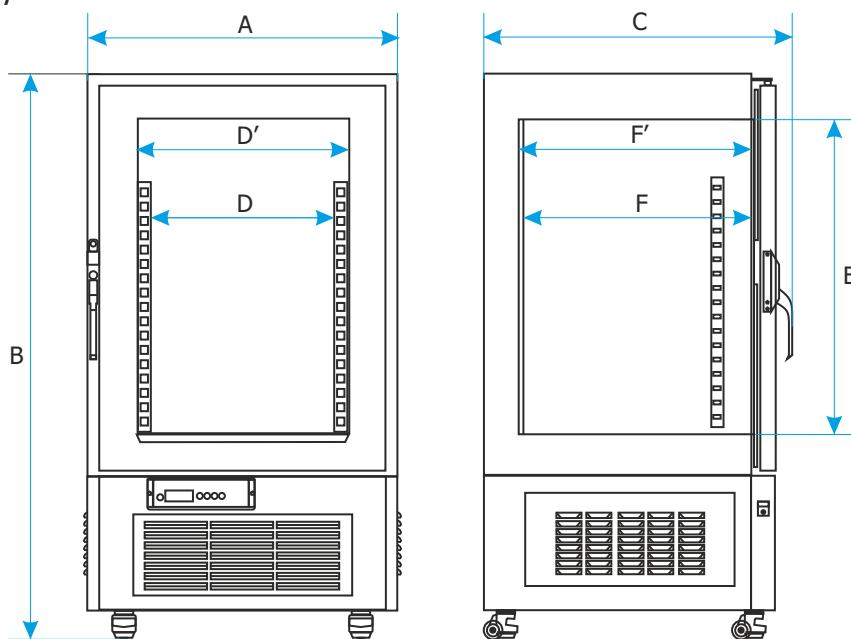

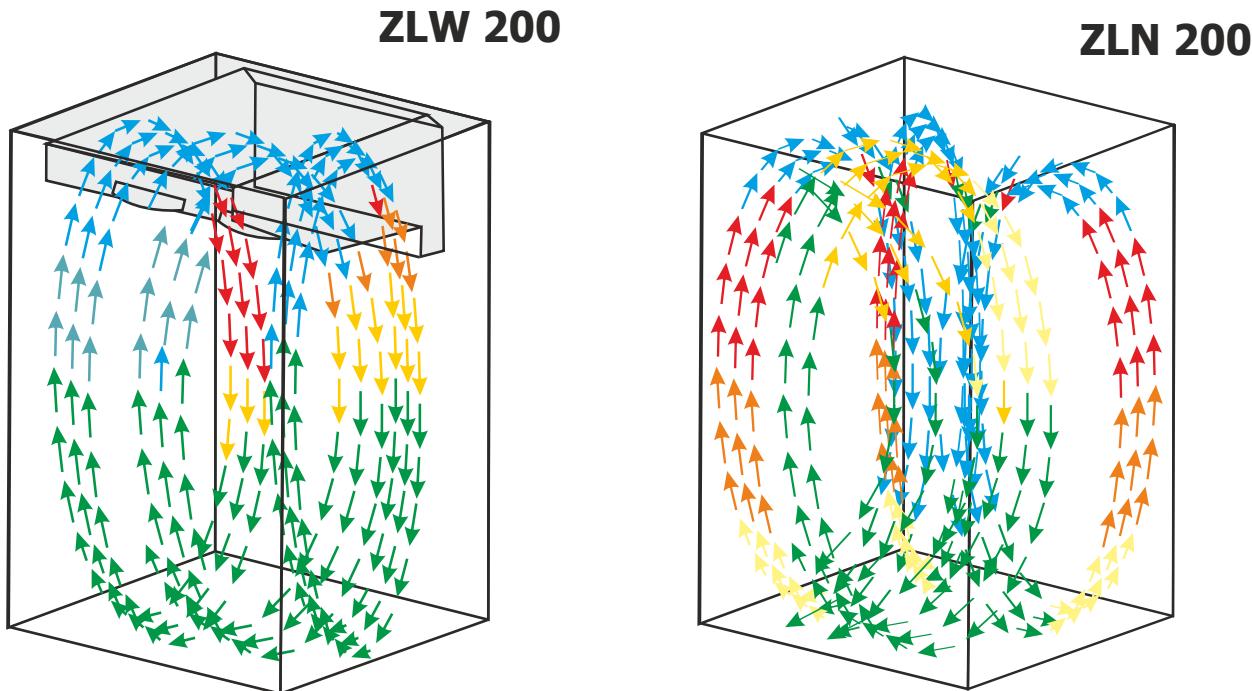

► Морозильники с принудительной циркуляцией воздуха не требуют размораживания. Принцип работы такой системы заключается в поддержании определенной влажности внутри изделия для предотвращения намерзания инея на его стенках. Установленный в камере вентилятор механически обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха и постоянный воздухообмен. При прохождении над охлаждающим элементом воздух охлаждается и поступает в камеру через специальные каналы. Влажный воздух, который превращается в иней, направляется в специальный испарительный отсек, где он оседает на самом холодном элементе. Компрессор периодически выключается, после чего нагревательный элемент растапливает слой инея, который удаляется из изделия в виде конденсата.

#### ► Преимущества:

- Равномерное распределение холодного воздуха в камере.
- Не требуется размораживание.
- Сокращается время выхода на заданную температуру даже при большой загрузке камеры.
- Изделие работает стабильно. В морозильниках с естественной циркуляцией воздуха эффективность работы падает по мере нарастания слоя льда на испарителе.

#### ► Недостатки по сравнению с устройствами с естественной циркуляцией воздуха:

- Из-за непрерывной работы вентилятора и уменьшения влажности воздуха в камере может происходить засыхание хранящихся образцов. Этого можно избежать, если надлежащим образом упаковывать материалы.
- Изделие работает громче (из-за шума от работающего вентилятора).
- Более высокий расход электроэнергии (из-за работающего вентилятора).

## Ультранизкотемпературные морозильники

ZLN-UT

## Ультранизкотемпературные морозильники

### ► Применение:

- биотехнологии;
- исследования;
- фармацевтика;
- хранение.



Ультранизкотемпературные морозильники используются для глубокой заморозки биотехнологических образцов и других материалов, хранение которых происходит при очень низкой температуре.

### ► Аттестация



Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

### ◆ Преимущества контроллера:

- диапазон температур: от -86 до -40 °C;
- сплошные полки из нержавеющей стали с отверстием;
- сертификат заводского испытания (при -80 °C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: чешский, английский, эстонский, французский, немецкий, итальянский, латвийский, польский, португальский, русский, испанский;
- порт доступа: диаметр 20 мм;
- замок в дверце;
- внешняя и внутренняя сплошная дверь для каждой камеры;
- колесики;
- питание контроллера от батареи при сбое электропитания — выдача аварийного сигнала;
- дополнительный порт для установки резервного датчика CO<sub>2</sub> и Pt100.

ZLN-UT 200



ZLN-UT 300



#### Параметры

циркуляция воздуха	естественная	
объем камеры (л)	237	326
кол. контейнер 133 x 133 x 50 мм (шт.)	108	144
тип дверцы	сплошная	
диапазон температур (°C)	-86...-40	
дискретность показаний темпер. (°C)	0,1	
время охлаждения от +20 до -80°C (ч)	3,5	3,5
время нагрева от -80 до -60 °C при отказе электропитания (ч)	1,5	1,5
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем	
материал камеры	COMF	нержавеющая сталь по DIN 1.4016
	PREM	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	лист с порошковой покраской	
габариты <sup>1</sup> (мм)	A ширина	850
	B высота	1620
	C глубина	950
	D ширина	520
	E высота	830
внутренние размеры (мм)	F глубина	550
	G глубина	240
	макс. нагрузка на изделие (кг)	65
	макс. нагрузка на полку (кг)	10
	номинальная мощность (Вт)	670
	потреб. эн. в сутки (кВт*ч) при -80 °C	16
	масса (кг)	180
электропитание*	230 В 50 Гц	
количество внутренних камер	3	4
срок гарантии	24 месяца	
изготовитель	POL-EKO-APARATURA	

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).


### ◆ Опции и принадлежности




## Ультразвуковые морозильники

ZLN-UT

ZLN-UT 200

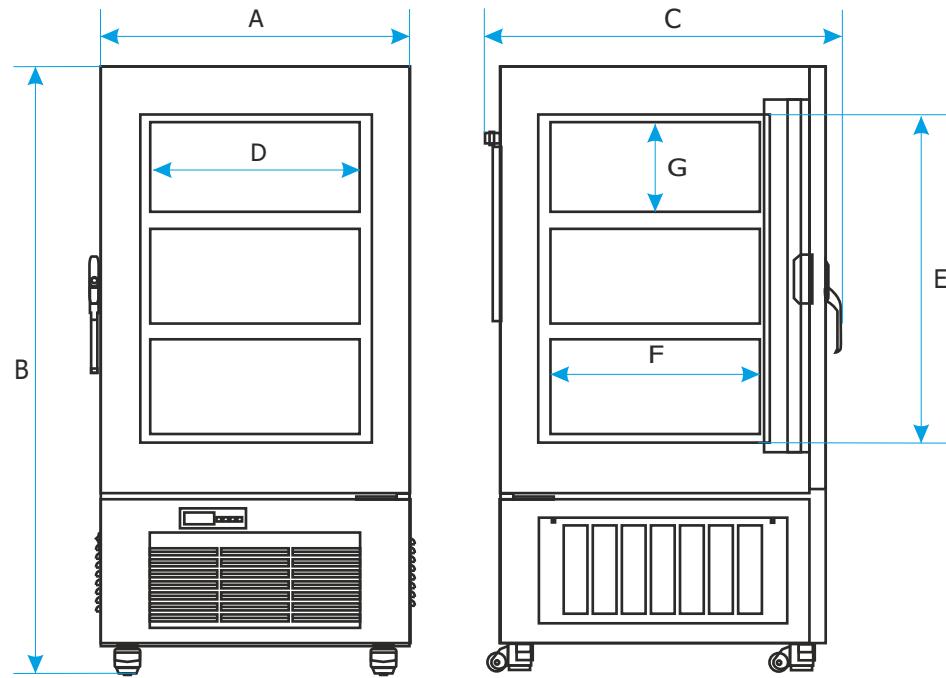

ZLN-UT 300

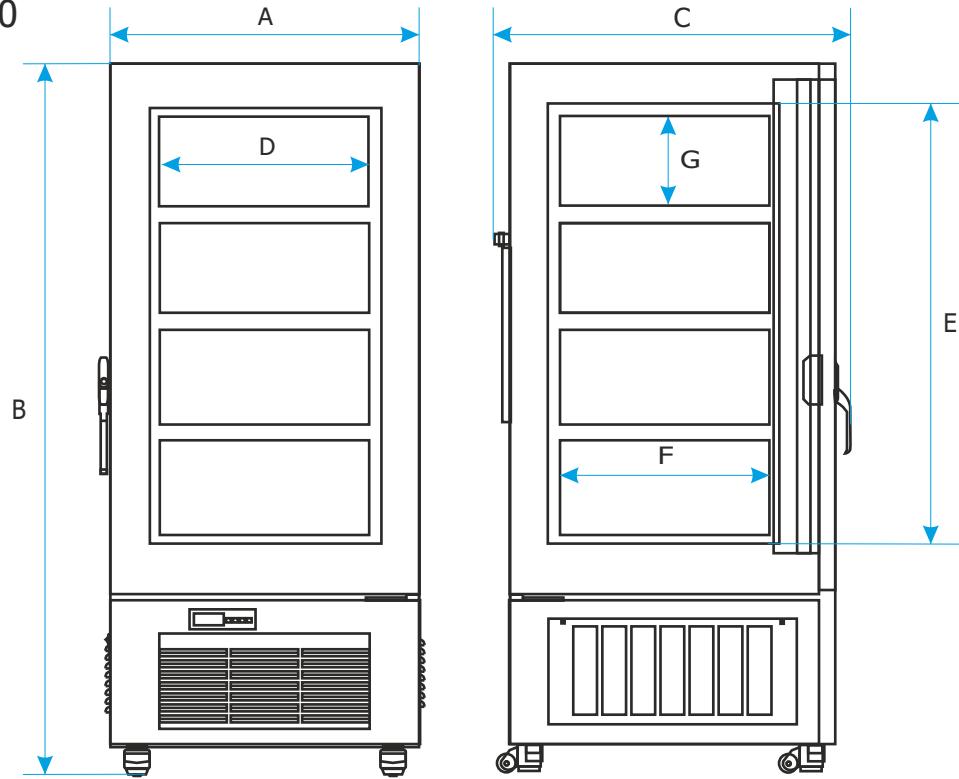

► Стойки с выдвижными ящиками и контейнерами для пробирок для ультразвуковых морозильников



► Контейнеры для пробирок


Модель	количество отсеков	количество стоек в одном отсеке	количество контейнеров в одной стойке	количество контейнеров в контейнерах	количество контейнеров в одном отсеке	количество пробирок в одном изделии	количество пробирок в одном изделии
ZLN-UT 200	3	3	12	36	108	8 748	8 748
ZLN-UT 300	4	3	12	36	144	11 664	11 664

## Сухожаровые шкафы, инкубаторы, охлаждаемые инкубаторы

**Все изделия в исполнении STD оснащены микропроцессорным PID-контроллером с графическим ЖК-дисплеем и сенсорной клавиатурой с подсветкой.**


### ► Преимущества контроллера:

- шестисегментная температурно-временная программа;
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- память на 3 пользовательских программы
- регулируемая задержка запуска терmostатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин.;
- регулируемая длительность термостатирования и освещения (для IL/FOT) от 1 мин. до 100 дней или непрерывно;
- регулируемое линейное изменение температуры;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- возможность пользовательской калибровки температуры;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- работа с приоритетом температуры;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- цифровой таймер;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- внутренняя память для хранения до 2046 показаний;
- естественная (SL/SR/CL) или принудительная (SL/SR/CL/IL) циркуляция воздуха с контролем скорости вентилятора (для CLW/SLW/SRW 15–115 — от 0 до 100%, для CLW/SLW/SRW 180–1000 и ILW — от 10 до 100%);
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы;
- автоматический контроль воздушной заслонки (CL/SL/SR).

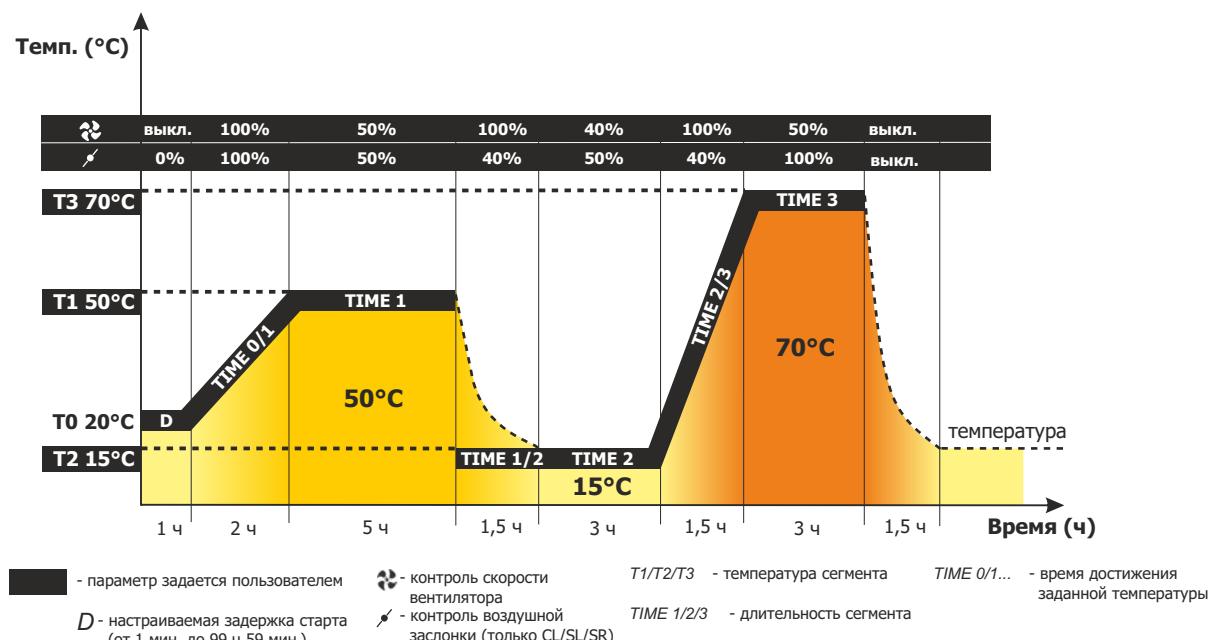

## Сухожаровые шкафы, инкубаторы, охлаждаемые инкубаторы

### ► Панель управления

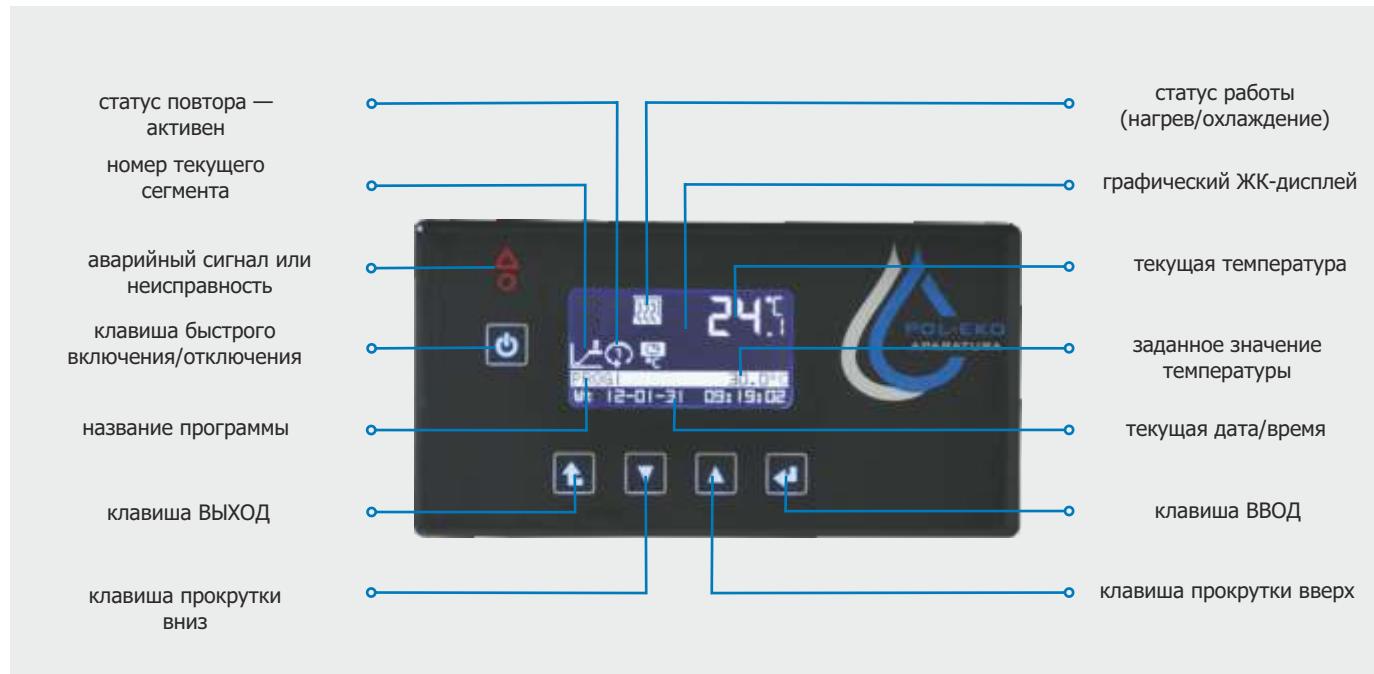

### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур: SL (от +5 выше окружающей среды до +300°C), SR (от +5 выше окружающей среды до +250°C), CL (от +5 выше окружающей среды до +100°C), IL (от 0 до 70°C / дополнительно от -10 до 70°C);
- сертификат заводского испытания (при +37°C для CL/IL, +105°C для SL, +170°C для SR);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: чешский, английский, эстонский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский, русский, испанский;
- класс защиты от перегрева 2.0 по DIN 12880;
- сигнализация при открытых дверцах;
- в моделях 750, 1000, ILW 400 стандартно установлены колесики.



## Сухожаровые шкафы, инкубаторы, охлаждаемые инкубаторы

### Исполнение TOP+


Все изделия в исполнении TOP+ оснащаются микропроцессорным PID-контроллером с большим (5,7") полноцветным сенсорным экраном с интуитивно понятным меню и удобным программным обеспечением. Одним из важнейших преимуществ является возможность подключения к сети Ethernet для удаленного управления с любого компьютера.

### Преимущества контроллера:

- многосегментные температурно-временные программы (до 100 сегментов);
- функция администратора для управления учетными записями пользователей;
- регулируемая задержка запуска терmostатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин.;
- контроль доступа с помощью входа в систему;
- программирование на 7 дней;
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- регулируемая длительность терmostатирования и освещения (для IL/FIT) от 1 мин. до 999 ч 59 мин. или непрерывно;
- регулируемое линейное изменение температуры;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры для каждого сегмента программы;
- возможность пользовательской калибровки температуры;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры;
- работа с приоритетом температуры или приоритетом времени;
- сигнализация при неисправности датчика температуры;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- цифровой таймер;
- часы реального времени;
- функция самодиагностики;
- естественная (SL/CL) или принудительная (SL/CL/IL) циркуляция воздуха с контролем скорости вентилятора (для CLW/SLW 53/115 — от 0 до 100%; для CLW/SLW/SRW 180-1000 и ILW — от 10 до 100%);
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы;
- автоматический контроль воздушной заслонки (CL/SL).


### Функции соответствия GLP:

- защита настроек паролем;
- память на 20 пользовательских программ;
- внутренняя память до 4100 показаний для каждого пользователя с возможностью просматривать значения на дисплее или ПК в табличной или графической форме;
- порт USB обеспечивает прямую запись данных или передачу на флеш-накопитель;
- журнал событий.

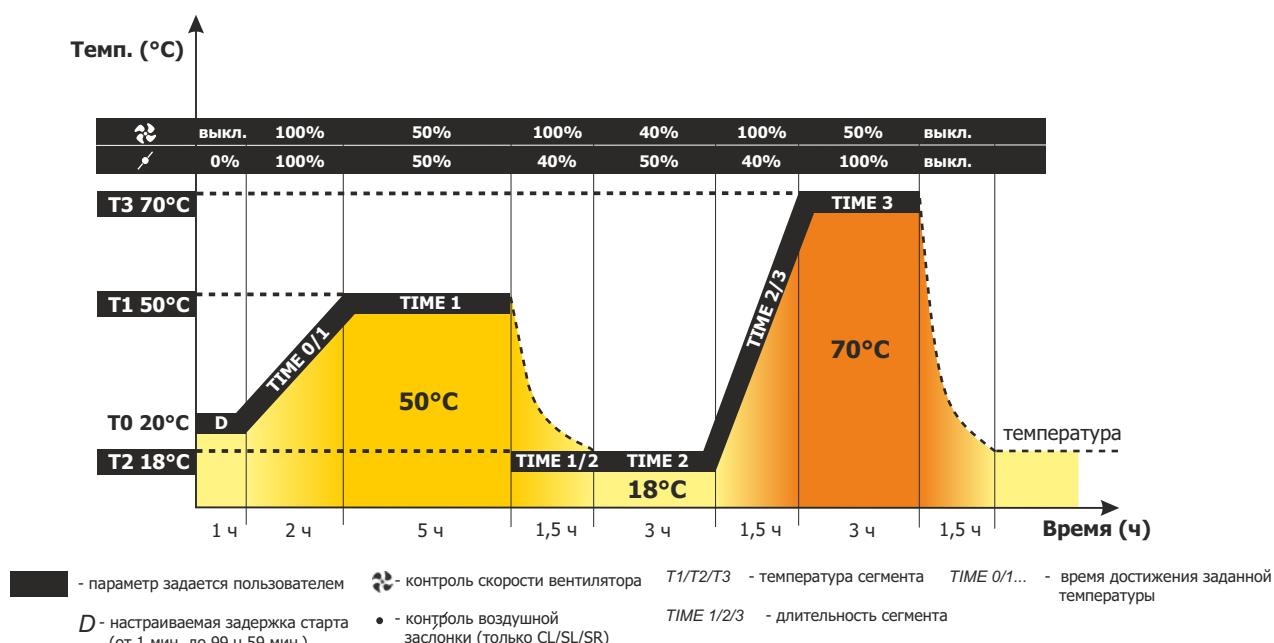


## Сухожаровые шкафы, инкубаторы, охлаждаемые инкубаторы

### ► Панель управления

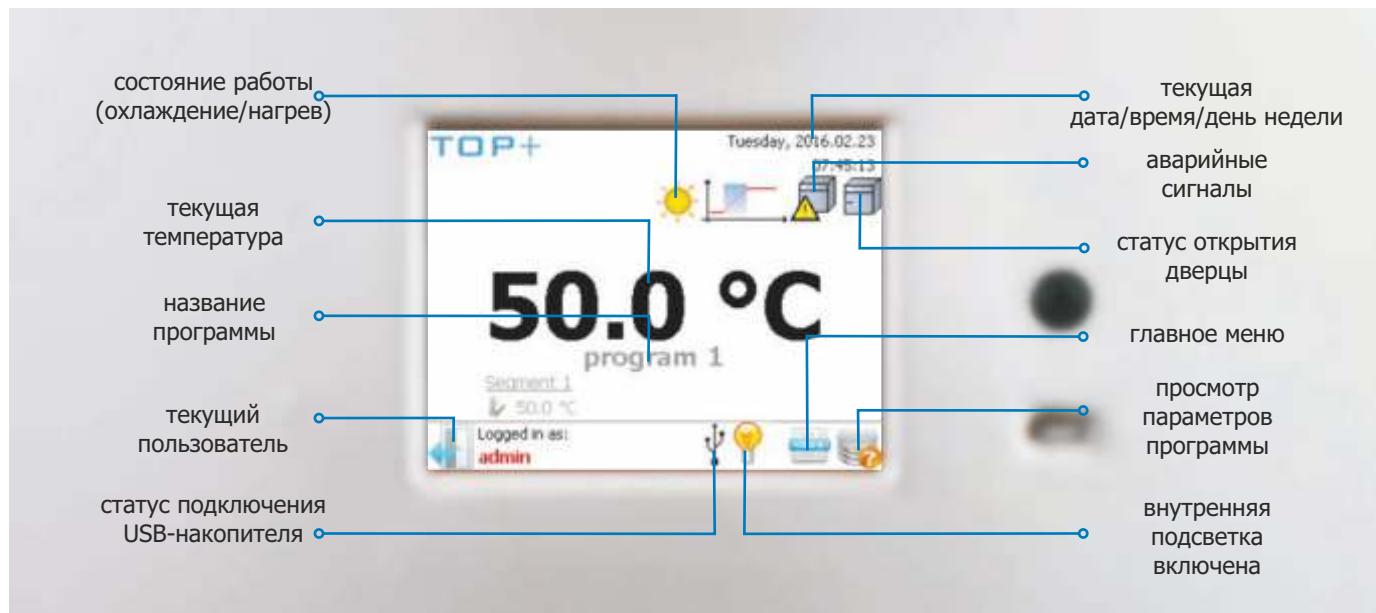

### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур: SL (от +5 выше окружающей среды до +300°C), CL (от +5 выше окружающей среды до +100°C), IL (от 0 до 100°C / дополнительно от -10 до 100°C);
- Ethernet-кабель;
- программное обеспечение TOP+ Control;
- порт USB обеспечивает прямую запись или передачу данных на флеш-накопитель;
- сертификат заводского испытания (при +37°C для CL/IL, +105°C для SL);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: английский, эстонский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, латвийский, польский, португальский, румынский, русский, испанский;
- класс защиты от перегрева 3.3 (IL), класс 3.1 (CL/SL) по DIN 12880;
- сигнализация при открытых дверцах;
- в моделях 750, 1000 стандартно установлены колесики.

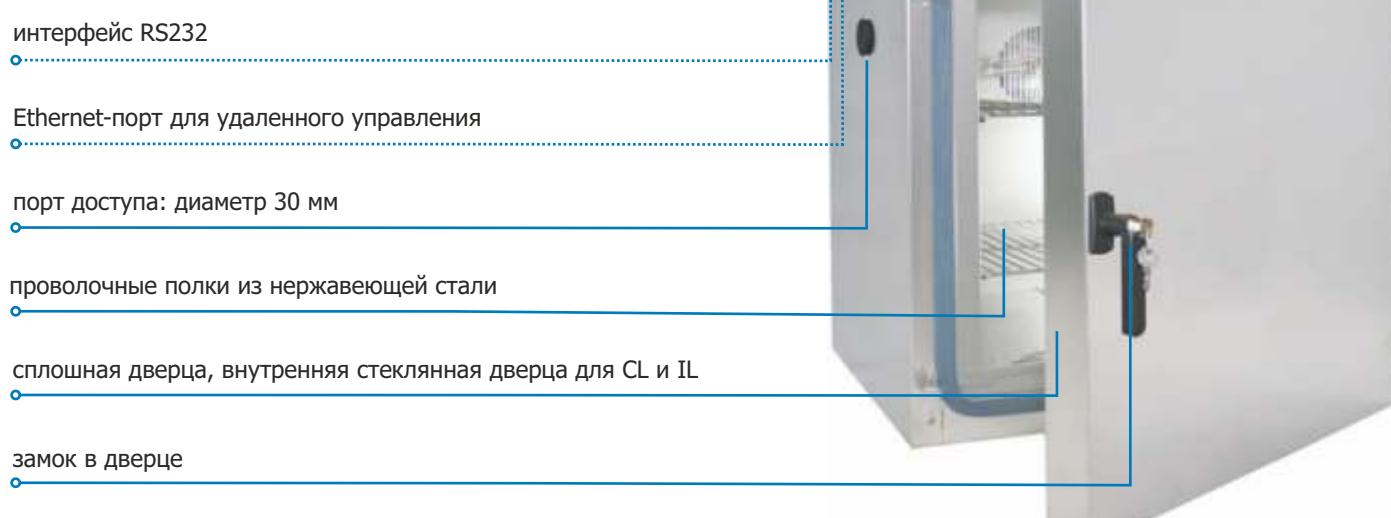

## Лабораторные инкубаторы

### ► Применение:

- инкубация образцов для микробиологического анализа;
- анализ термостойкости образцов под действием высоких температур;
- испытания с применением антител;
- бактериальные испытания;
- наблюдения за кристаллизацией;
- выращивание термофильных микроорганизмов;
- испытания устойчивости лекарственных препаратов;
- испытания устойчивости продуктов питания.



**Лабораторные инкубаторы предназначены для инкубации образцов в диапазоне от температуры выше окружающей среды до +100°C.**

### ► Аттестация



Все терmostатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

## Лабораторные инкубаторы

CL

	CL 15	CL 32	CL 53	CL 115	CL 180	CL 240	CL 400	CL 750	CL 1000			
<b>Параметры</b>												
циркуляция воздуха	естественная (CLN) / принудительная (CLW)							принудительная (CLW)				
объем камеры <sup>1</sup> (л)	15	32	56	112	180	245	424	749	1005			
тип дверцы	двойная							двойная/дверца со смотровым окном (опция)				
диапазон температур	от +5 выше окружающей среды до +100°C											
дискретность показаний темп. (°C)	0,1											
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем											
материал камеры	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301											
материал корпуса	-	лист с порошковой покраской										
	INOX/G	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани										
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина	510	590	590	650	650	810	1010	1260	1260		
	B высота	550	630	700	850	1030	1200	1430	1600	2000		
	C глубина	440	500	600	700	760	760	750	850	850		
внутренние размеры (мм)	D ширина	320	400	400	460	470	600	800	1040	1040		
	E высота	230	320	390	540	720	800	1040	1200	1610		
	F глубина	200	250	360	450	560	510	510	600	600		
макс. нагрузка на одну полку <sup>5</sup> (кг)	-	10	10	25	25	25	25	25	-	-		
	исполн. PW <sup>3</sup>	-	-	50	50	50	100	100	100	100		
макс. нагрузка на изделие (кг)	-	20	30	40	60	75	90	120	140	-		
	исполн. W <sup>4</sup>	-	-	80	120	120	300	300	300	300		
номинальная мощность (Вт)	300	300	400	400	850	800	1200	1800	1800	1800		
масса (кг)	27	35	50	65	94	126	174	260	330	330		
защита от перегрева	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) / 3.1 для TOP+											
электропитание*	230 В 50 Гц											
кол-во полок (установлено/макс.)	1/2	1/3	2/5	2/7	3/9	3/10	3/14	5/16	6/22			
срок гарантии	24 месяца											
изготовитель	POL-EKO-APARATURA											

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - рабочий объем камеры может быть меньше

2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура


3 - усиленные полки

4 - усиленное исполнение

5 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

### Опции и принадлежности

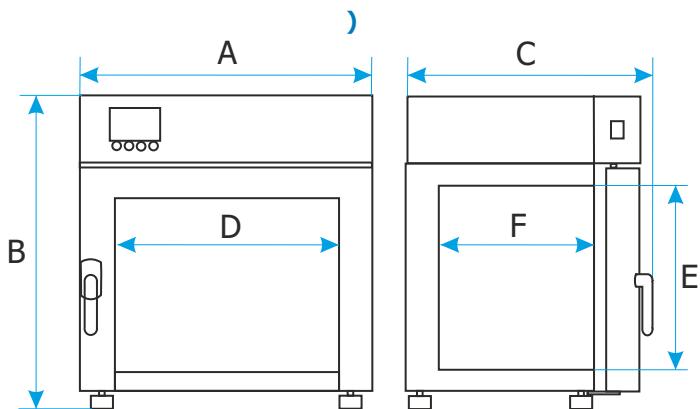

## Охлаждаемые инкубаторы

IL

# Охлаждаемые инкубаторы

### ► Применение:

- микробиологические исследования;
- выращивание растений и микроорганизмов в условиях точно контролируемой температуры;
- определение БПК;
- инкубация образцов при заданной температуре.



Охлаждаемые инкубаторы предназначены для инкубации образцов в стабильной среде вне зависимости от условий окружающей среды, в диапазоне температур от -10 до +100°C.

### ► Аттестация



Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

ILW 53 ILW 115 ILW 240 ILW 400 ILW 750

**Параметры**

циркуляция воздуха		принудительная				
объем камеры <sup>1</sup> (л)	56	112	245	424	749	
тип дверцы						двойная/дверца со смотровым окном (опция)
диапазон температур (°C)						-10 (опция)/ от 0 до +70 (+100 для исполнения TOP+)
дискретность показаний температуры (°C)						0,1
контроллер						микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем
материал камеры						кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	-	-				лист с порошковой покраской
	INOX/G					нержавеющая сталь со структурой льняной ткани
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина	690	660	820	1040	1260
	В высота	960	1080	1430	1650	1820
	С глубина	600	710	760	740	860
внутренние размеры (мм)	D ширина	400	460	600	800	1040
	E высота	390	540	800	1040	1200
	F глубина	360	450	510	510	600
макс. нагрузка на одну полку <sup>5</sup> (кг)	-	25	25	25	25	25
	исполнение PW <sup>3</sup>	50	50	100	100	100
макс. нагрузка на изделие (кг)	-	40	60	90	120	140
	исполнение W <sup>4</sup>	80	120	300	300	300
номинальная мощность (Вт)		400	400	800	1200	1800
масса (кг)		69	90	140	185	275
защита от перегрева						класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / 3.3 для TOP+
электропитание*						230 В 50 Гц
кол-во установленных полок	2/5	2/7	3/10	3/14	5/16	
срок гарантии						24 месяца
изготовитель						POL-EKO-APARATURA

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - рабочий объем камеры может быть меньше



2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

3 - усиленные полки

4 - усиленное исполнение

5 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

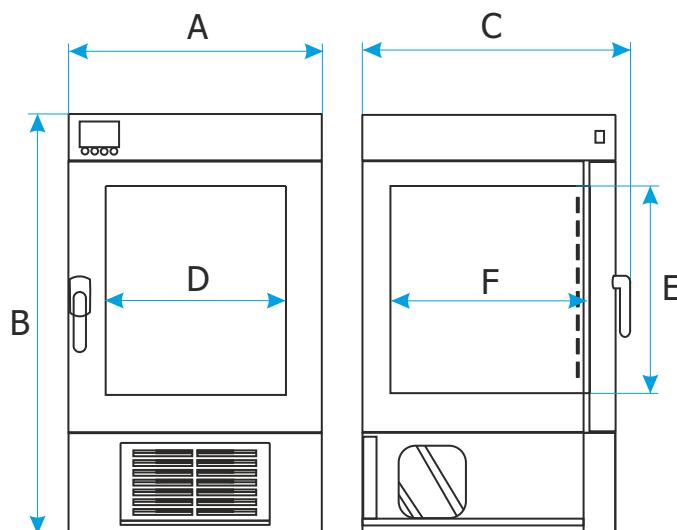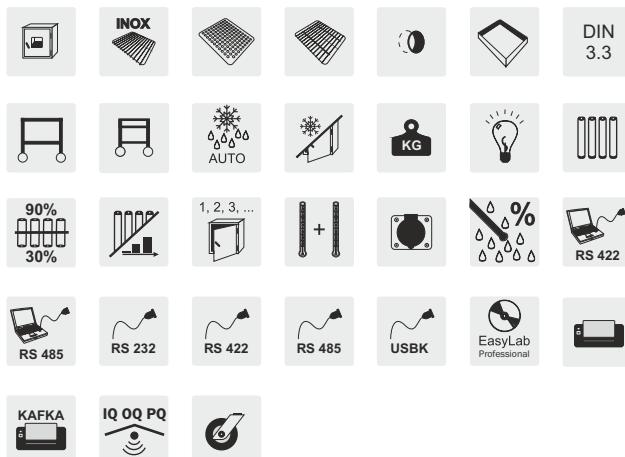**Опции и принадлежности**



## Инновационные и экологичные инкубаторы ILP на элементах Пельтье

### ► Преимущества по сравнению с инкубаторами с компрессорным охлаждением



#### Бесшумная работа

Шум от работающего изделия значительно снижен, что создает более комфортные условия в лаборатории.



#### Не наносит вреда окружающей среде

Отсутствие компрессора и хладагентов исключает нанесение ущерба окружающей среде.



#### Небольшой вес и размер

Использование элементов Пельтье позволило уменьшить размер и вес изделия.



#### Отсутствие вибраций

За счет использования системы на элементах Пельтье устранены вибрации от компрессора.





#### Экономия электроэнергии

Технология элементов Пельтье позволяет значительно сократить потребление электроэнергии, благодаря чему инкубаторы ILP стали еще более экономичными.



#### Идеальные рабочие характеристики

Охлаждающая система на базе элементов Пельтье обеспечивает высочайшую стабильность и однородность температуры. Кроме того, для восстановления заданной температуры (например, после открытия дверцы) требуется меньше времени.

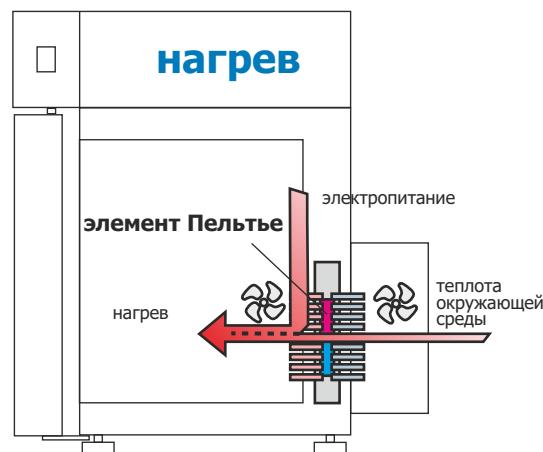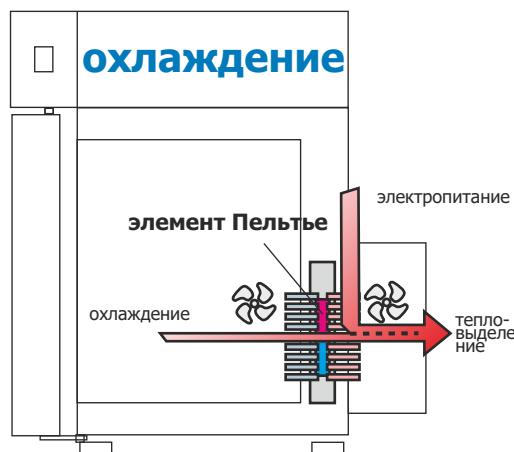

### ► Аттестация



Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

## Инкубаторы с охлаждением за счет эффекта Пельтье

ILP



### Параметры

	ILP 53	ILP 115	ILP 240	ILP 400	
циркуляция воздуха	принудительная				
объем камеры (л)	56	112	245	424	
тип дверцы	двойная / дверца со смотровым окном (опция)				
диапазон температур (°C)	от +15 до +70 (+100 для исполнения TOP+)				
дискретность показаний температуры (°C)	0,1				
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем				
материал камеры	нержавеющая сталь по DIN 1.4301				
материал корпуса	-	лист с порошковой покраской			
	INOX/G	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани			
габариты (мм)	A ширина	600	660	820	1040
	B высота	710	850	1140	1380
	C глубина	660	770	810	840
	D ширина	400	460	600	800
внутренние размеры (мм)	E высота	390	540	800	1040
	F глубина	360	450	510	510
макс. нагрузка на одну полку <sup>2</sup> (кг)	-	25	25	25	25
	исполнение PW <sup>1</sup>	50	50	100	100
макс. нагрузка на изделие (кг)		40	60	90	90
номинальная мощность (Вт)		400	400	800	800
масса (кг)		69	90	140	190
защита от перегрева	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) / класс 3.3 для TOP+				
электропитание*	230 В 50 Гц				
кол-во полок (установлено/макс.)	2/5	2/7	3/10	3/14	
срок гарантии	24 месяца				
изготовитель	POL-EKO-APARATURA				

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).


\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - усиленные полки

2 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

### Опции и принадлежности

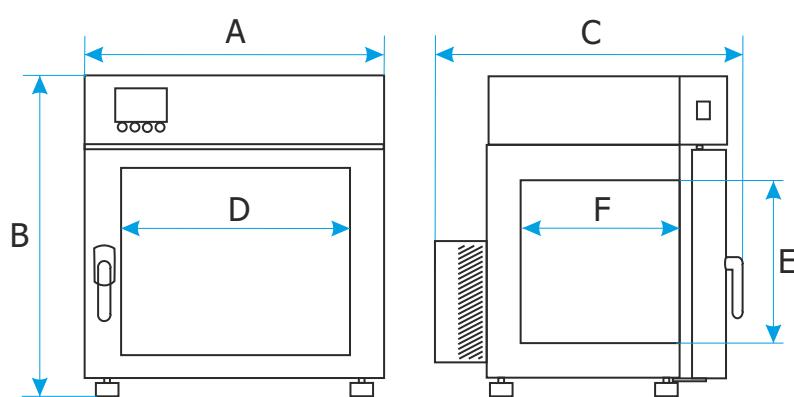


## Охлаждаемые инкубаторы

# Охлаждаемые инкубаторы (IL) с фотопериодической системой

Фотопериодическая (FOT) и фитотронная (FIT) системы позволяют имитировать смену дня и ночи. В фотопериодической системе программа обеспечивает включение/выключение освещения, в фитотронной системе, кроме того, регулируется его интенсивность. Фотопериодическая система предназначена для охлаждаемых инкубаторов в исполнении STD, а фитотронная система — для исполнения TOP+.

### Программные возможности для FOT-системы:

- программное обеспечение имитации дня и ночи для раздельного управления включением/выключением освещения, временем и температурой для каждого сегмента;
- диапазон температур условной ночи: от -10 до +60°C (с опцией IL/T);
- диапазон температур условного дня: от +10 до + 50°C;
- лампы устанавливаются в дверцу или на потолок;
- стандартно используются люминесцентные лампы (дневного света) типа 840;
- работа с приоритетом времени.

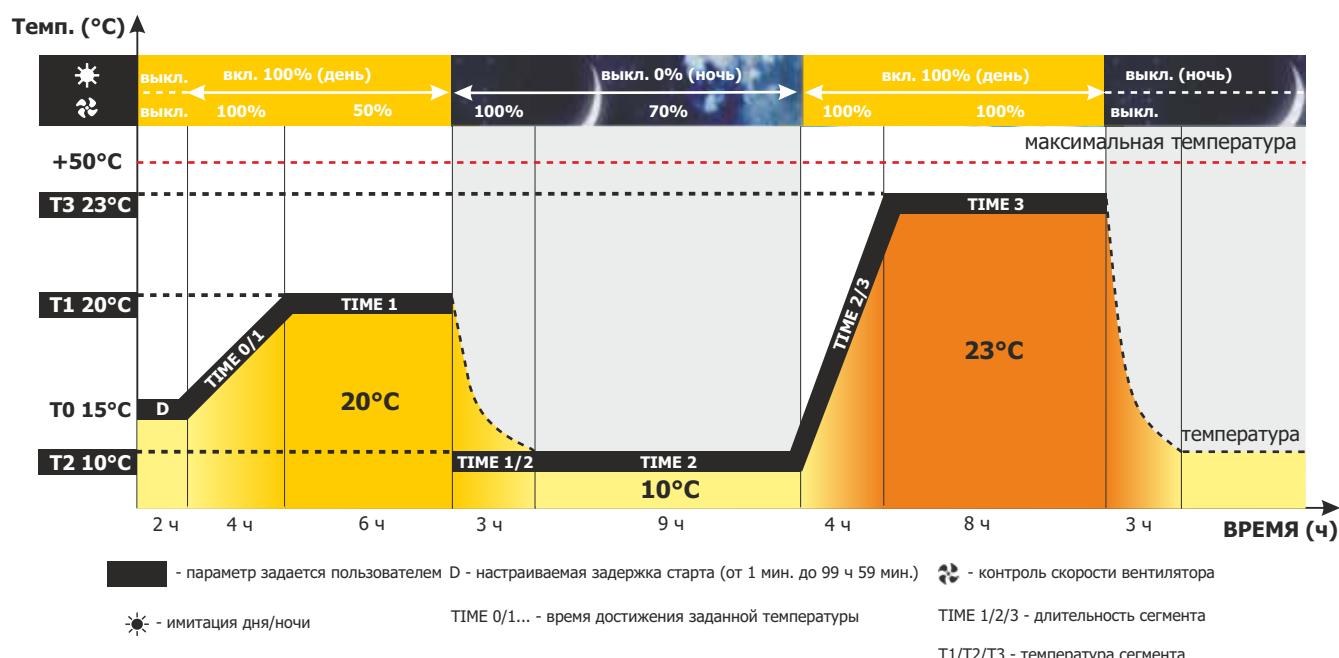

### Фотопериодическая система (опция \*/FOT) для охлаждаемых инкубаторов (IL)\*\*

	IL/FOT2S	IL/FOT3S	IL/FOT5D	IL/FOT6D	ST/FOT8D	ST/FOT10D
доступна для моделей	ILW 53	ILW 115	ILW 53	ILW 115 ILW 240	ILW 240 ILW 400 ILW 750	ILW 750
диапазон температур с фотопериодической системой (°C)				+10... +50°C		
количество ламп в дверцах	-	-	5	6	8	10
количество ламп на потолке	2	3	-	-	-	-
регулировка интенсивности освещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет


\*\* Опция FOT устанавливается на заводе-изготовителе и не может быть заказана отдельно.

## Охлаждаемые инкубаторы с фитотронной системой

Охлаждаемые инкубаторы в исполнении TOP+ (модели ILW 115, 240, 400, 750) могут быть оснащены фитотронной системой.

### Программные возможности для FIT-системы:

- программное обеспечение имитации дня и ночи для раздельного управления интенсивностью освещения (%), временем, температурой и скоростью вентилятора для каждого сегмента;
- диапазон температур условной ночи: от -10 до +60°C (с опцией IL/T);
- диапазон температур условного дня: от +10 до + 50°C;
- лампы устанавливаются в панели над полками;
- стандартно используются люминесцентные лампы (дневного света) типа 840;
- работа с приоритетом температуры или времени.

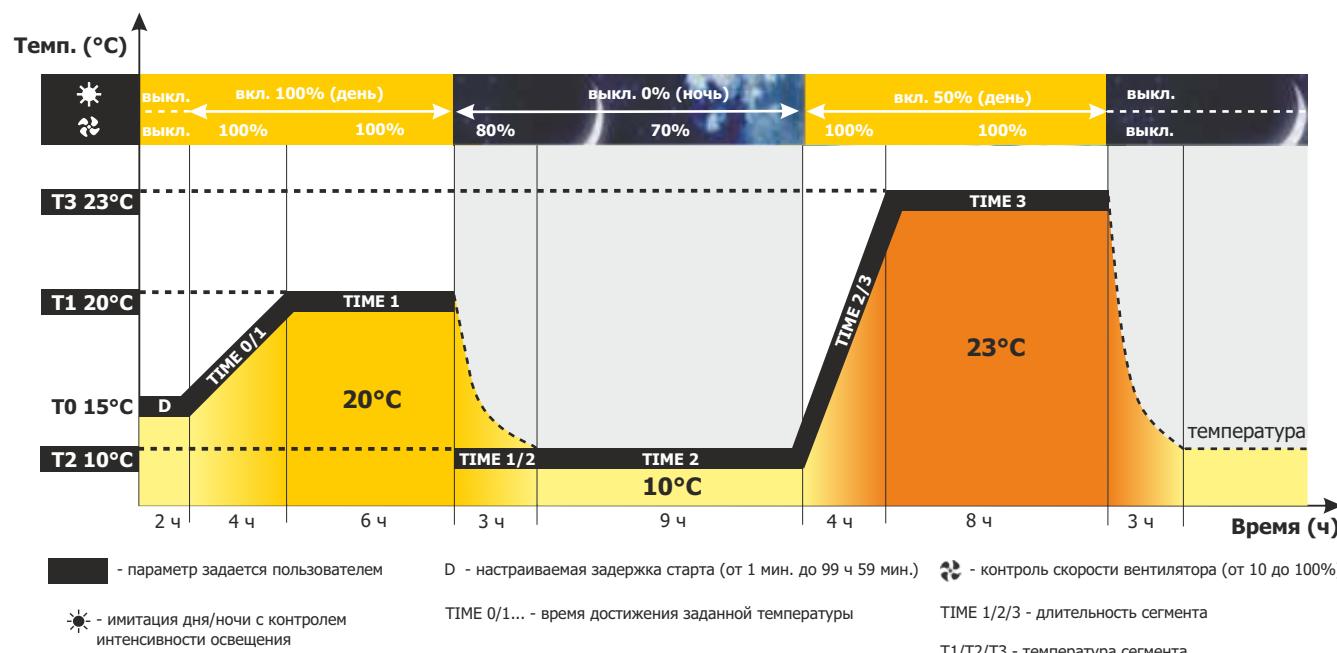

### Фитотронная система (опция \*/FIT) для охлаждаемых инкубаторов в исполнении TOP+

IL/115/FIT P | IL/240/FIT P | IL/400/FIT P | IL/750/FIT P

диапазон температур при включенной фитотронной системе (°C)	+10 ... +50°C			
число панелей освещения над полками стандартно/максимально	1/1	1/2	1/2	1/3
регулировка интенсивности освещения	да	да	да	да

## Охлаждаемые инкубаторы

### Охлаждаемые инкубаторы серия ST BD

Разработаны для применения с системами манометрического определения БПК WTW OxiTop.




#### ► Стандартные характеристики:

- Просвет между полками позволяет удобно разместить системы;
- Встроенные розетки электропитания;
- Материал внутренней камеры стандартно - алюминий;
- Корпус из стального листа с порошковой покраской;
- Микропроцессорный контроллер, пиксельный экран с меню на русском языке;
- Диапазон температур от +3 до +40 °C, дискретность установки и индикации 0,1 °C;
- Принудительная циркуляция воздуха;
- Дверца стандартно - сплошная, дополнительно - стеклянная;
- Сигнализация открывания дверцы;
- Порт доступа диаметром 30 мм стандартно;
- Светодиодное внутреннее освещение;
- Внутренняя память до 2046 показаний температуры;
- Таймер терmostатирования от 1 мин до 30 суток, с возможностью непрерывной работы;
- Звуковая и визуальная сигнализация нарушения температурного режима;
- Сигнализация при неисправности внутреннего датчика температуры;
- Продолжение работы после сбоя электропитания с ранее заданными параметрами;
- Часы реального времени.

 **Доступные модели:**



Модель:	ST 2 BD	ST 4 BD	ST 5 BD
Вместимость камеры, л	150	250	300
Полезный объем камеры, л	122	203	243
Внешние размеры, мм			
ширина А	620	620	620
высота В	860	1260	1460
глубина С	650	650	650
ширина D	480	480	480
ширина D'	520	520	520
высота Е	660	1060	1260
глубина F	420	420	420
глубина F'	480	480	480
глубина G	320	320	320
высота H	440	840	1050
Число внутренних розеток	2	3	4
Вместимость систем OxiTop	2 (IS 12)	3 (IS 12)	4 (IS 12)
Число полок	2	3	4

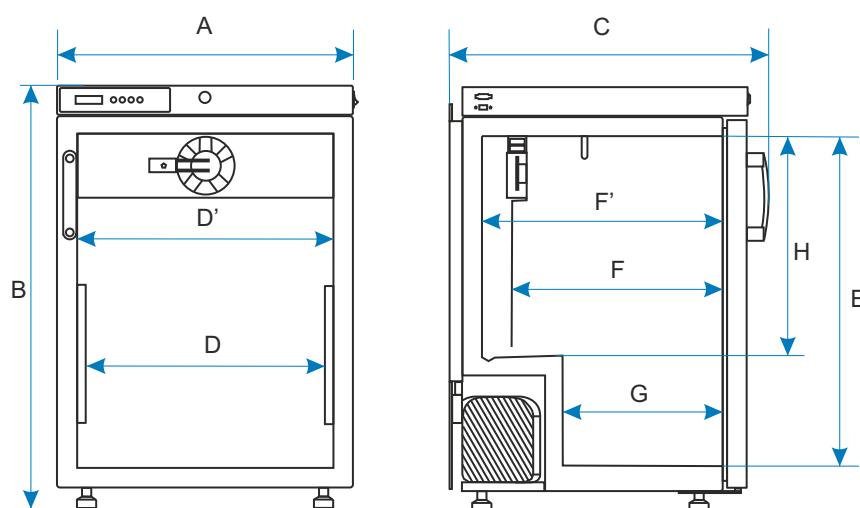

## Сухожаровые шкафы

SL

# Сухожаровые шкафы

### ► Применение:

- стерилизация медицинских инструментов и изделий медицинского назначения;
- дезинфекция и сушка медицинского перевязочного материала и лабораторной посуды;
- испытания термостойкости строительных материалов,
- электронных и электротехнических компонентов;
- определение характеристик продукции в условиях высокой температуры;
- сушка сеток для бумагоделательных машин;
- сушка лабораторной посуды;
- процессы выдержки и отверждения;
- предварительный нагрев;
- разложение белков;
- сушка растительных тканей;
- метаболизм лекарственных средств;
- сушка бумаги.

Сухожаровые шкафы могут поддерживать температуру выше, чем температура окружающей среды макс. до 300°C



Сухожаровые шкафы предназначены  
для поддержания высоких  
температур до 300°C.

### ► Аттестация



Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

SL 15	SL 32	SL 53	SL 115	SL 180	SL 240	SL 400	SL 750	SL 1000
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

**Параметры**

циркуляция воздуха	естественная (SLN) / принудительная (SLW)						принудительная (SLW)				
объем камеры <sup>1</sup> (л)	15	32	56	112	180	245	424	749	1005		
тип дверцы	сплошная						сплошная/дверца со смотровым окном (опция)				
диапазон температур	от +5 выше температуры окружающей среды до +300°C										
дискретность показ. темп. (°C)	0,1										
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем										
материал камеры	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301										
материал корпуса	-	лист с порошковой покраской									
	INOX/G	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани									
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина	510	590	590	650	650	810	1010	1260	1260	
	B высота	550	630	700	850	1030	1200	1430	1600	2000	
	C глубина	440	500	600	700	760	760	750	850	850	
внутренние размеры (мм)	D ширина	320	400	400	460	470	600	800	1040	1040	
	E высота	230	320	390	540	720	800	1040	1200	1610	
	F глубина	200	250	360	450	560	510	510	600	600	
макс. нагрузка на одну полку <sup>3</sup> (кг)	-	10	10	25	25	25	25	-	-	-	
	испол. PW <sup>3</sup>	-	-	50	50	50	100	100	100	100	
макс. нагрузка на изделие (кг)	-	20	30	40	60	75	90	120	140	-	
	испол. W <sup>4</sup>	-	-	80	120	120	300	300	300	300	
номинальная мощность (Вт)	600	1100	1600	2400	2400	3000	3900	5400	5400	5400	
масса (кг)	27	35	50	65	94	126	174	260	330	330	
защита от перегрева	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) / 3.1 для TOP+										
электропитание*	230 В 50 Гц								400 3/N		
кол-во полок (установлено/макс.)	1/2	1/3	2/5	2/7	3/9	3/10	3/14	5/16	6/22		
срок гарантии	24 месяца										
изготовитель	POL-EKO-APARATURA										

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - рабочий объем камеры может быть меньше

2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура


3 - усиленные полки

4 - усиленное исполнение

5 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

### Опции и принадлежности

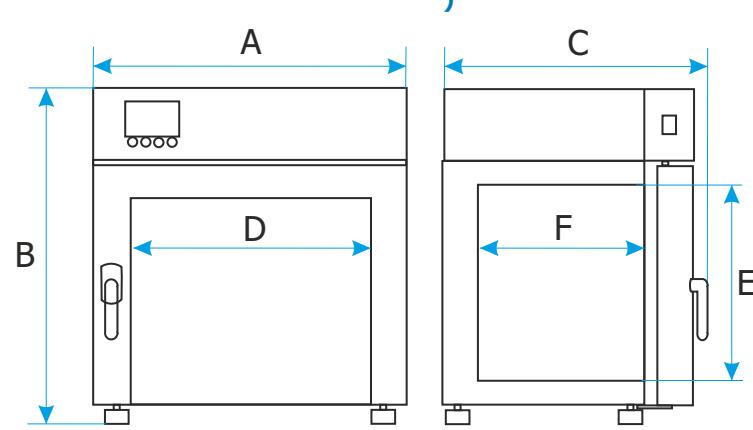

## Сухожаровые шкафы с продувкой азотом

Согласно европейскому стандарту ISO 589:2003, твердый уголь — определение общего содержания влаги, образцы высушивают в сухожаровом шкафу при продувке азотом со скоростью подачи, равной примерно 15-кратной вместимости шкафа в час.

### ► Доступные модели

- SLWN1 — лабораторный сухожаровой шкаф с системой продувки камеры сухим азотом, включающий соединительные элементы, краны и лабораторный ротаметр (калибруемый).
- SLWN2 — лабораторный сухожаровой шкаф с системой продувки камеры сухим азотом, включающий соединительные элементы, краны и технологический ротаметр (не подлежит калибровке).

Баллон с азотом в комплект поставки не входит.

	SLWN1 53	SLWN1 115	SLWN1 240
объем камеры <sup>1</sup> (л)	56	112	245
	SLWN2 53	SLWN2 115	SLWN2 240

1 - рабочий объем камеры может быть меньше

Размеры см. на с. 52 (модели SLW 53, 115, 240).



### ► Аттестация

- Калибровка в атмосфере воздуха по 9 точкам (по углам и геометрическому центру камеры) при одной указанной заказчиком температуре в аккредитованной лаборатории. Подтверждается оформлением аттестата.
- Калибровка в атмосфере азота по 9 точкам (по углам и геометрическому центру камеры) при одной указанной заказчиком температуре в аккредитованной лаборатории. Подтверждается оформлением аттестата.
- Калибровка лабораторного ротаметра при 3-х значениях температуры в аккредитованной лаборатории. Подтверждается оформлением аттестата.

## Сухожаровые шкафы SIMPLE

Простые в эксплуатации лабораторные сухожаровые шкафы подойдут заказчикам, которым не требуются расширенные возможности программирования. Устройство легко использовать: простой контроллер позволяет задать температуру и длительность нагрева.




### ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур: от +5 выше окружающей среды до +250°C;
- сертификат заводского испытания (при +105°C);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- класс защиты от перегрева 1.0 по DIN 12880;
- порт доступа: диаметр 30 мм, с правой стороны;
- полки из нержавеющей стали;
- сплошная дверца.

### ► Преимущества контроллера:

- регулировка температуры;
- регулировка времени работы от 0 до 72 ч, либо непрерывная работа.

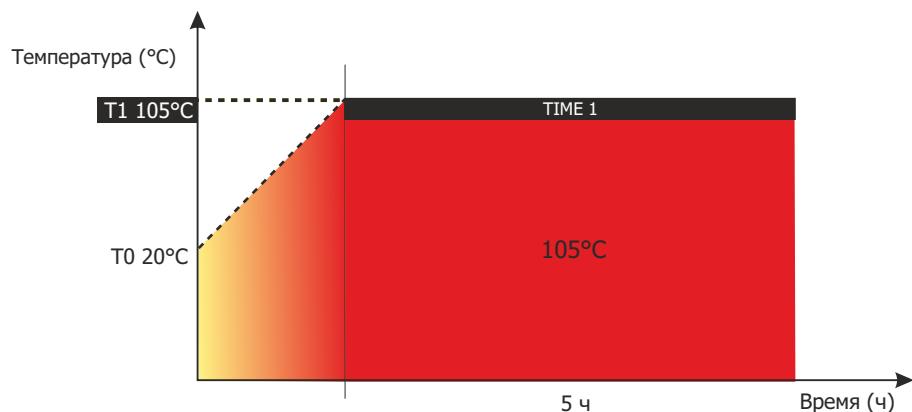

■ - параметр задается пользователем      T1 - температура сегмента      TIME 1 - длительность сегмента

## Сухожаровые шкафы

### SL SIMPLE

	SLN 53 SIMPLE	SLW 53 SIMPLE	SLN 115 SIMPLE	SLW 115 SIMPLE
Параметры				
циркуляция воздуха	естественная	принудительная	естественная	принудительная
объем камеры (л)	56	56	112	112
тип дверцы		сплошная		
диапазон температур		от 5 выше окружающей среды до +250 °C		
дискретность показаний темпер. (°C)		0,1		
контроллер		микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем		
материал камеры		нержавеющая сталь по DIN 1.4016		
материал корпуса		лист с порошковой покраской		
габариты <sup>1</sup> (мм)	A ширина B высота C глубина	660 590 600	660 590 600	720 730 710
внутренние размеры (мм)	D ширина E высота F глубина	390 400 360	390 400 360	460 540 450
макс. нагрузка на полку (кг)	10	10	10	10
макс. нагрузка на изделие (кг)	40	40	60	60
номинальная мощность (Вт)	1600	1600	2400	2400
масса (кг)	50	50	65	65
защита от перегрева		класс 1.0 по DIN 12880		
электропитание*		230 В 50 Гц		
кол-во полок (установлено/макс.)	2/5	2/5	2/7	2/7
срок гарантии		24 месяца		
изготовитель		POL-EKO-APARATURA		


Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 3Р 230 В 60 Гц

1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

#### ▲ Опции и принадлежности

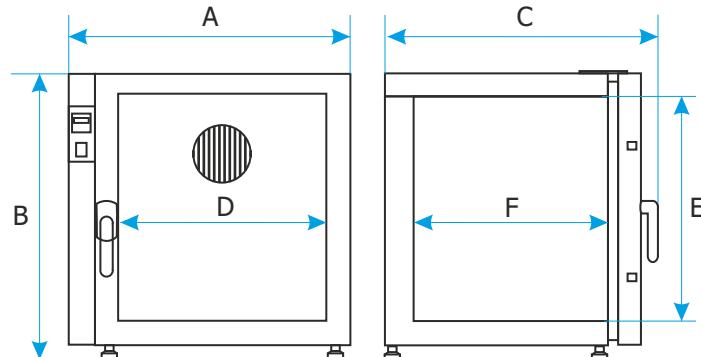

# Проходные сухожаровые шкафы

## Применение

- сушка окрашенных и лакированных изделий;
- сушка/стерилизация продукции между чистой и грязной зонами;
- сушка изделий на технологических линиях.

**НОВИНКА**

Готовятся к выпуску  
проходные стерилизаторы  
SRWP

Стандартные и опциональные принадлежности те же, что и для моделей SL. Модели с другим объемом камеры доступны под заказ.



SLWP 115

SLWP 240

### Параметры

	принудительная	
циркуляция воздуха	112	245
объем камеры <sup>1</sup> (л)		
тип дверцы	сплошная/дверца со смотровым окном (опция)	
диапазон температур (°C)	от 5 выше окружающей среды до +300°C	
дискретность показаний темп. (°C)	0,1	
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем	
материал камеры	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301	
материал корпуса	- лист с порошковой покраской INOX/G нержавеющая сталь со структурой льняной ткани	
габариты <sup>2</sup> (мм)	ширина 680 820 высота 900 1160 глубина 700 770	
внутренние размеры (мм)	ширина 460 600 высота 530 800 глубина 460 510	
макс. нагрузка на полку <sup>5</sup> (кг)	- 10 10 испол. PW <sup>3</sup> 50 100	
макс. нагрузка на изделие (кг)	- 60 90 испол. W <sup>4</sup> 120 300	
номинальная мощность (Вт)	2400 3000	
масса (кг)	65 126	
защита от перегрева	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция)	
электропитание*	230 В 50 Гц	
кол-во полок (установлено/макс.)	2/7 3/10	
срок гарантии	24 месяца	
изготовитель	POL-EKO-APARATURA	

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 3Р 230 В 60 Гц

1 - рабочий объем камеры может быть меньше

2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

3 - усиленные полки

4 - усиленное исполнение

5 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

## Стерилизаторы

### ► Применение:

- сушка лабораторной посуды;
- стерилизация горячим воздухом.



Стерилизаторы горячим воздухом имеют дополнительные функции для защиты образцов. Обеспечивают стерилизацию при температуре до 250°C.

### ► Аттестация



Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

► Стерилизаторы оснащены следующими функциями:

- программы стерилизации с заводской конфигурацией;
- автоматическая блокировка дверцы на время стерилизации;
- автоматическое закрытие воздушной заслонки после запуска программы;
- память на 20 пользовательских программы.

Стерилизаторы выпускаются только в исполнении STD.

SR 53      SR 115      SR 240      SR 400      SR 750      SR 1000

Параметры

циркуляция воздуха	естественная (SRN) / принудительная (SRW)			принудительная (SRW)			
объем камеры <sup>1</sup> (л)	56	112	245	424	749	1005	
тип дверцы	сплошная/дверца со смотровым окном (опция)						
диапазон температур	от 5 выше окружающей среды до +250°C						
дискретность показаний температуры (°C)	0,1						
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем						
материал камеры	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301						
материал корпуса	-	лист с порошковой покраской					
	INOX/G	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани					
габариты <sup>2</sup> (мм)	A ширина	590	650	810	1010	1260	1260
	В высота	700	850	1200	1430	1600	2000
	С глубина	600	700	760	750	850	850
внутренние размеры (мм)	D ширина	400	460	600	800	1040	1040
	E высота	390	540	800	1040	1200	1610
	F глубина	360	450	510	510	600	600
макс. нагрузка на полку <sup>4</sup> (кг)	-	25	25	25	-	-	-
	испол. PW <sup>3</sup>	50	50	100	100	100	100
макс. нагрузка на изделие (кг)		40	60	90	120	140	-
номинальная мощность (Вт)		1600	2400	3000	3900	5400	5400
масса (кг)		50	65	126	174	260	330
защита от перегрева	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция)						
электропитание*	230 В 50 Гц			400 3/N			
кол-во полок (установлено/макс.)	2/5	2/7	3/10	3/14	5/16	6/22	
гарантия	24 месяца						
изготовитель	POL-EKO-APARATURA						

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 3Р 230 В 60 Гц

1 - рабочий объем камеры может быть меньше


2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

3 - усиленные полки

4 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

► Опции и принадлежности

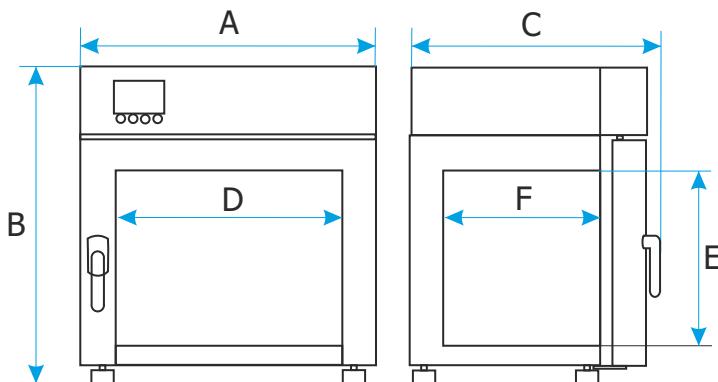

## Климатические камеры

### ► Применение:

- выращивание растений и грибов
- проращивание семян
- разведение насекомых и микроорганизмов;
- тесты на фотостабильность;
- испытания пищевой продукции на срок хранения;
- все виды исследований, требующие поддержания стабильной температуры и влажности (опционально — освещенности);
- испытания строительных материалов.




Климатические камеры с фитотронной системой позволяют поддерживать стабильные условия окружающей среды с контролем температуры, влажности и освещенности.

### ► Аттестация



Все терmostатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

## ► Панель управления

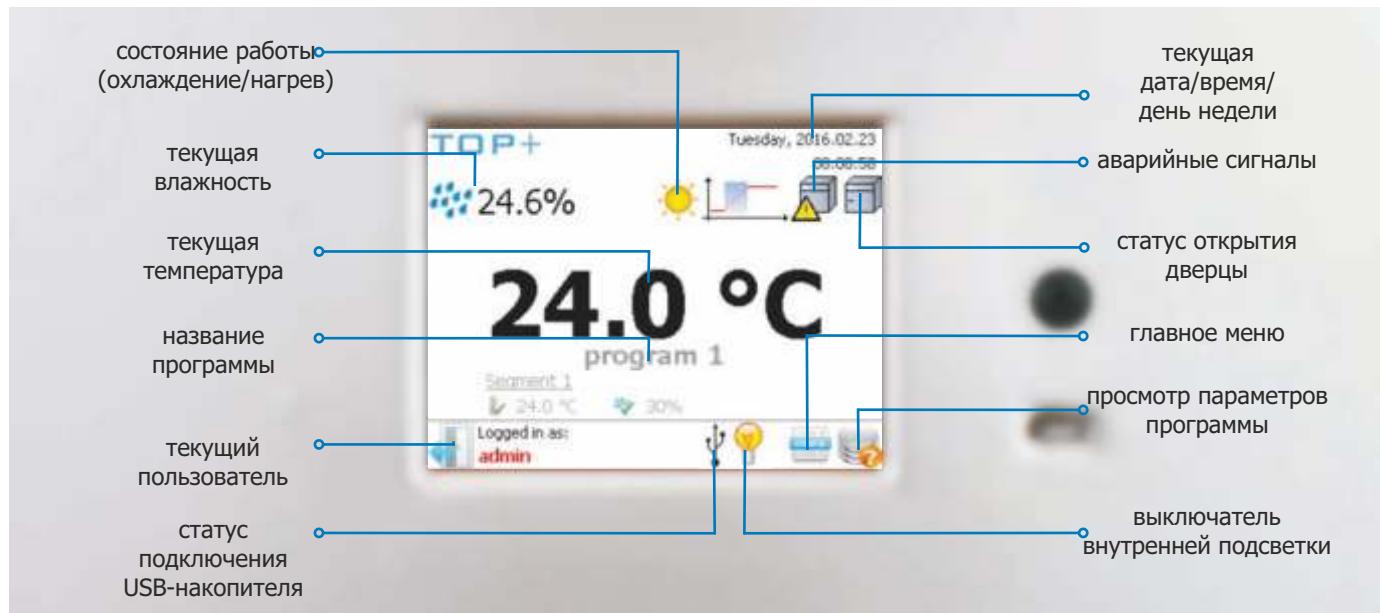

## ► Стандартные характеристики:

- диапазон температур: от -10 до 60°C (KK) и от -10 до +100°C (KKS); от +10 до +50°C (опция FIT с включенным освещением);
- Ethernet-кабель;
- программное обеспечение TOP+ Control;
- сертификат заводского испытания (при +25°C, относительной влажности — 60%);
- руководство по эксплуатации (на английском языке);
- язык меню можно выбрать из следующих вариантов: английский, эстонский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, латвийский, польский, португальский, румынский, русский, испанский;
- класс защиты от перегрева 3.3 по DIN 12880;
- сигнализация при открытых дверцах;
- функция автоматического размораживания;
- контейнер для деминерализованной воды.

интерфейс RS 232 и порт LAN

порт доступа: диаметр 30 мм

проводочные полки из нержавеющей стали

порт USB обеспечивает прямую запись или передачу данных на флеш-накопитель

двойная дверца (сплошная внешняя, стеклянная внутренняя)

замок в дверце

колесики с фиксацией

контейнер для отработанной воды



Климатические камеры оснащены микропроцессорным PID-контроллером температуры и влажности ( дополнительно — освещенности, опция — \*/FIT) с большим (5,7") полноцветным сенсорным экраном, интуитивно понятным меню и удобным программным обеспечением. Одним из важнейших преимуществ является возможность подключения к сети Ethernet для удаленного управления с любого компьютера. Климатические камеры поставляются исключительно в исполнении TOP+.


### ► Преимущество контроллера:

- многосегментные температурно-временные программы (до 100 сегментов);
- повтор программы до 99 раз или бесконечный;
- регулируемая задержка запуска терmostатирования от 1 мин. до 99 ч 59 мин.;
- регулируемое линейное изменение температуры;
- регулируемая длительность терmostатирования, поддержания влажности и освещения (для опции FIT) от 1 мин. до 999 ч 59 мин. или непрерывно;
- запись минимального, среднего и максимального значения температуры и влажности для каждого сегмента программы;
- отображение заданных и фактических значений параметров во время работы;
- звуковой и визуальный сигнал о превышении/понижении температуры и влажности;
- контроль доступа с помощью входа в систему;
- функция администратора для управления учетными записями пользователей;
- программирование на 7 дней;
- возможность пользовательской калибровки температуры и влажности;
- работа с приоритетом температуры или приоритетом времени;
- сигнализация при неисправности датчика температуры и влажности;
- контроль после сбоя электропитания — выполнение программы возобновляется после восстановления электропитания;
- часы реального времени;
- цифровой таймер;
- функция самодиагностики;
- принудительная конвекция воздуха с контролем скорости вентилятора от 10 до 100%;
- автоматическое отключение вентилятора по завершении программы.

### ► Функции соответствия GLP:

- защита настроек паролем;
- память на 20 пользовательских программ;
- внутренняя память до 4 100 показаний для каждого пользователя с возможностью просматривать значения на дисплее или ПК в табличной или графической форме;
- порт USB обеспечивает прямую запись данных или передачу на флеш-накопитель;
- журнал событий.

Программное обеспечение TOP+ control прилагается к прибору

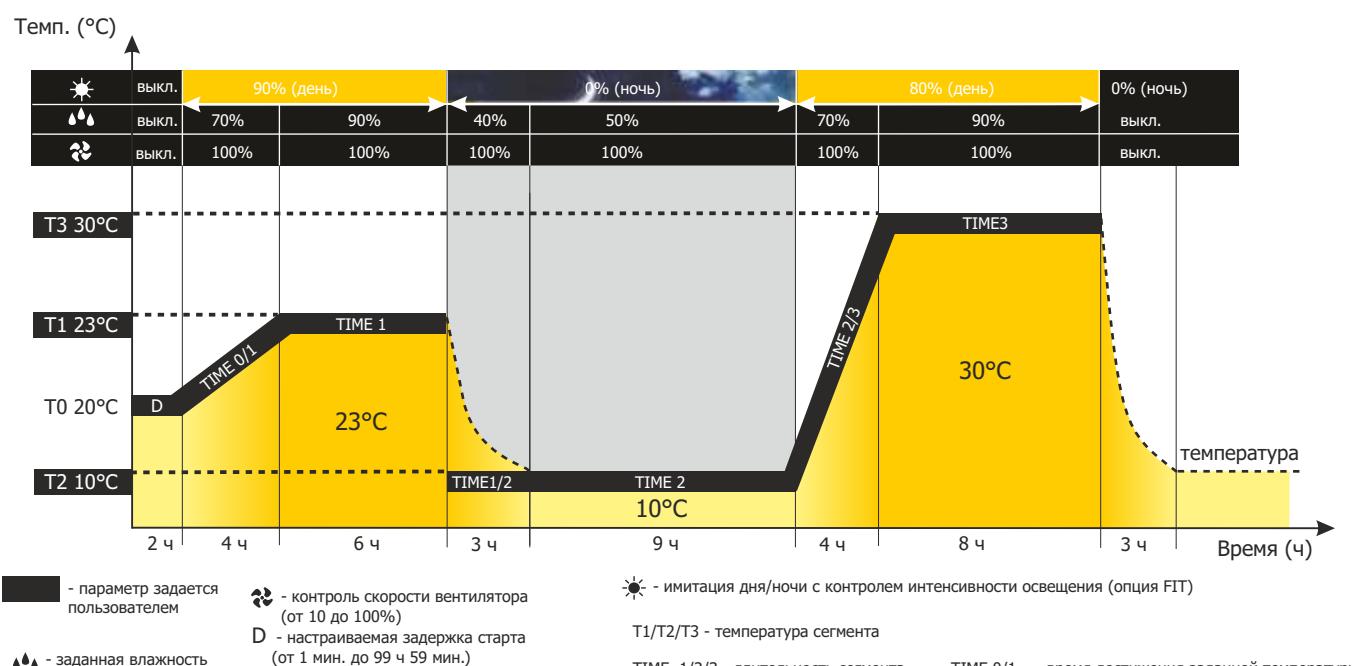

### ◀ Климатические камеры с фитотронной системой (опция \*/FIT)

- контроль температуры, влажности и освещенности;
- имитация дня/ночи с контролем интенсивности освещения:
  - лампы в дверце и на боковых стенках для KK 350, 500 и 700 FIT DS;
  - лампы на боковых стенках для KK 350, KK 500 и 700 FIT S;
  - лампы в дверце для KK 115 и KK 750 FIT D;
  - лампы в панелях над полками для KK 115, 240, 400, 500, 700, 750, 1200, 1450 FIT/P (и FIT PANEL);
- диапазон температур при выключенном освещении: от -10 до 60 °C;
- диапазон температур при включенном освещении: от +10 до +50 °C;
- выбор цвета освещения;
- максимальная яркость освещения 15 000 люкс на одну панель (на расстоянии 25 см от источника света).



FIT D — Климатические камеры с лампами в дверце



FIT S — Климатические камеры с лампами на боковых стенках




FIT DS — Климатические камеры с лампами в дверце и на боковых стенках

Климатические камеры с фитотронной системой обеспечивают контроль температуры, влажности и интенсивности освещения для имитации дневных иочных условий. Стандартный цвет освещения — тип 840. Лампы могут быть установлены в дверце, на боковых стенках или в панелях над полками.

Для выращивания растений предусмотрены специальные светодиодные панели. Так как большинство растений используют лишь часть солнечного света, в них применяются лампы узкого спектра с определенной длиной волны. Максимумы спектра поглощения для хлорофилла А и В — это синий и красный цвета. Хлорофилл поглощает наибольшее количество энергии и значительно влияет на фотосинтез в спектре синего цвета, который увеличивает интенсивность роста. Красный и дальний красный цвета (длина волны 619–720 нм) стимулируют цветение и разрастание.

	KK 115	KK 240	KK 350	KK 400	KK 500	KK 700	KK 750	KK 1200	KK 1450
FIT P	+	+		+	+	+	+	+	+
FIT D	+						+		
FIT S					+	+			
FIT DS				+	+	+			

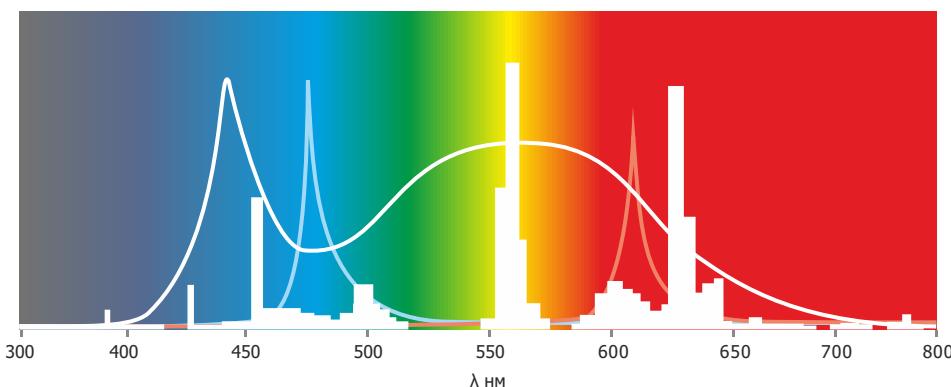

— красный светодиод

— синий светодиод

— белый светодиод

— лампа дневного света 840

## Климатические камеры с фитотронной системой



Исполнение FIT P



Исполнение FIT P LED



Исполнение LED White

Доступные типы ламп:

- стандартные — тип 840 для имитации дневного света;
- ультрафиолетовые лампы для стерилизации воздуха и испытаний на выдержку продуктов питания.

Интенсивность ламп дневного света тип 840:

- 280 мкмоль/м<sup>2</sup>/сек. (на расстоянии 25 см от источника света).

Доступные типы светодиодных модулей:

- глубокий красный — макс. длина волны 660 нм;
- синий — макс. длина волны 470 нм;
- дальний красный — макс. длина волны 740 нм;
- белый — макс. длина волны 440 нм.

Интенсивность освещения светодиодами:

для конфигурации: 2 модуля дальнего красного и 1 синий:

- в 50 см от источника света — 165 (мкмоль/м<sup>2</sup>/сек.);
- в 25 см от источника света — 230 (мкмоль/м<sup>2</sup>/сек.).

для конфигурации: 3 модуля белых светодиодов:

- в 50 см от источника света — 135 (мкмоль/м<sup>2</sup>/сек.);
- в 25 см от источника света — 190 (мкмоль/м<sup>2</sup>/сек.).

### Исполнение FIT P

Климатические камеры с панелями освещения над полками. В зависимости от модели камеры может быть установлено от 1-й до 3-х панелей. Стандартно используются лампы дневного света типа 840. Исполнение FIT P включает одну панель освещения над полкой и разъемы для установки дополнительных панелей (заказываются отдельно). Опция FIT/R3 позволяет независимо регулировать интенсивность освещения для каждой панели.

KK 115      KK 240      KK 400      KK 500      KK 700      KK 750      KK 1200      KK 1450



стандартно	1	1	1	1	1	1	1	1
максимально*	1	2	2	3	3	3	3	3
макс. интенсивность освещения на полке	испол. FIT	5000	10000	15000	15000	15000	15000	15000



\* макс. кол-во панелей освещения над полками в камере

### Исполнение FIT P LED

Пользователь может выбрать цвет и интенсивность освещения для каждого сегмента программы. Цветные модули можно комбинировать, например, дальний красный и синий. Предусмотрена регулировка яркости. Такая гибкость обеспечивает оптимальный режим освещения для каждого вида растений. Светодиодные модули долговечны (сохраняют до 90% номинальной эффективности после 25 000 часов работы). Уникальная оптика обеспечивает равномерное освещение каждого растения. Светодиодные модули имеют очень низкое тепловыделение, что упрощает поддержание стабильной температуры в камере.

Климатические камеры с ультразвуковым увлажнителем — это профессиональные и надежные устройства, которые гарантируют точное и стабильное поддержание заданных условий. Максимальная температура 60°C позволяет применять их для проращивания семян, выращивания грибов и растений, а также для испытаний продуктов питания. Стабильность климатических условий позволяет проводить испытания устойчивости лекарственных препаратов, косметики, упаковки и электроники.

В ультразвуковом увлажнителе используются пьезоэлектрические генераторы, преобразующие электрическую энергию в механическую энергию вибраций. Генераторы, погруженные в деионизированную воду, распыляют ее на мельчайшие капли, которые равномерно распределяются по камере.

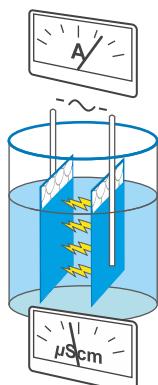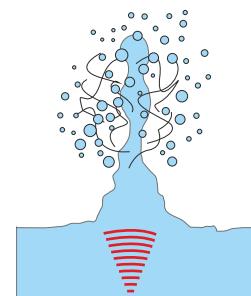


Климатические камеры KKS с паровым увлажнителем не излучают ультразвук, поэтому подходят для разведения насекомых (например, дрозофил обыкновенных). В отличие от камер KK они имеют более широкий диапазон температур и влажности, что позволяет использовать их для испытаний электроники, пластмасс и строительных материалов.

Паровой увлажнитель состоит из двухэлектродного нагревателя, погруженного в водопроводную воду. При подаче напряжения на электроды вода начинает проводить поток электрических зарядов между ними. Согласно первому закону Джоуля, рассеяние электрической энергии ведет к росту температуры. После того как вода закипит, образуется поток пара, который поступает в камеру.

Климатические камеры KK и KKS можно использовать для испытаний устойчивости лекарственных препаратов в соответствие с ICH Q1A.

Параметры	Климатические камеры KK с ультразвуковым увлажнителем	Климатические камеры KKS с паровым увлажнителем
Диапазон температур	-10°C... +60°C FIT	-10°C... +100°C -10°C... +60°C (от +10 до +50°C при включенном освещении)
Диапазон относительной влажности	поле A	поле A+B
Подаваемая вода (проводимость)	деионизированная ( $\leq 1 \text{ мкСм/см}$ )	водопроводная (125–1 250 мкСм/см)
Water source	<ul style="list-style-type: none"> <li>● контейнер для деионизированной воды</li> <li>● деионизатор</li> <li>● внутренняя сеть деионизированной воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● водопровод</li> <li>● контейнер для водопроводной воды</li> </ul>

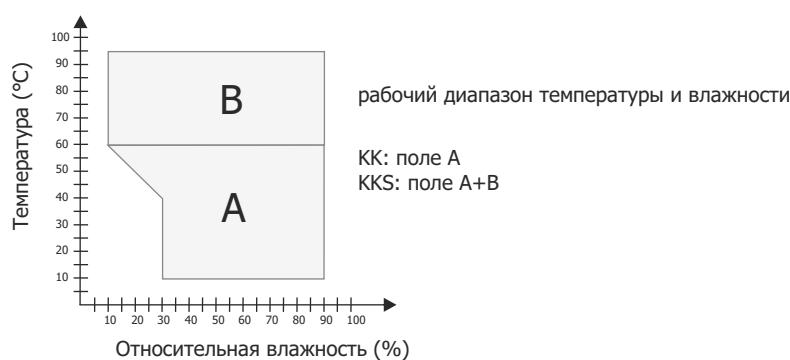

## Климатические камеры с ультразвуковым увлажнителем

	KK 115	KK 240	KK 350	KK 400	KK 500	KK 700	KK 750	KK 1200	KK 1450	
<b>Параметры</b>										
циркуляция воздуха	принудительная									
объем камеры (л)	112	245	335	424	493	625	749	1365	1467	
рабочий объем (л)	112	245	335	424	386	450	749	1229	1307	
тип дверцы	двойная (сплошная внешняя, стеклянная внутренняя) / стеклянная внешняя (опция)									
диапазон температур (°C)	испол. FIT	от -10 до +60°C (с включенным освещением от +10 до +50°C)								
дискретность показ. темп. (°C)		0,1								
диапазон относ. влажности (%)		30...90 (подробнее см. в таблице рабочей температуры и влажности на с. 64)								
дискретность показ. влажн. (%)		1								
контроллер		микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем								
материал камеры		кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301								
материал корпуса	-	лист с порошковой покраской								
	INOX/G	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани								
габариты <sup>1</sup> (мм)	A ширина	650	810	640	1020	630	730	1250	1460	1440
	B высота	1160	1600	2000	1840	1990	2000	2000	1990	1970
	C глубина	960	1000	980	1000	1040	1070	1100	1070	1170
внутренние размеры (мм)	D ширина	460	600	500	800	510	600	1040	1310	1340
	D' ширина	-	-	-	-	510	600	-	1310	1340
	E высота	540	800	1340	1040	1510	1510	1200	1510	1460
	F глубина	450	510	500	510	640	690	600	690	750
	I высота	-	-	1270	-	1380	1360	-	1360	1300
макс. нагрузка на полку <sup>2</sup> (кг)	10	10	10	10	20	30	-	30	30	
	испол. PW <sup>3</sup>	50	100	100	100	100	100	100	100	
макс. нагрузка на изделие (кг)	60	90	100	120	100	150	140	300	300	
номинальная мощность (Вт)	1000	1500	1400	2000	1600	1600	2500	2200	2200	
	испол. FIT	1200	1800	2600	2300	2000	2000	2900	3000	3000
масса (кг)	90	140	125	185	130	170	275	220	230	
защита от перегрева	класс 3.3 по DIN 12880									
электропитание*	230 В 50 Гц									
кол-во полок (установлено/макс.)	2/7	3/10	3/11	3/14	3/11	3/11	5/16	2 x 3/11	2 x 3/11	
срок гарантии	24 месяца									
изготовитель	POL-EKO-APARATURA									

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - габариты для изделий без опции FIT, глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

2 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

3 - усиленные полки

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).

### Опции и принадлежности



## Климатические камеры с паровым увлажнителем

	KKS 115	KKS 240	KKS 400	KKS 750			
<b>Параметры</b>							
циркуляция воздуха		принудительная					
объем камеры (л)	112	245	424	749			
рабочий объем (л)	112	245	424	749			
тип дверцы	двойная (сплошная внешняя, стеклянная внутренняя) / стеклянная внешняя (опция)						
диапазон температур (°C)	-	-10...+100					
FIT version	от -10 до +60 °C (с включенным освещением от +10 до +50°C)						
дискретность показ. темп. (°C)	0,1						
диапазон относ. влажности (%)	10...90 (подробнее см. в таблице рабочей температуры и влажности на с. 64)						
дискретность показ. влажн. (%)	1						
контроллер	микропроцессорный с внешним графическим ЖК-дисплеем						
материал камеры	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301						
материал корпуса	-	лист с порошковой покраской					
	INOX/G	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани					
габариты <sup>1</sup> (мм)	A ширина	650	810	1020			
	B высота	1160	1600	1840			
	C глубина	960	1000	1000			
внутренние размеры (мм)	D ширина	460	600	800			
	E высота	540	800	1040			
	F глубина	450	510	510			
макс. нагрузка на полку <sup>2</sup> (кг)	-	10	10	10			
	испол. PW <sup>3</sup>	50	100	100			
макс. нагрузка на изделие (кг)		60	90	120			
номинальная мощность (Вт)	-	2000	2200	3475			
	испол. FIT	2050	2520	3625			
масса (кг)		103	140	185			
защита от перегрева	класс 3.3 по DIN 12880						
электропитание*	230 В 50 Гц						
кол-во полок (установлено/макс.)	2/7	3/10	3/14	5/16			
срок гарантии	24 месяца						
изготовитель	POL-EKO-APARATURA						

Все указанные выше технические данные относятся к стандартным изделиям (без опциональных принадлежностей).

\* - также доступны исполнения на 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц

1 - габариты для изделий без опции FIT, глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура

2 - при равномерном распределении нагрузки по поверхности

3 - усиленные полки

Полная информация по стабильности и однородности температуры приведена на сайте [www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu).


### Опции и принадлежности




Климатические камеры

KK


KK/KKS 115/240/400/750

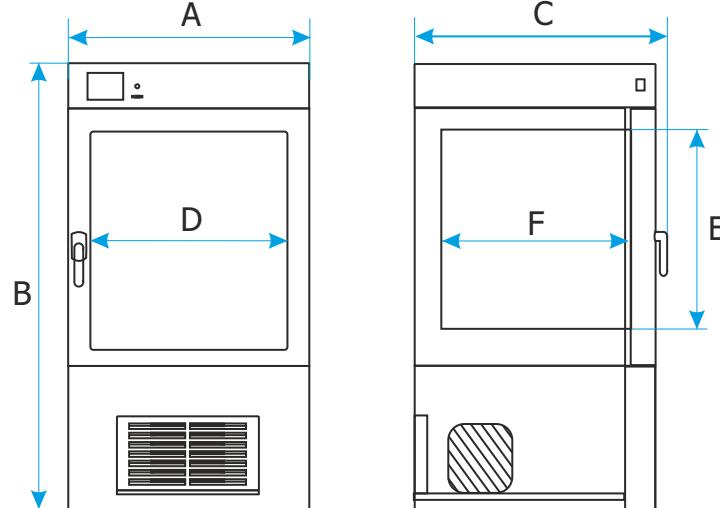

KK 350

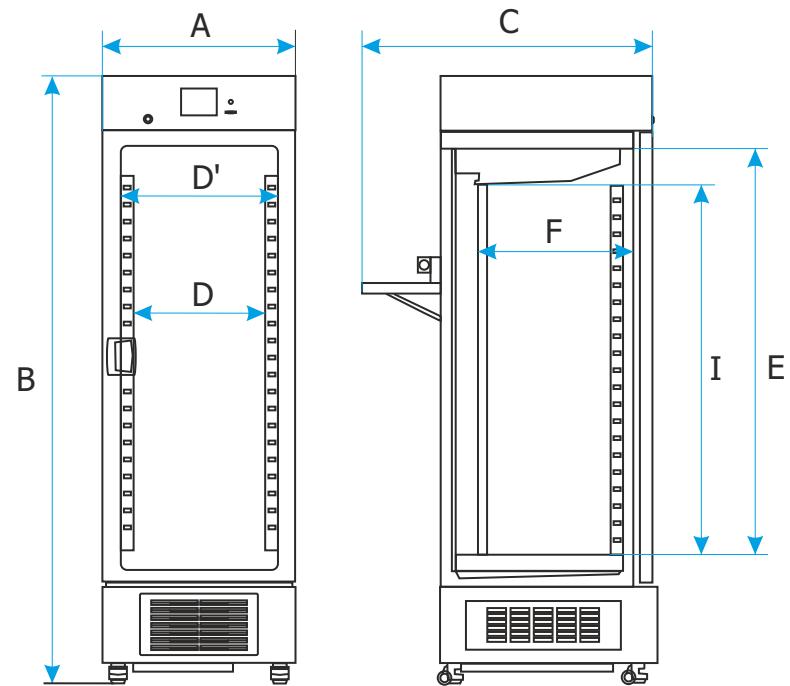

KK 500/700/1200/1450

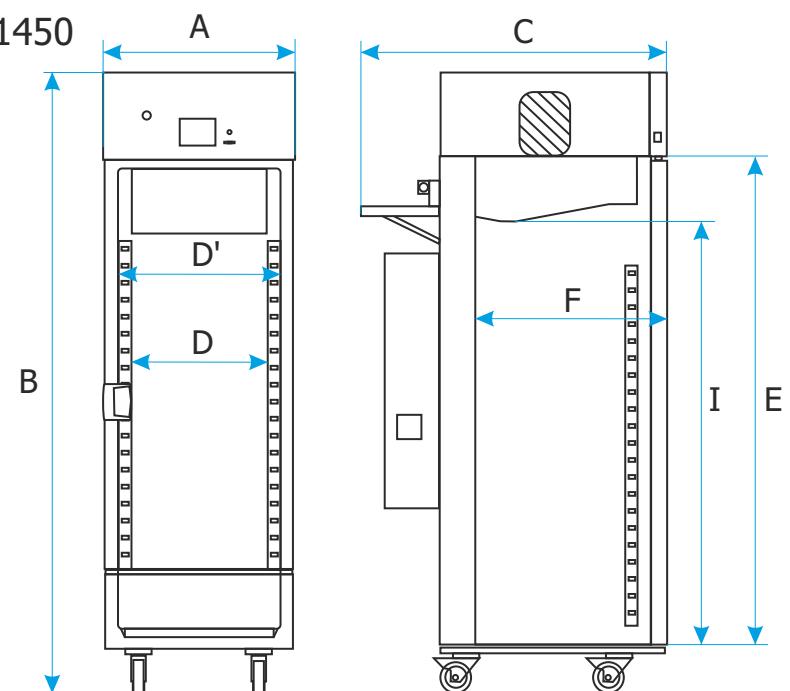

## Климатические камеры с паровым увлажнителем (KKS) с системой обратного осмоса для подготовки воды



рабочий диапазон температуры и влажности

KK: поле А

KKS: поле А+В



Отличия климатических камер POL-EKO, включая требования к питающей воде:

Параметр		Для камеры KK с ультразвуковым увлажнителем	Для камеры KKS с паровым увлажнителем
Диапазон температур	стандартно	От -10 до +60 °C	От -10 до +100 °C
	С FIT системой	При выключенном освещении: От -10 до +60 °C При включенном освещении: От +10 до +50 °C	
Диапазон отн. влажности (см. рис.)		Только поле А	Поле А + поле В
Питающая вода		Деионизованная, УЭП не более 5 мкСм/см	Подготовленная водопроводная, УЭП от 125 до 1250 мкСм/см
Источник воды		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Контейнер с деионизированной водой</li> <li>- Деионизатор</li> <li>- Сеть распределения деионизированной воды</li> </ul>	Система подготовки воды

## Программное обеспечение

### ► EasyLab Basic

С помощью программного обеспечения EasyLab Basic пользователь может легко загрузить данные из внутренней памяти устройства в компьютер. Базовая версия EasyLab доступна для бесплатной загрузки с веб-сайта [www.polekolab.com](http://www.polekolab.com). Для непрерывной записи регистрируемых данных на компьютер, а также создания графиков и статистических отчетов, необходимо приобрести профессиональную версию EasyLab.



Загруженные данные

### ► Программное обеспечение TOP+ Control

Программное обеспечение TOP+ Control разработано для конфигурирования сложных программ. Кроме того, пользователь может с легкостью программировать изделия исполнения TOP+ и управлять ими из любой точки мира с помощью доступа к устройству через Интернет.



Состояние устройства

### ► EasyLab Professional

Программное обеспечение EasyLab Professional предназначено для мониторинга температуры и влажности в любом терmostатирующем оборудовании производства компании POL-EKO-APARATURA.


Пользователь может записывать постоянные или временные значения, накапливать их и представлять в виде графиков. Процесс записи происходит через порт RS 232 или USB (вместе с программным обеспечением необходимо приобрести соединительный кабель). Если изделие оборудовано дополнительным датчиком температуры Pt 100, программное обеспечение EasyLab Professional позволяет одновременно записывать его показания. Также ПО EasyLab Professional позволяет программировать изделия исполнения TOP+ благодаря наличию встроенного приложения TOP+ Control.

EasyLab Professional включает мощные инструменты для построения графиков и аппроксимации. Стандартный функционал ПО EasyLab Professional:

- report creator data
- импорт данных с накопителей;
- выбор языка: английский, эстонский, французский, немецкий, венгерский, латвийский, польский, португальский, румынский, русский, испанский.



Статистический отчет

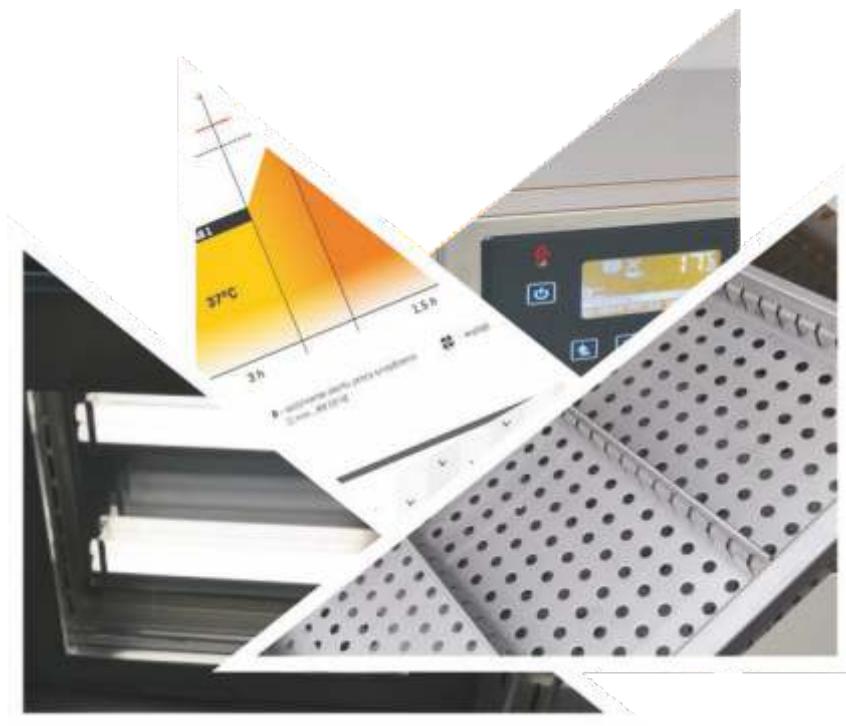

**ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.  
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ**

## Опции и принадлежности



**Внутренняя стеклянная дверца**  
Стандартное оснащение для моделей CL/IL/KK.  
Опционально доступно для моделей ST/CHL. Код  
заказа: \*/C (опция устанавливается на заводе-  
изготовителе).



**Внешняя стеклянная дверца**  
Опционально доступно для моделей ST/CHL и  
моделей KK 500, 700, 1200, 1450.  
Код заказа: \*/A (опция устанавливается на заводе-  
изготовителе).



**Дверца со смотровым окном**  
Опционально доступно для линейки CL/IL/SL/SR  
(кроме CL/SL 15, 32) и для моделей  
KK 115, 240, 400, 750.  
Код заказа: \*/A (опция устанавливается на заводе-  
изготовителе). Для линейки SL максимальная  
температура будет снижена до +250°C



**Внутренняя розетка**  
Опционально доступно для линейки  
ST/CHL/CL/IL/KK.  
Для линейки CL/IL максимальная температура будет  
снижена до +70°C.  
Код заказа: GNZ (опция устанавливается на заводе-  
изготовителе). Внутренняя розетка позволяет  
установить дополнительное оборудование внутри  
камеры (например, лабораторный шейкер). Макс.  
пиковая нагрузка на розетку — 200 Вт



**Внутреннее освещение**  
Стандартное оснащение для моделей ST/CHL.  
Опционально доступно для всех изделий.  
Код заказа: OWW  
(опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Внутреннее освещение включает одну точку.  
Включается пользователем при помощи клавиши  
ввода на передней панели. Эта опция не позволяет  
имитировать смену дня и ночи (см. опции FIT и FOT).  
Максимальная рабочая температура устройства  
будет снижена до +70°C, для линейки SL/SR — до  
+250°C.

## Опции и принадлежности


### Проволочные полки

Стандартное оснащение для моделей ST/CHL BASIC. Опционально доступно для моделей ST/CHL BASIC. Код заказа: \*/P. Проволочные полки изготовлены из стали с пластиковым покрытием. Поставляются с направляющими.



### Перфорированные полки

Стандартное оснащение для моделей ZLW-T. Опционально доступно для линейки ST/CHL/CL/IL/SL/SR/KK и модели ZLN 85. Код заказа: \*/PP. Перфорированные полки поставляются с направляющими. По запросу глубина полок может быть различной.

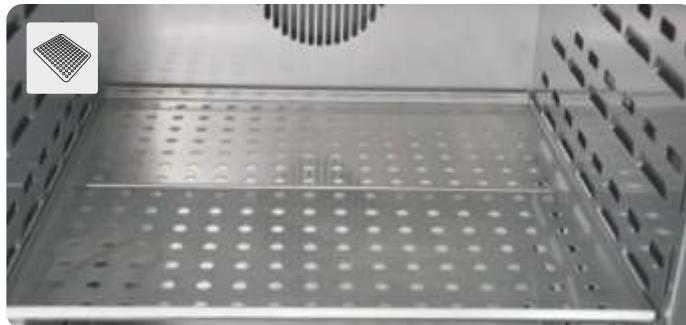

### Сплошная полка с отверстием

Стандартное оснащение для моделей ZLN-T. Код заказа: \*/PO. Полки поставляются с направляющими.



### Проволочные полки из нержавеющей стали INOX

Стандартное оснащение для линейки CL/IL/SL/SR/KK, модели ZLN 85 и моделей ST/CHL COMF и PREM. Опционально доступно для перечисленных выше изделий. Код заказа: \*/P INOX. Проволочная полка INOX изготовлена из нержавеющей стали. Поставляются с направляющими.



### Усиленные полки


Стандартное оснащение для моделей CL/IL/SL 750 и 1000, а также для всех моделей CL/IL/SL в усиленном исполнении (код заказа: \*/W). Опционально доступно для линейки CL/IL/SL/SR/ST/CHL/KK и моделей ZLN-T. Код заказа: \*/PW. Усиленные полки поставляются с направляющими. Максимальные нагрузки на полку и на изделие указаны в таблицах с параметрами соответствующих линеек изделий.




## Опции и принадлежности




**Усиленное исполнение**  
Стандартно для моделей CL/SL 1000.  
Опционально доступно для линейки CL/IL/SL и  
моделей ZLN-T 200, 300.  
Код заказа: \*/W (опция устанавливается на заводе-  
изготовителе). Усиленное исполнение изделия  
позволяет помещать в камеру тяжелые предметы.  
Включает усиленную конструкцию камеры и усилен-  
ные полки. Позволяет избежать повреждения устро-  
йства из-за большой нагрузки. Максимальные  
нагрузки на полку и на изделие указаны в таблицах с  
параметрами соответствующих линеек изделий. В  
случае поставки усиленного исполнения изделия  
вместо проволочных полок комплектуются усиленные  
полки.

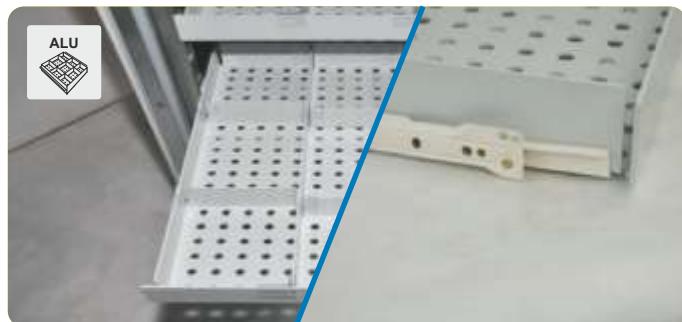

**Алюминиевый выдвижной ящик с направляющими из  
крашеного листа**  
Опционально доступно для моделей ST/CHL.  
Код заказа: ST/CHL SWP ALU. Ящик изготовлен из  
алюминия, глубина 6 см. Поставляется с набором  
выдвижных направляющих из стали с порошковой  
окраской (2 отсека в ширину и 2 в длину).

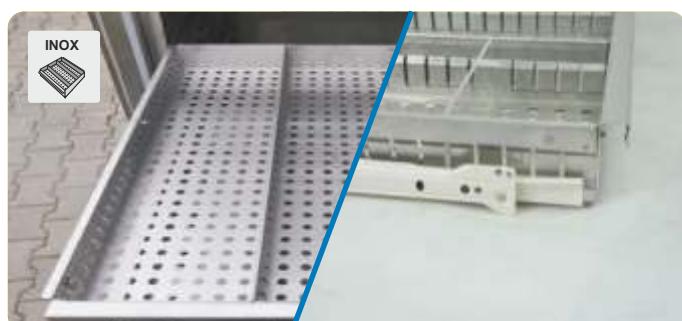

**Выдвижной ящик из нержавеющей стали с  
направляющими из крашеного листа**  
Опционально доступно для моделей ST/CHL. Код  
заказа : ST/CHL SWP INOX. Ящик изготовлен из  
нержавеющей стали, глубина — 6 см. Поставляется с  
набором выдвижных направляющих из стали с  
порошковой окраской (2 отсека в ширину и 2 в длину).

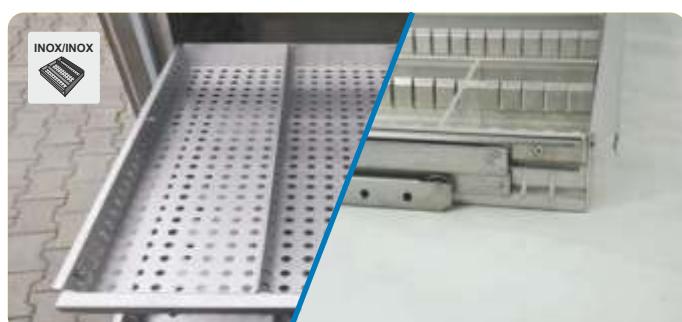

**Выдвижной ящик с направляющими, полностью из  
нержавеющей стали**  
Опционально доступно для моделей ST/CHL.  
Код заказа ST/CHL SWPN INOX.  
Ящик изготовлен из нержавеющей стали, глубина — 6  
см. Поставляется с набором выдвижных  
направляющих из нержавеющей стали (2 отсека в  
ширину и 2 в длину).



**Органайзер для лекарственных средств**  
Опционально доступно для ST/CHL 2/3/4/5/6.  
Состоит из 4 ящиков.  
Код заказа: ORG-FARM

#### Поддоны из нержавеющей стали

Опционально доступно для всех продуктовых линеек.

Код заказа: KUW.

Поддоны из нержавеющей стали можно поместить на полки.

Доступны различные размеры.



#### Фотопериодическая система

Опционально доступно для моделей ST BASIC, COMF, PREM и исполнения IL STD. Код заказа: \*/FOT (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Фотопериодическая система обеспечивает имитацию дня/ночи.



#### Фитотронная система

Дополнительная опция для линейки KK, IL исполнение TOP+ и моделей ST 500-1450 PREM TOP+.

Код заказа: \*/FIT (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Фитотронная система обеспечивает имитацию дня и ночи с плавной регулировкой освещения (по 1%).



#### Дополнительный датчик температуры Pt100

Опционально доступно для линейки CL/IL/SL/SR/KK и исполнения ST/CHL PREM TOP+. Код заказа: Pt 100 (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Опция включает дополнительный датчик температуры и разъем датчика. Значения дополнительного датчика отображаются на дисплее. При наличии дополнительного датчика Pt 100 в меню устройства можно выбрать первичный и вторичный датчик. При этом устройство может работать по температуре образца, в который помещен дополнительный датчик Pt 100.

Датчик может быть поставлен с аттестатом.



#### Колесики

Стандартное оснащение для ZLN-T 300, ST/CHL 1200, 1450; CL/IL/SL/SR 750, 1000; IL 400; и линейки KK.

Опционально доступно для всех продуктовых линеек.

Код заказа: QLK\* (опция устанавливается на заводе-изготовителе).



## Опции и принадлежности



### Программное обеспечение EasyLab Professional

Опционально доступно для всех продуктовых линеек. Код заказа: EasyLab Professional. Все термостатирующие устройства производства компании POL-EKO-APARATURA оснащаются интерфейсом RS232 и портом USB для подключения к компьютеру. Программное обеспечение EasyLab Professional позволяет записывать значения температуры и (или) влажности. Данные (день, время, значения температуры/влажности) можно передать на компьютер и отобразить форме таблицы, которую затем можно использовать для построения графиков и статистических отчетов. Данные можно сохранить или экспорттировать в формат .xls.



### Матричный принтер

Опционально доступно для всех продуктовых линеек. Код заказа: EPSON. Предназначен для печати текущей температуры, времени и даты. Интервал печати можно настроить в меню устройства. Для данной опции необходимо приобрести RSK (ПК и соединительный кабель принтера).



### Термический принтер

Опционально доступно для всех продуктовых линеек. Код заказа: KAFKA. Термический принтер предназначен для печати текущей температуры, времени и даты. Интервал печати можно настроить в меню устройства. Для данной опции необходимо приобрести RSK (ПК и соединительный кабель принтера).



### Воздушный HEPA-фильтр

Опционально доступно для линейки CL/SL/SR. Код заказа: HEPA (опция устанавливается на заводе-изготовителе). HEPA-фильтр устанавливается на входе воздуха в камеру.



### Стол с колесиками

Дополнительная опция для моделей ST/CHL 1-3; ZLN 85, CL/SL 15, 32; CL/IL/SL/SR 53-240. Код заказа: \*/S (с порошковой окраской) или \*/S INOX (из нержавеющей стали). Стол с колесиками обеспечивает максимальное удобство при использовании нашей продукции. Мы предлагаем широкий ассортимент столов с колесиками. По запросу доступны различные размеры столов. Пользователь может выбрать наиболее подходящую высоту.

#### Основание на поворотных колесиках

Дополнительная опция для ST/CHL 1, 2, 3; ZLN 85, CL/SL 15, 32; CL/IL/SL/SR 53, 115, 240.

Код заказа: \*/ST, \*/ST INOX

Высота и размеры могут быть выбраны индивидуально.



#### Кабель RS 232/ RS 422/ RS 485

Опционально доступно для всех продуктовых линеек. Код заказа: RSK.

Кабель RS 232 — кабель для подключения к ПК или принтеру.

Кабель RS 422 — кабель для подключения к ПК.

Этот кабель необходим для подключения ПК к устройству с интерфейсом RS 485.

Стандартная длина кабеля: 5 м.



#### USB-кабель

Опционально доступно для всех продуктовых линеек кроме исполнения TOP+.

Код заказа: USBK.

Этот кабель необходим для подключения ПК к устройству через порт USB.

Стандартная длина кабеля: 5 м.



#### Интерфейс RS 422 / интерфейс RS 485

Опционально доступно для всех продуктовых линеек. Код заказа: RS422 или RS485 (опция устанавливается на заводе-изготовителе). Опция включает адаптер с RS 232 (стандартно встроен в устройство) на RS 422 или RS 485. Позволяет подключить к компьютеру несколько единиц оборудования.



#### Контейнер для отработанной воды

Стандартное оснащение для линейки KK.

Опционально доступно для линейки KK.

Код заказа: KK/K.

Пластиковый контейнер для слива отработанной воды из камеры. Необходимо при отсутствии линии слива по месту установки устройства.



## Опции и принадлежности



### Контейнер для деионизированной воды

Стандартное оснащение для линейки КК.

Опционально доступно для линейки КК.

Код заказа: KK/Z.

Пластиковый контейнер для деионизированной воды необходим для правильной работы изделий КК. Контейнер требуется, если камера не подключена напрямую к деионизатору.



### Датчик низкого уровня воды

Опционально доступно для линейки КК. Код заказа:

KK/CP (опция устанавливается на заводе-изготовителе). При падении уровня воды ниже допустимого включается аварийный сигнал.



### Самописец на круговой бумаге

Опционально доступно для моделей

ST/CHL 500, 700, 1200, 1450.

Код заказа: \*/RK (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Встроенный самописец для непрерывной регистрации температуры с батарейным резервированием электропитания, который работает даже во время сбоев питания. Поставляется с начальным пакетом из 100 листов диаграммной бумаги.



### Магнитный дверной замок

Опционально доступно для моделей ST/CHL 500,

700, 1200, 1450.

Код заказа: \*/ZKM (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Магнитный дверной замок поставляется с набором карт доступа, состоящим из 5 шт. Считыватель RFID-карт обеспечивает быстрый доступ к камере (для открытия двери необходимо поднести карту к считывателю). Доступ будет ограничен только авторизованному персоналу (держателям карт).



### Независимый контроль панелей FIT

Дополнительная опция для устройств, оснащенных системой FIT и имеющих не менее двух панелей освещения над полками.  
Код заказа: FIT/R3 (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Опция позволяет раздельно регулировать интенсивность освещения 2-х или 3-х панелей над полками (например, 100% для одной панели и 50% для другой).



### Функция автоматического размораживания

Стандартная функция для линейки KK.  
Опционально доступно для линеек ST/CHL/IL.  
Код заказа: \* PLUS (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Пользователь может программировать периодичность и время разморозки. Разморозка выполняется, когда устройство работает. Современная технология позволяет поддерживать стабильную температуру в камере, которая повышается на меньшую величину, чем при открытии дверцы.



### Расширенный диапазон температур ST/70

Стандартно для моделей ST PREM TOP+.  
Опционально доступно для ST в исполнениях BASIC, COMF и PREM.  
Код заказа: ST/70 (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Расширение диапазона температур до +70°C (стандартный диапазон температур ST в исполнениях BASIC, COMF и PREM: от +3 до +40°C).



### Низкотемпературное исполнение

Опционально доступно для моделей CHL 500, 700, 1200 и линейки IL.  
Код заказа: \*/T (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Обеспечивает расширение диапазона температур до -10°C (стандартный диапазон температур начинается с 0°C).



### Калибровка камеры

Опционально доступно для всех продуктовых линеек.  
Коды заказа: BRT/9/L, BRT/1P/L, BRT/2P/L, IQ, OQ, PQ (аттестация выполняется на заводе-изготовителе).  
Включает измерения в 9 точках камеры (по углам + геометрический центр), либо в 5 точках каждой полки (по углам + геометрический центр).  
Значения температуры указываются заказчиком.  
Аттестация IQ, OQ, PQ также может быть выполнена для каждой камеры отдельно (подробнее см. на с. 10).



### Измерение влажности

Опционально доступно для линейки CL/IL/KK и моделей ST/CHL PREM TOP+.  
Код заказа: PHR (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Эта опция обеспечивает не регулирование, а измерение влажности. Пользователь может просматривать значения влажности на дисплее изделия.



### Контроль скорости вентилятора

Стандартно для ST/CHL PREM TOP+  
Опционально доступно для моделей ST/CHL BASIC, COMF, PREM.  
Код заказа: ST/CHL WENT (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Позволяет контролировать скорость вентилятора в диапазоне от 50% до 100% независимо для каждого сегмента программы.



### Счетчик открытых дверцы

Опционально доступно для всех продуктовых линеек.  
Код заказа: LOD (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Считает количество открытых дверцы во время выполнения программы.




### Нестандартный порт доступа

Опционально доступно для всех продуктовых линеек.  
Код заказа: OCZ/N (опция устанавливается на заводе-изготовителе).  
Диаметр и расположение по запросу заказчика.

## Температурная защита


### Класс защиты от перегрева 1.0 и 2.0 по DIN 12880

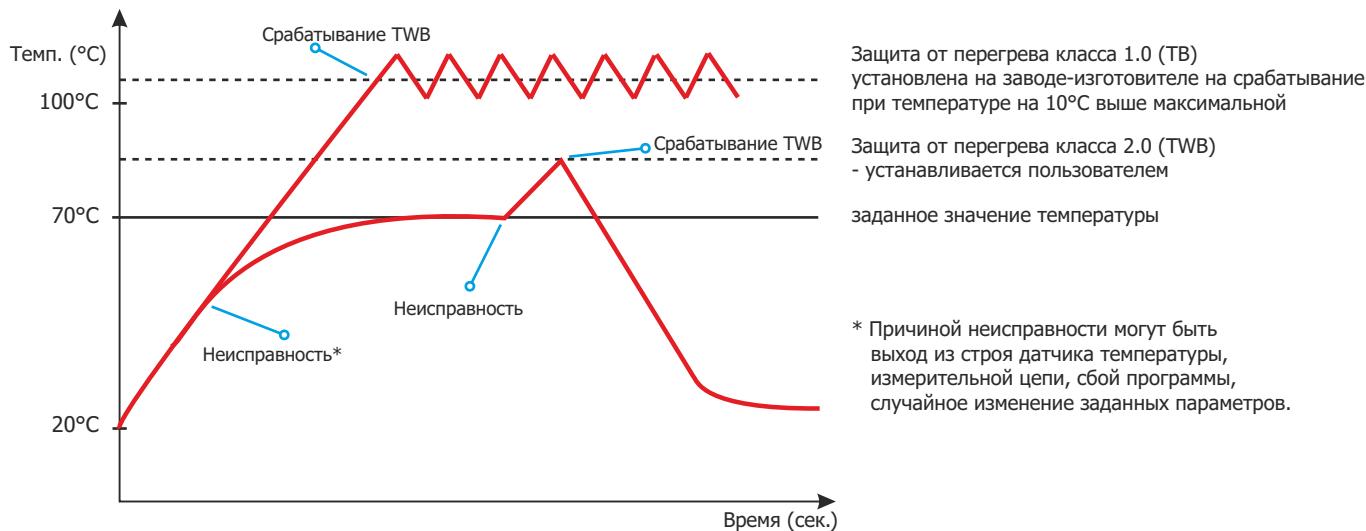

Защита от перегрева класса 1.0 по DIN 12880 стандартно устанавливается в изделия моделей ST/CHL/CL/IL/SL/SR/KK. Установлена на заводе-изготовителе на срабатывание при температуре приблизительно на 10°C выше максимальной. Защита от перегрева класса 2.0 по DIN 12880 стандартно устанавливается в изделия моделей CL/IL/SL/SR исполнения STD и моделей ST/CHL исполнения PREM. Для данного класса защиты температура срабатывания устанавливается пользователем. При превышении заданной температуры программа отключает питание нагревателей. Для возобновления работы необходимо отключить и снова включать электропитание изделия.

DIN  
3.1

### Класс 3.1 по DIN 12880 — защита от перегрева

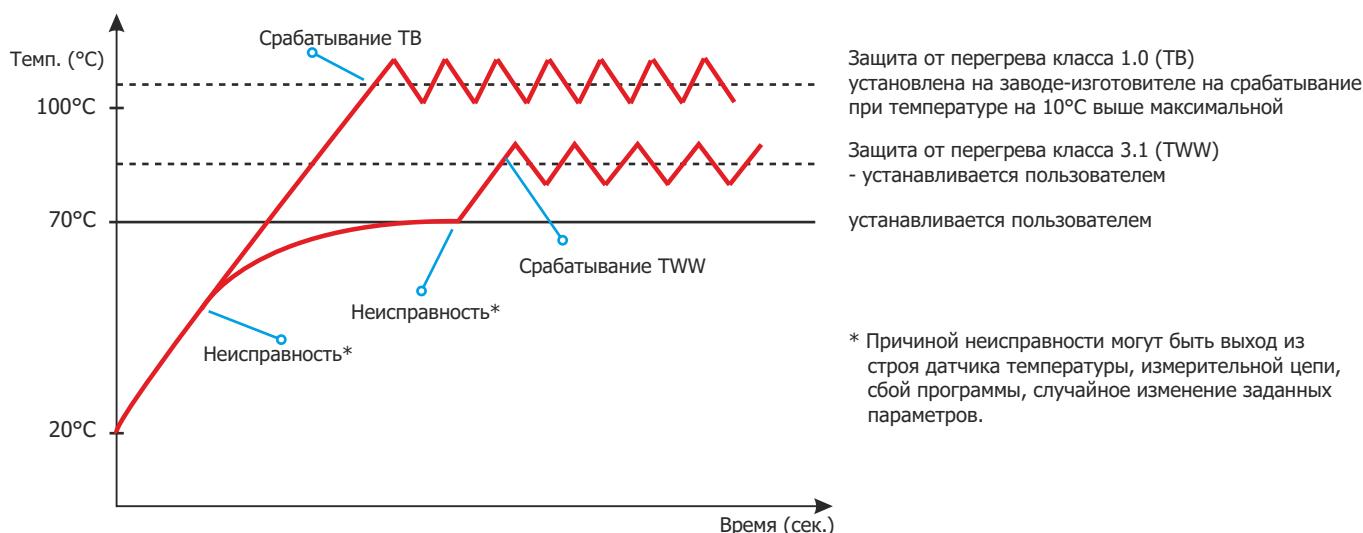

Защита от перегрева класса 3.1 по DIN 12880 стандартно устанавливается в изделия моделей CL/SL исполнения TOP+, дополнительно может устанавливаться в изделия линеек CL/SL/SR исполнения STD. Код заказа: \*/3.1 (опция устанавливается на заводе-изготовителе). Для данного класса защиты температура срабатывания устанавливается пользователем. При превышении заданной температуры программа отключает питание нагревателей. Когда температура понижается до установленного значения, изделие возобновляет работу автоматически.

## Опции и принадлежности

	ST		CHL		ZL	CL		IL		SL		SR	KK
	P	TOP+	P	TOP+	P	STD	TOP+	STD	TOP+	STD	TOP+	STD	TOP+
	Внутренняя стеклянная дверца Код заказа: */C	✓	✓	✓	✓	—	S	S	S	—	—	—	S
	Внешняя стеклянная дверца Код заказа: */A	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓
	Дверца со смотровым окном Код заказа: */A	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Проволочные полки Код заказа: */P	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Проволочные полки из нержавеющей стали Код заказа: */P INOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Перфорированные полки Код заказа: */PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Сплошная полка с отверстием Код заказа: */PO	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
	Усиленные полки Код заказа: */PW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Поддоны из нержавеющей стали Код заказа: KUW GN*/*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Алюминиевый выдвижной ящик с направляющими из крашеного листа Код заказа: ST/CHL/SWP ALU	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Выдвижной ящик из нержавеющей стали с направляющими из крашеного листа Код заказа : ST/CHL/SWP INOX	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Выдвижной ящик с направляющими, полностью из нержавеющей стали Код заказа : ST/CHL/SWPN INOX	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Органайзер для лекарственных средств Код заказа: ORG-FARM	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Колесики Код заказа: QLK*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S
	Стол с колесиками Код заказа: */S or */S INOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Основание на поворотных колесиках Код заказа: */ST or */ST INOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Функция автоматического размораживания Код заказа: *PLUS	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	S
	Низкотемпературное исполнение Код заказа: */T	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—
	Расширенный диапазон температур до 70°C Код заказа: ST/70	✓	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Усиленное исполнение Код заказа: */W	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	Внутреннее освещение Код заказа: OWW/LED	S	S	S	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	Контроль скорости вентилятора Код заказа: ST/CHL WENT	✓	S	✓	S	—	S	S	S	S	S	S	S
	Фитотронная система Код заказа: */FIT	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓
	Фотопериодическая система Код заказа: */FOT	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
	Независимый контроль панелей FIT Код заказа: FIT/R3	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓
	Счетчик открываний дверцы Код заказа: LOD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Температурная защита

DIN  
3.2

### Класс 3.2 по DIN 12880 — защита от понижения температуры




Защита от понижения температуры класса 3.2 по DIN 12880 стандартно устанавливается в модели CHL исполнения PREM TOP+, опционально – в модели CHL исполнений BASIC, COMF, PREM; ZL COMF и PREM.  
Код заказа: \*/3.2 (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Для данного класса защиты температура срабатывания устанавливается пользователем. При превышении заданной температуры программа отключает питание компрессора. Когда температура повысится до установленного значения, изделие возобновляет работу автоматически.

DIN  
3.3

### Over/under temperature protection class 3.3 according to DIN 12880

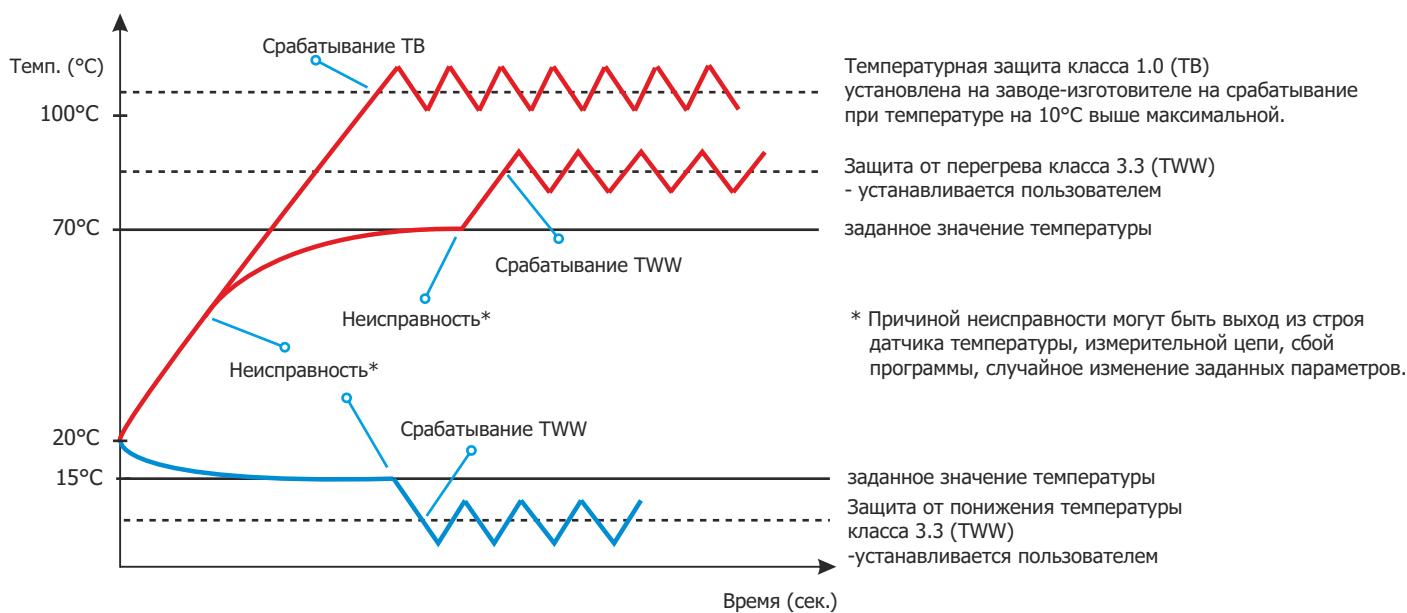

Защита от перегрева/понижения температуры класса 3.3 по DIN 12880 стандартно устанавливается в изделиях KK, ST PREM TOP+ и IL в исполнении TOP+. Опционально доступно для моделей ST BASIC, COMF, PREM и IL в исполнении STD. Код заказа: \*/3.3 (опция устанавливается на заводе-изготовителе).

Для данного класса защиты температура срабатывания устанавливается пользователем. При превышении заданной температуры или уменьшении ниже заданной температуры программа отключает питание нагревателей или компрессора. Когда температура возвращается в допустимый диапазон, изделие возобновляет работу автоматически.

## Опции и принадлежности

	ST		CHL		ZL	CL		IL		SL		SR	KK
	P	TOP+	P	TOP+	P	STD	TOP+	STD	TOP+	STD	TOP+	STD	TOP+
	Дополнительный датчик температуры Код заказа: PT 100	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Внутренняя розетка Код заказа: GNZ	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—
	HEPA — фильтр свежего воздуха Код заказа: HEPA	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	✓	✓	—
	Измерение влажности Код заказа: PHR	—	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓
	Нестандартный порт доступа для внешнего датчика Код заказа: OCZ/N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Контейнер для деионизированной воды Код заказа: KK/Z	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	Контейнер для отработанной воды Код заказа: KK/K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	Датчик низкого уровня воды Код заказа: KK/CP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	Интерфейс RS 422 (вместо RS 232) Код заказа: RS422	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Интерфейс RS 485 (вместо RS 232) Код заказа: RS485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Кабель RS 232 Код заказа: RSK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Кабель RS 422 Код заказа: RSK/422	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Кабель RS 485 Код заказа: RSK/485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	USB-кабель Код заказа: USBK	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—
	Матричный принтер Код заказа: EPSON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Термический принтер Kafka Код заказа: KAFKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Программное обеспечение EasyLab - Professional Код заказа : EasyLab Professional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Калибровка и аттестация IQ, OQ, PQ Код заказа: BRT/*/L или IQ/OQ/PQ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Класс защиты от перегрева 3.1 по DIN 12880 Код заказа: */3.1	—	—	—	—	—	✓	S	—	—	✓	S	✓
	Класс защиты от перегрева 3.2 по DIN 12880 Код заказа: */3.2	—	—	✓	S	✓	—	—	—	—	—	—	—
	Класс защиты от перегрева 3.3 по DIN 12880 Код заказа: */3.3	✓	S	—	—	—	—	—	✓	S	—	—	S
	Самописец на круговой бумаге Код заказа: */RK	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	Магнитный дверной замок Код заказа: ZKM	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—

✓ - опция доступна

— - опция недоступна

S - стандартное оснащение P -BASIC, COMFORT, PREMIUM

## Описание параметров

### Функция размораживания

Размораживание выполняется автоматически, но пользователю необходимо вручную запустить разморозку в наиболее удобное время (например, когда в камере отсутствуют образцы). При размораживании температура внутри камеры повышается примерно на 20–30 °C, поэтому размораживание не может осуществляться при штатной работе изделия (во избежание нарушения стабильности температуры в камере).

### Звуковая сигнализация выхода за пороговую температуру (и влажность для КК)

Для температуры (и влажности для КК) можно задать предельное отклонение в меню программы, при превышении которого включится сигнализация, и на дисплее будет отображено сообщение ALARM (АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ).

### Сигнализация неисправностей датчика температуры (и влажности для КК)

Если датчики работают некорректно, на дисплей выводится сообщение об ошибке.

### Звуковая сигнализация

При активации данной функции изделие издает звуковой сигнал в указанное пользователем время.

### Оповещение по электронной почте

Стандартная функция для всех изделий исполнения TOP+. На указанные адреса электронной почты (не более двух) отправляются сообщения о превышении заданных значений температуры (и влажности для КК). Для работы данной функции требуется подключение к сети Интернет.

### Ethernet-подключение и удаленное управление через Интернет

Стандартная функция для всех изделий исполнения TOP+. Позволяет отслеживать состояние изделия через Интернет, а также управлять им. Возможно одновременное подключение нескольких устройств и управление ими с одного компьютера.

### Память результатов испытания

Все изделия, кроме сухожаровых шкафов SL SIMPLE, оснащены памятью результатов испытания. Модуль памяти позволяет хранить до 2046 показаний для каждого пользователя (для исполнения TOP+ 4100 показаний), которые можно передать на ПК в любое время (требуется программное обеспечение EasyLab Basic, TOP+ Control или EasyLab Professional, а также кабель RSK или USBK).

### Порт доступа для внешнего датчика

Все изделия оснащены стандартным портом доступа, расположенным на левой стенке камеры (в случае SL SIMPLE – на правой). Под заказ размер и местоположение порта доступа могут быть изменены.

### Дверной замок

Все изделия, кроме сухожаровых шкафов SL SIMPLE, оснащены дверным замком.

### Приоритет температуры в программе

Изделия с возможностью приоритета температуры в программе работают по следующему алгоритму: вначале достигается заданная температура, затем начинается отсчет времени. В этом случае приоритетным параметром в программе является температура.

### Приоритет времени в программе

Изделия с возможностью приоритета времени в программе работают по следующему алгоритму: выход на заданную температуру начинается вместе с началом отсчета времени. В этом случае приоритетным параметром в программе является время.

### Система контроля сбоев

#### электропитания

Сбой электропитания во время выполнения программы не отражается на работе изделия благодаря функции автоматического восстановления. Время отсутствия напряжения отображается на экране.

### Учетная запись администратора

Стандартная функция для всех изделий исполнения TOP+. Обеспечивает администрирование учетных записей пользователей и поддержку GLP.

### Программирование на 7 дней

Стандартная функция для всех изделий исполнения TOP+. Позволяет установить независимую программу для каждого дня недели (например, по понедельникам с 09:00 до 15:00 поддерживать 37 °C).

### Сигнализация открытия дверцы

Все изделия стандартно оснащаются функцией сигнализации при открытии дверцы. При открытии дверцы включается звуковой сигнал и на дисплей выводится сообщение. Задержка включения сигнала задается пользователем.

### Интерфейс RS 232 / USB-порт (кроме TOP+)

Все изделия оснащаются портами RS 232 и USB. Функция позволяет передавать и записывать на ПК текущие данные, например, показания температуры и (или) влажности. Для использования функции необходимо приобрести соединительный кабель (RSK или USBK) и программу EasyLab Professional. Функция сохранения данных непосредственно на подключенный USB-накопитель доступна только в изделиях исполнения TOP+.

### Калибровка температуры (и влажности для КК)

Стандартная функция для всех изделий в исполнении TOP+ и изделий CL/IL/SL в исполнении STD. Предоставляет пользователю возможность калибровки температуры (и влажности для КК).



**ПРОЧЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

# Регистратор RT 2014

Регистраторы RT нового поколения предназначены для непрерывного измерения температуры и (или) влажности внутри терmostатирующего оборудования (терmostатирующие камеры, инкубаторы, холодильники, морозильники и пр.) и в помещениях. В случае выхода значения температуры за пределы допустимого диапазона (заданного пользователем) или при сбоях электропитания, регистратор RT 2014 информирует пользователя, отправляя SMS-сообщение на указанные телефонные номера.

Доступно информирование о следующих событиях:

- предупреждение о флюктуациях температуры (превышение/понижение), с возможностью задержки сообщения;
- предупреждение о сбоях питания в сети 230 В, с возможностью задержки сообщения;
- автоматический отчет в заданное время дня или по запросу.

## Модели регистратора

RT 2014\_1T - регистратор температуры или влажности с GSM-модулем. Одноканальная модель для измерений температуры или влажности в терmostатирующей камере (одноканальное исполнение для одного датчика Pt 100 или для одного датчика влажности). Внутренняя память, данные из которой можно загрузить на ПК с помощью приложения EasyLab Professional. GSM-модуль позволяет отправлять SMS-предупреждения на 2 телефонных номера.

RT 2014\_2T - регистратор температуры и (или) влажности с GSM-модулем. Двухканальная модель для измерений температуры и (или) влажности в терmostатирующей камере (двухканальное исполнение для двух датчиков Pt 100 или одного датчика и одного датчика влажности). Внутренняя память, данные из которой можно загрузить на ПК с помощью приложения EasyLab Professional. GSM-модуль позволяет отправлять SMS-предупреждения на 2 телефонных номера.

RT 2014\_1T\_WIFI - регистратор температуры или влажности с Wi-Fi-модулем. Одноканальная модель для измерений температуры или влажности в терmostатирующей камере (одноканальное исполнение для одного датчика Pt 100 или для одного датчика влажности). Внутренняя память, данные из которой можно загрузить на ПК с помощью приложения EasyLab Professional.

RT 2014\_2T\_WIFI - регистратор температуры или влажности с Wi-Fi-модулем. Двухканальная модель для измерений температуры или влажности в терmostатирующей камере (двухканальное исполнение для двух датчиков Pt 100 или одного датчика Pt 100 и одного датчика влажности). Внутренняя память, данные из которой можно загрузить на ПК с помощью приложения EasyLab Professional.

## Принадлежности

Модель	Фото	Наименование	Диапазон измерения	Длина кабеля
PT 100 H		датчик температуры регистратора RT 2014 для высоких температур (рекомендуется для CL/SL)	темпер.: от 0 до +400 °C	длина 2,5 м
PT 100 S		стандартный датчик температуры для регистратора RT 2014 (рекомендуется для ST/CHL/IL/KK)	темпер.: от -40 до +180 °C	длина 2,5 м
PT 100 L		датчик температуры регистратора RT 2014 для низких температур (рекомендуется для ZL)	темпер.: от -110 до +120 °C	длина 2,5 м
RH_STD		датчик температуры и влажности для регистратора RT 2014 (рекомендуется для ST/IL)	относит. влажность: от 0 до 80% темп.: от 0..60°C	длина 2,5 м
RH_PREM		датчик температуры и влажности для регистратора RT 2014 (рекомендуется для KK)	относит. влажность: от 0 до 100% темп.: от -50 до 100°C	длина 2,5 м
HP	-	датчик внутреннего давления	-	-
EasyLab Professional		программное обеспечение, подробнее см. на стр. 68	-	-
FIT		крепление	-	-

## Регистратор RT 2014



Параметр	RT 2014*
измерение температуры	2 внешних датчика Pt 100
диапазон измерения температуры (по датчикам) (°C)	-110 ... +400
диапазон измерения температуры (по датчикам) (°F)	-166 ... +752
дискретность/точность измерения температуры (°C)	0,1 / +/- 0,2
измерение влажности	внешний SHT / HygroClip
диапазон измерения влажности (%)	SHT: 0-80; HygroClip 0-100
дискретность/точность измерения температуры (%)	1% / SHT: 1,8; HygroClip 0,8
измерение атмосферного давления	внутренний пьезорезисторный датчик
диапазон измерения давления (гПа)	300 - 1100
дискретность/точность измерения давления (гПа)	1 / 1,5
длина кабелей датчиков (м)	2,5
часы реального времени	да
интервал записи данных (мин.)	1/5/15/30/60
внутренняя память	1 млн. измерений
внешняя (дополнительная) память	карта MicroSD на 2 Гб
интерфейс	Micro USB
электропитание	5 В пост. тока от порта USB
время работы от батареи	48 ч
дисплей	OLED 128x64 пикс.
габариты (В x Ш x Г) (мм)	85 x 72 x 20
масса (г)	165
частота GSM	4 диапазона
количество телефонных номеров SMS-уведомлений	5
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

\* параметры для полностью оснащенной модели

### Аттестация




Все термостатирующее оборудование производства компании POL-EKO-APARATURA может быть поставлено с аттестатом, выданным аккредитованной Измерительной лабораторией. Подробную информацию об аккредитации POL-EKO Laboratorium Pomiarowe см. на сайте [www.polekolab.pl](http://www.polekolab.pl).

## Регистратор RT 2014 Wi-Fi

### Схема работы RT 2014 GSM и Wi-Fi

Система мониторинга RT 2014 соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической службы к условиям хранения вакцин.

Предусмотренные типы сигнализации обеспечивают надлежащее и безопасное хранение особо ценных вакцин в холодильниках. Отклонение температуры от допустимых пределов приводит не только к финансовым потерям, но и создает угрозу для жизни и здоровья вакцинируемых.

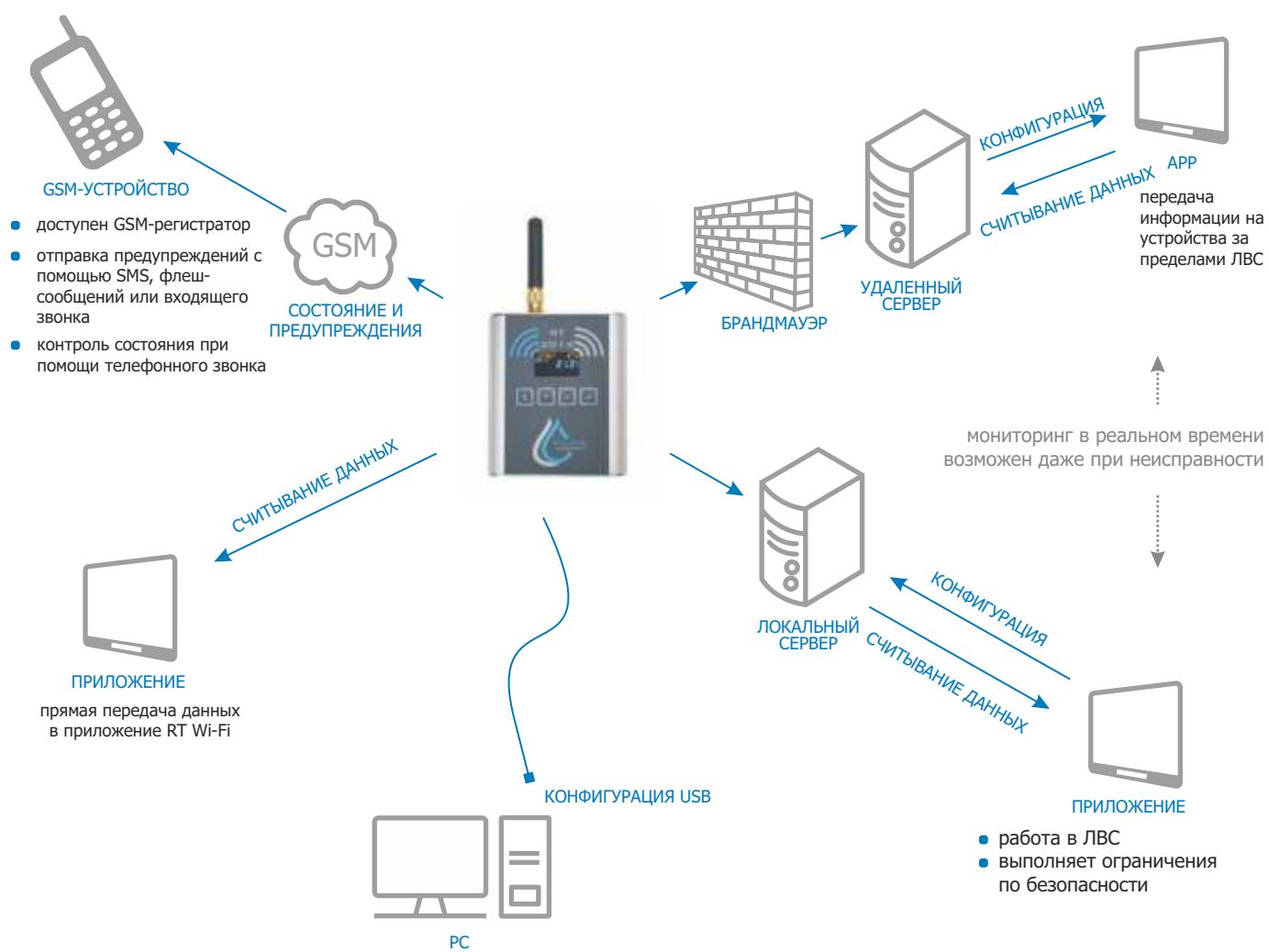

### Приложение RT 2014 обеспечивает обмен данными между регистратором и смартфоном (доступно для загрузки через Google Play)



переход на веб-сайт

# Счетчик колоний

## ◆ Преимущества:

- автоматическая коррекция массы чашек Петри;
- антишоковая технология подсчета;
- кольцевой осветитель обеспечивает равномерное освещение счетного поля и позволяет работать на светлом или темном фоне;
- функция вычисления среднего значения;
- стандартный маркер в комплекте;
- маркер ZM 2002 для внешнего счета (опционально);
- адаптеры для чашек Петри диаметром < 120 мм;
- съемная шкала Вольфхугеля;
- регулируемое усилие контакта;
- звуковой и визуальный сигнал при подсчете;
- регулируемое положение увеличительного стекла;
- доступная цена.

## ◆ Стандартные характеристики:

- счет колоний;
- увеличительное стекло;
- стандартный маркер;
- светлый или темный фон;
- адаптеры чашек Петри;
- шкала Вольфхугеля.

## ◆ Принадлежности:

- маркер ZM 2002 для внешнего подсчета.



**Счетчик колоний** — незаменимое устройство для любой микробиологической лаборатории, поскольку подсчет колоний на чашках Петри отнимает больше всего времени.

Удобный в использовании счетчик для быстрого и точного подсчета.

### Параметры

диаметр счетного поля (мм)	120
дисплей	светодиодный (0...999)
увеличительное стекло	2,5 X
освещение	кольцевой осветитель 20 Вт
габариты (мм)	ширина x глубина x высота
	300 x 325 x 90
масса (кг)	4,9
номинальная мощность (Вт)	22
напряжение 50/60 Гц (В)*	230
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

\* также доступно исполнение на 115 В 60 Гц



## Лабораторные шейкеры

### ◆ Преимущества:

- орбитальное движение;
- управление вращением и временем с помощью микропроцессора;
- диаметр орбиты: от 10 до 25 мм;
- максимальная нагрузка: 10 кг;
- плавная регулировка скорости: от 30 до 300 об/мин.;
- режим встрахивания: от 1 мин. до 99 ч или непрерывно;
- цифровой ЖК-дисплей;
- противоскользящий коврик (опция);
- различные размеры платформы;
- можно устанавливать внутри охлаждаемых инкубаторов.

### ◆ Принадлежности:

- универсальная платформа;
- приставка для делительных воронок;
- зажим для крепления;
- платформа для чашек Петри;
- платформа для пробирок;
- приспособление для конических колб от 25 до 2 000 мл;
- противоскользящий коврик.




Лабораторные шейкеры можно устанавливать внутри охлаждаемых инкубаторов (модели IL).



#### Параметры

типа встрахивания	орбитальное			
контроллер	микропроцессорный			
дисплей	ЖК-дисплей			
диапазон скорости (об/мин.)	30 ... 500		30 ... 300	
точность (об/мин.)		10		
амплитуда (мм)	5		5 или 10	
максимальная нагрузка (кг)		10		
режим встрахивания	от 1 мин. до 99 ч или непрерывная работа			
размеры с платформой / без платформы (мм)	ширина	320	390	550
	высота	120 / 220	120 / 220	120 / 220
	глубина	330	400	440
устанавливается в охлаждаемый инкубатор	ILW 53	ILW 115	ILW 240	ILW 400
температура окружающей среды (Вт)	60	60	60	60
масса с платформой (кг)	10	15	22	25
температура окружающей среды (°C)	+10...+40			
влажность (%)	до 70			
напряжение 50/60 Гц (В)	230 В 50 Гц			
срок гарантии	24 месяца			
изготовитель	POL-EKO-APARATURA			

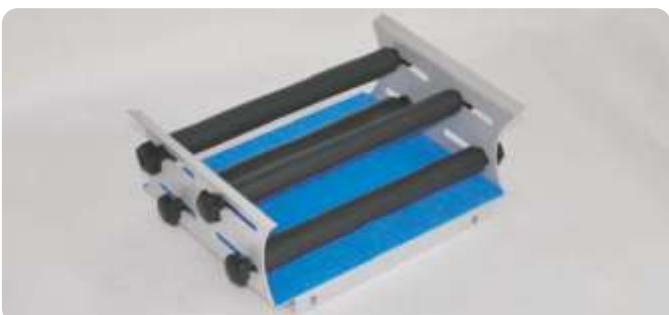

#### Универсальная платформа

Универсальная платформа с четырьмя прижимными роликами для различных видов сосудов (без противоскользящего коврика).



#### Платформа для крепления зажимов под колбы

Платформа для крепления зажимов под колбы следующих объемов: 25, 50, 100, 250, 500 мл. Зажимы заказываются отдельно.



#### Платформа для встряхивания чашек Петри

Платформа для встряхивания чашек Петри, культуральных флаконов и других сосудов с низко расположенным центром тяжести.



#### Платформа для делительных воронок

Платформа для делительных воронок с тремя прижимными роликами для встряхивания, высаливания, экстракции и концентрирования.



#### Противоскользящий коврик

Противоскользящий коврик для лабораторных шейкеров LS.

 Made in Poland. Established 1990.

# 2017

## POL-EKO-APARATURA

производитель оборудования  
для лабораторных анализов и технологических процессов

POL-EKO-APARATURA sp.j.  
ul. Kokoszycka 172C  
44 - 300 Wodzisław Śląski  
POLAND  
Tel: +48 32 453 91 70  
Fax: +48 32 453 91 85  
E-mail: [export@pol-eko.com.pl](mailto:export@pol-eko.com.pl)  
[www.pol-eko.eu](http://www.pol-eko.eu)



Официальный дистрибутор компании POL-EKO-APARATURA  
на территории России:  
**ООО «Научная система»**  
8 812 677-56-96  
[www.ssci-ltd.ru](http://www.ssci-ltd.ru)  
[post@ssci-ltd.ru](mailto:post@ssci-ltd.ru)

Каталог продукции POL-EKO-APARATURA, версия 08.2017.

Несмотря на предпринятые меры по устранению фактических ошибок,

мы не можем гарантировать полную достоверность всех приведенных технических данных.

Компания POL-EKO-APARATURA оставляет за собой право изменения технических параметров без предварительного уведомления.

Все размеры приведены с допуском ±5%.